


R82[®] 

gazelle ps[™]

Suomenkielinen käyttöohje

FIN SISÄLLYS

Turvallisuus	4
Takuu	4
Työkalut	4
Kunnossapito	4
Käyttövalmiiksi	5
Pääntuki kasvo-aukolla	6
Vartalogit ja jatke	6
Hihna	7
Selkätuki	7
Sivutuki	8
Itsenäinen abduktio	9
Säären kulmasäätö	10
Polvituki	11
Jalkatuki	12
Pöytä kaukalolla tai ilman	13
Kallistussäätö	14
Kaasujousen säätäminen	15
Tuotteen tunnistus	16
Mitat	17
Tekniset tiedot	18
Valmistaja	18
Myyjä	18

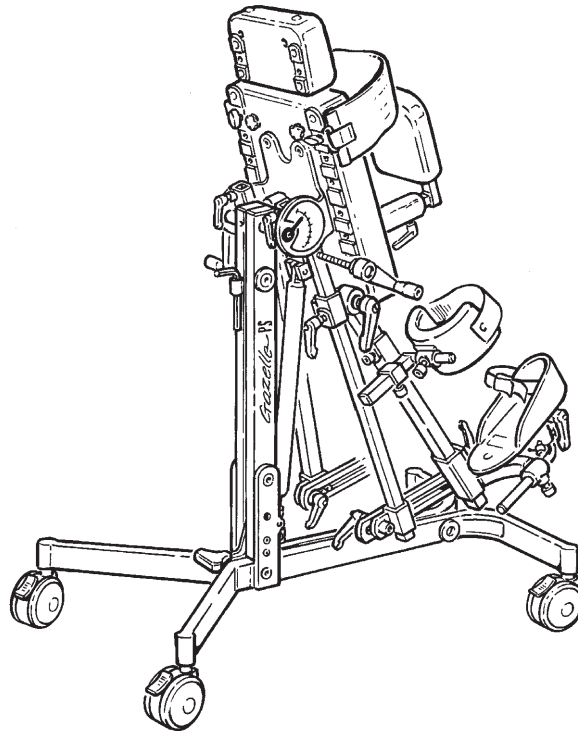

FIN GAZELLE PS

Onnittelut Gazelle PS:n valinnan johdosta. Olemme ehdottoman varmoja, että se tulee täyttämään tämänkaltaista nykyaikaista apuvälinettä koskevat odotuksenne. Gazelle PS on saatavana kolmessa koossa ja on tarkoitettu iältään 1-14 -vuotiaille lapsille. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima takaavat sen säätävän erityyppisistä haitoista kärsiville lapsille sopivaksi.

Gazelle PS on ensisijaisesti tarkoitettu eteenpäinseisomiseen, mutta selinseisonta on myös mahdollista. Se kallistuu rajattomasti pystysuorasta 15°:seen yli vaakasuoran. On parasta sijoittaa lapsi Gazelle PS:ään vaakasuorassa asennossa.

Lisätukea tarvitsevia lapsia varten voidaan asentaa sivutuet ja kasvolevy. Pöytää (kaukalolla tai ilman) voidaan käyttää puuhan järjestämiseksi lapselle ja tukemaan lapsen käsivarsia.

Tämä käyttöohje toimii apuna täyden hyödyn saamiseksi Gazelle PS -seisomattelineestänne.



FIN TURVALLISUUS

Gazelle PS on CE-merkitty lääketieteellisten välineiden luokan I järjestelmiä koskevan eurooppalaisen turvallisuusdirektiivin 83/42/EØF, 14. kesäkuuta 1993, mukaisesti. Tämä takaa sen täyttävän kaikki eurooppalaiset terveys- ja turvavaatimukset.

Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.



Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.



Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne ennen joka käyttöä.

FIN TAKUU

R82:lla on materiaali- ja valmistusviat kattava 2 vuoden vuoden sekä metallirungon rikkoutumisen viallisen hitsauksen seurauksena kattava 5 vuoden vakuu. Takuu voi raueta, jos asiakas laiminlyö velvollisuutensa huoltaa ja/tai pitää kunnossa päivittäin toimittajan ja/tai käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden mukaan ja annettuja huoltovälejä noudattaen. Lisätietoja on R82-sivustossa. Takuu pysyy voimassa vain, jos R82:n tuotetta käytetään sen ostomaassa ja jos tuote voidaan tunnistaa sen sarjanumeron perusteella. Takuu ei kata tapaturmavahinkoja eikä väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata normaalin kulumisen vuoksi määräväleihin vaihdettavia osia. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin R82:n alkuperäisiä osia tai tarvikkeita tai jos muu kuin R82:n valtuutettu edustaja tai R82: tuotteita korjaamaan kouluttama henkilö korjaa tuotteen tai tekee siihen muutoksia. R82 varaa itselleen oikeuden tarkastaa tuotteen ja sen asiakirjat ennen takuuhuollon antamista sekä oikeuden päättää, korjataanko tuote vai vaihdetaanko se uuteen. Asiakkaan velvollisuus on palauttaa tuote takuuhuoltoon varten sen ostopaikkaan. Tämän takuun myöntää R82 tai sen jälleenmyyjä.

FIN TYÖKALUT

Käytä mukana toimitettua 6 mm:n kuusiokoloavainta tässä käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen tekemiseen.

FIN KUNNOSSAPITO



Gazelle PS toimii ilman huoltoa, mutta on suositeltavaa puhdistaa runko usein. Älä käytä klooria tai denaturoitua spritää sisältäviä puhdistusaineita.



Huoltajan tulisi tarkastaa ja voidella kääntyvät osat ajoittain. Suosittelemme synteettisen teflonöljyn käyttämistä.



Älä altista kaasujousta paineelle, korkeille lämpötiloille tai puhkeamiselle.






Tässä käyttöohjeessa kuvattuja säätöjä saa tehdä ainoastaan valtuutettu R82:n henkilöstö.

FIN KÄYTTÖVALMIIKSI

Gazelle PS toimitetaan kokoontaitettuna tilan säästämiseksi kuljetuksen aikana. Noudata alla olevaa ohjetta Gazelle PS:n taittamiseksi auki:

- 1) Varmista, että kaikki neljä pyörää ovat lukitut.
- 2) Paina jalalla alustarunkoa, jolloin Gazelle PS nousee pystyasentoon. Varmista, että Gazelle PS istuu tarkasti alustarungolla olevaan kannattimeen.
- 3) Kiristä ruuvi (A) mukana toimitteulla 6 mm:n kuusiokoloavaimella Gazelle PS:n ollessa pystyasennossa. Kuusiokoloavain on sijoitettu Gazelle PS:n mukaan (B) ja on aina saatavilla säätöjen tekemiseksi.

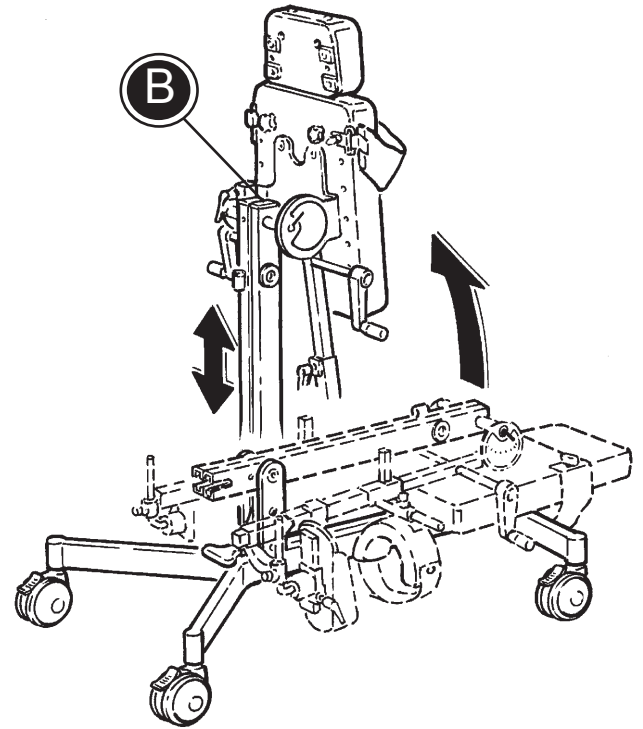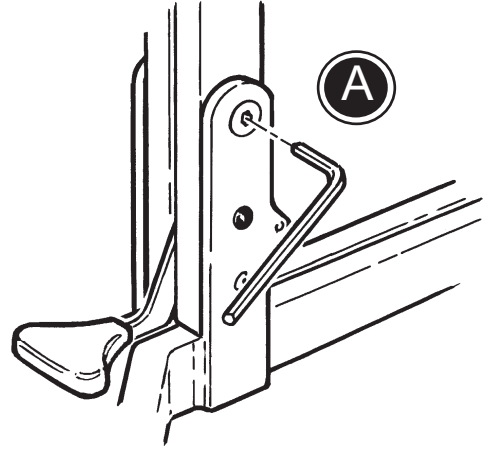

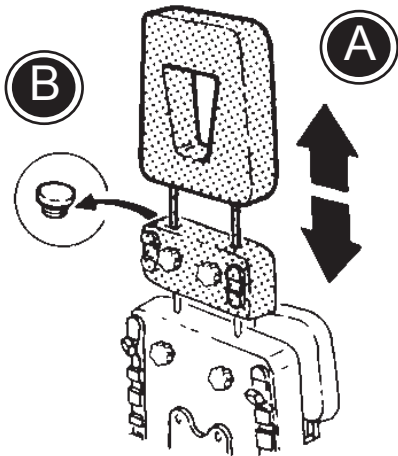


FIN PÄÄNTUKI KASVO- AUKOLLA

Kasvoaukolla varustetun pääntuen asentaminen:

A) Kaksi pidiketankoa kulkevat säädettävän vartalotuen läpi kahden muovitulpan poistamisen jälkeen.

B) Rajoittimet voidaan ruuvata paikoilleen, kun säädettävään vartalotukeen on leikattu aukot.

Saattaa olla hyödyllistä asentaa kasvoaukolla varustettu pääntuki ennen lapsen sijoittamista vaakasuorassa olevalle alustalle. Irrota pääntuki, kun alusta nostetaan pystyasentoon.

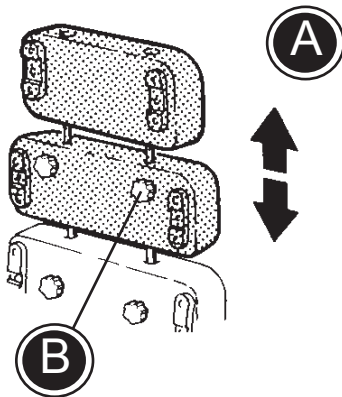


FIN VARTALOTUKI JA JATKE

Korkeussäädettävä vartalotuki ja jatke voidaan asentaa Gazelle PS:ään (A).

Kiristä takana olevat ruuvit (B).

FIN HIHNA

Asenna hihna vartalotuen päälle tai pohjalevyyn riippuen siitä, missä tukea tarvitaan. Hihna asennetaan taakse (A) ja kiinnitetään edestä tarranauhalla ja pikalukitussojella (B).

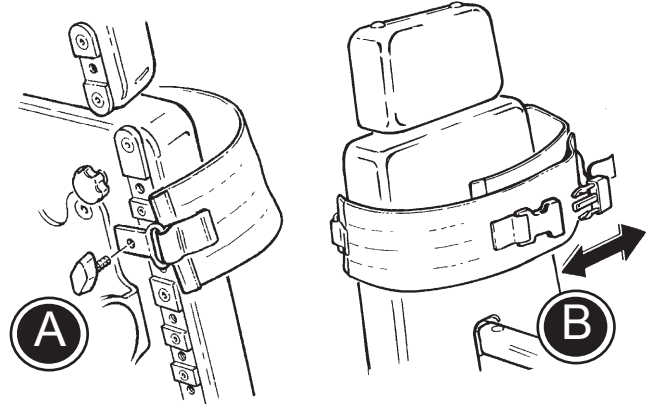

FIN SELKÄTUKI



Selkätukea voidaan säätää korkeus- (A) ja syvyysuunnassa (B).

Ennen lapsen asettamista:


1. Irrota selkätuki (C).
2. Taita selkätuen kannatin alas avausketjusta (D) vetämällä.

Kiristä vivuilla.

Lapsi ei saa istua selkätuen kannattimella. Lapsen ja kannattimen välissä on aina oltava muutamia senttimetrejä.

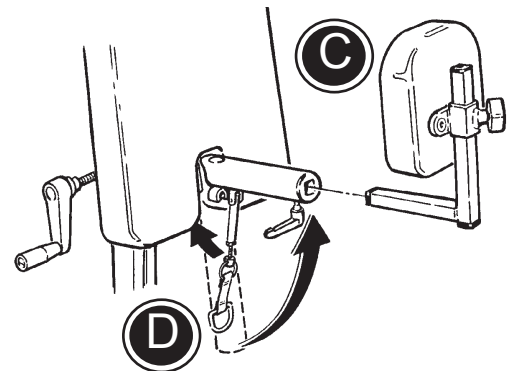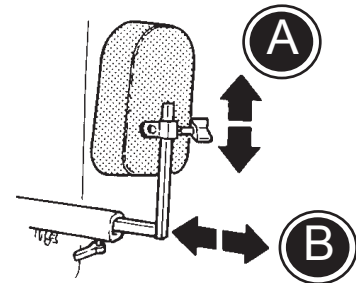

! HUOM! Noudata varovaisuutta selkätukea uudelleen asentaessasi.

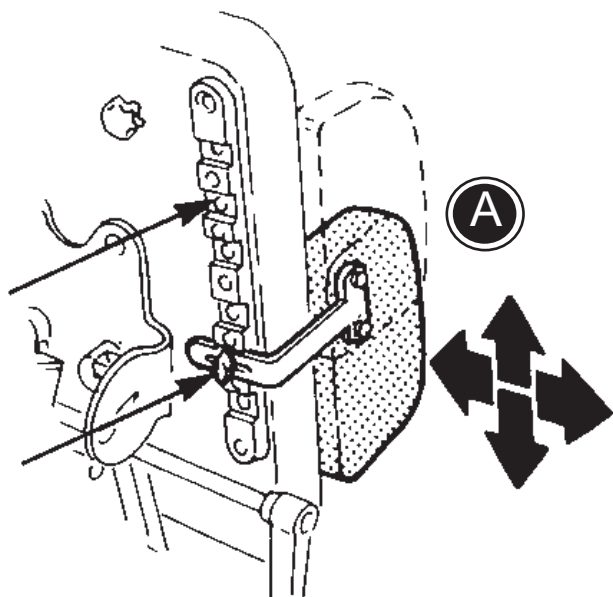


FIN SIVUTUKI


Asenna sivutuet vartalotukeen sopivan tuen saamiseksi ylävartalolle, tai pohjalevyyn kehon ja lonkkien tukemiseksi. Sivutuet ovat säädettävissä korkeus- ja leveysuunnassa (A).

FIN ITSENÄINEN ABDUKTIO

Abduktiota säädetään 0° - 30° kiertämällä molemmilla puolin olevaa kahvaa (A).

Sisäänvedettävä kahva kallistuksensäätöä varten (B).

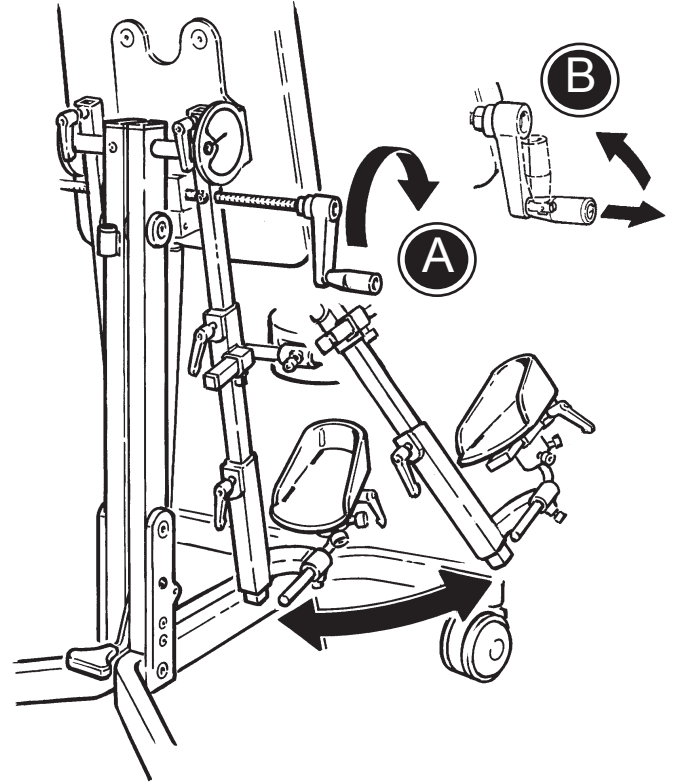

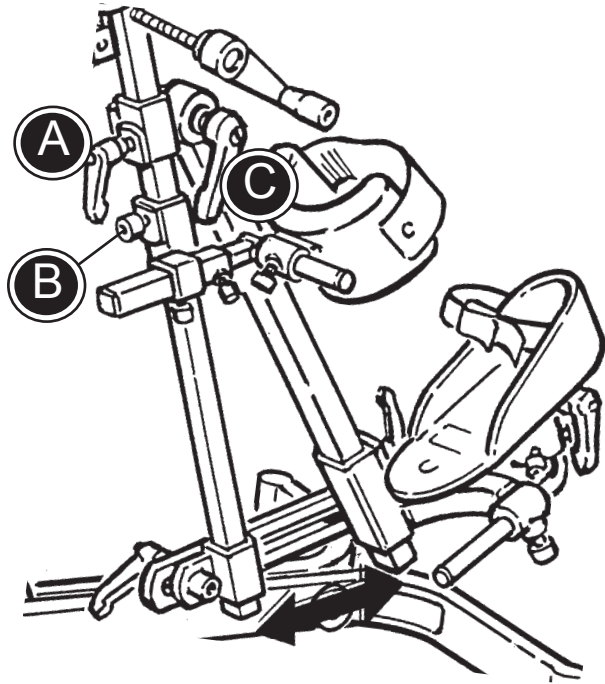

FIN SÄÄREN KULMASÄÄTÖ

Asenna säären kulmasäätöön käytettävä tanko abduktiotankoon seuraavasti:

- 1) Avaa kahvaa (A) tuen poistamiseksi.
- 2) Avaa kuusiokoloruuvia (B) polvitukien irrottamiseksi.
- 3) Asenna polvituki säären kulmasäätimen tankoon ja kiristä kahva (A).
- 4) Asenna jalkatuki säären kulmasäätimen tankoon.





Säädä säären kulmasäätimen korkeutta kiertämällä kahvaa (B) ja säädä kulmaa kiertämällä kahvaa (C). Jalkatuen säätämisen osalta katso sivu 16.


FIN POLVITUKI

Gazelle PS:n perustoimitukseen kuuluvat polvituet eteenpäinseisovien lasten käytettäväksi. Käännä polvituet ympäri niiden käyttämiseksi selinseisovia lapsia varten:

- 1) Avaa vipua (A) jalkatukien irrottamiseksi.
- 2) Avaa vipua (B) koko polvitukirakennelman irrottamiseksi.
- 3) Asenna koko polvitukirakenne vastakkaiselle puolelle ja kiristä vivulla.
- 4) Käännä polvituen kannatinta 180° avaamalla ruuveja (C) ja (D).
- 5) Avaa ruuvia (E) ja käännä polvituki ympäri selinseisovia lapsia varten.

Säädä polvitukea mukana toimitetulla 6 mm:n kuusiokoloavaimella. Avaa ruuveja (C) ja (D), ja polvitukien syvyyttä voidaan säätää. Avaamalla ruuvia (E) polvituet säätävät leveyssuunnassa ja kallistukseltaan. Säädä koko polvitukirakennelman korkeutta vivulla (B).

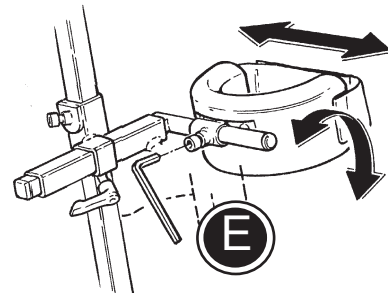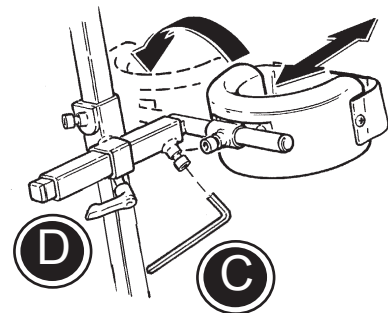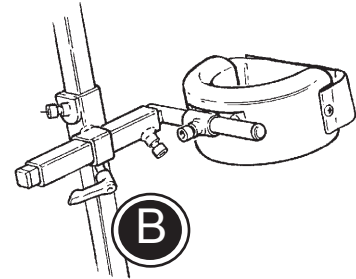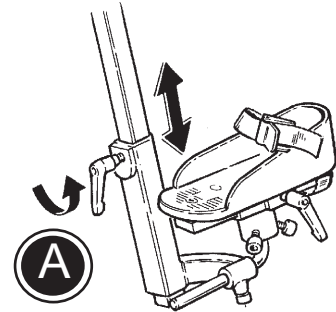

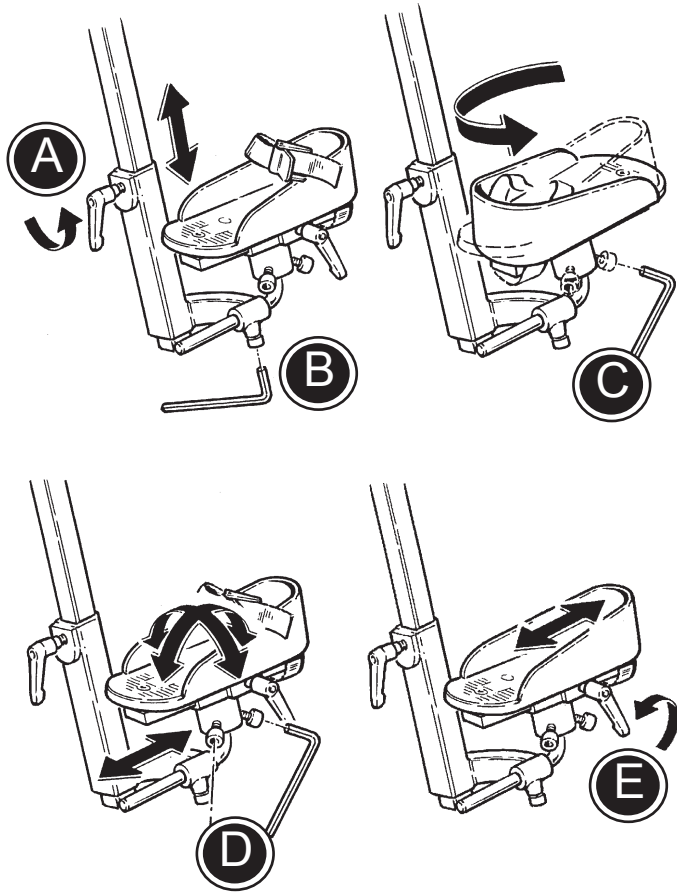

FIN JALKATUKI

Selinseisomista varten:

Kun polvituki käännetään, on jalkatuki asennettava samalle puolelle, josta ne purettiin.

- 1) Asenna jalkatuet ja kiristä vipu. (A).
- 2) Avaa ruuvia (B) ja säädä jalkatuen korkeus.
- 3) Avaa ruuveja (C) ja (D) ja käännä jalkatukea 180°.
- 4) Kiristä ruuvit vaadittuun asentoon.

Jalkatuen kannatin asennetaan niveleen. Tämän avulla jalkalevyä voidaan säätää eri kulmiin avaamalla ruuveja (C) ja (D).

Levyä voidaan säätää syvyysuunnassa avaamalla vipua (E) tai avaamalla ruuvia (B).


FIN PÖYTÄ KAUKALOLLA TAI ILMAN

Avaa suuret kahvat (A) ja (B) kokonaan ja sijoita pöydän kannatin kahteen selkänojassa olevaan putkeen. Kiristä suuret kahvat (A) ja (B) uudelleen.


Avaa suurta kahvaa (A) ja pöytärakennelmaa voidaan kääntää ympäri 180 astetta joko päin- tai selinseisomisasentoa varten.

Aseta pöytä asennusputkiin. Kun haluttu kohta on saavutettu, kiristä suuret kahvat (C).

Avaa kahvoja (B) pöydän korkeuden säätämiseksi. Avaa kahvaa (A) pöydän kallistuksen säätämiseksi.

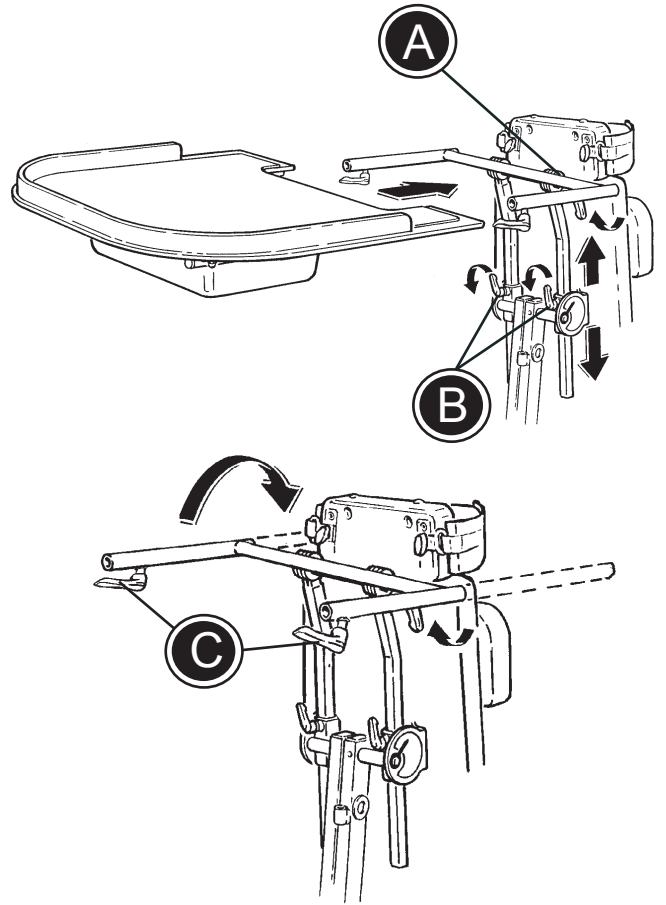

Kaukalolla varustettu pöytä toimitetaan lisäksi tulevalla kansilevyllä, joten sitä voidaan käyttää normaalina pöytänä.

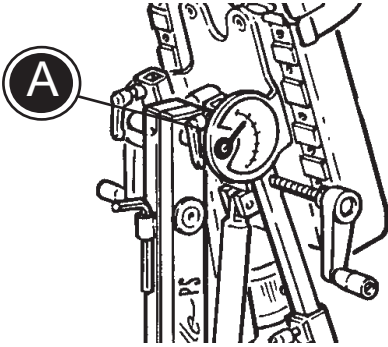


FIN KALLISTUSSÄÄTÖ

Kulma-asteikko (A)

Säädä Gazelle PS:n kallistusta pystysuorasta 15°:een vaakasuoran alapuolelle painamalla jalkapoljinta (B).



Jalkapoljin voidaan turvallisuuden vuoksi lukita haluttuun kallistusasemaan. Kierrä kaasujousen alapäässä olevaa painiketta ja Gazelle PS lukittuu (C).

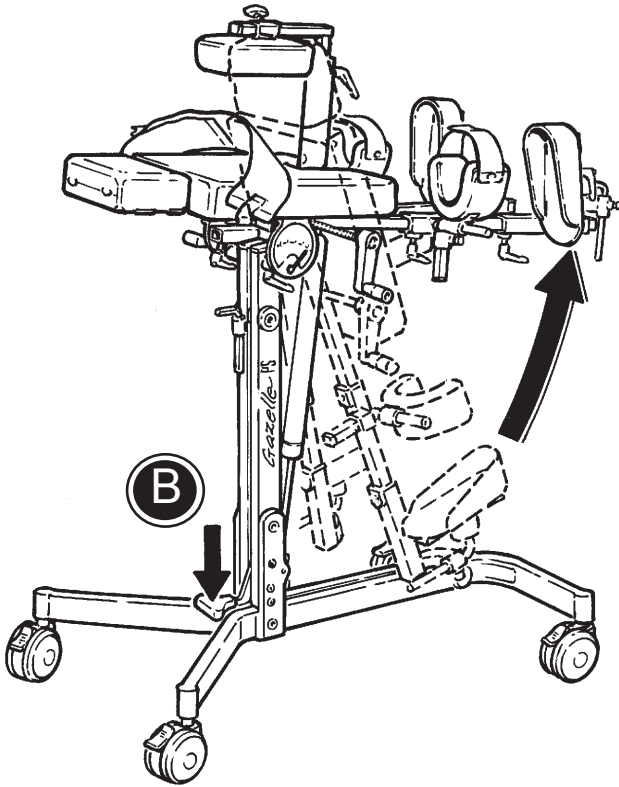


FIN KAASUJOUSEN SÄÄTÄMINEN


Gazelle PS on varustettu kaasujousella kallistuksensäätöä varten. Jonkin ajan kuluttua se saattaa vaatia säätämistä. Säätäminen on tarpeen, kun:

- kaasujousi avautuu itsestään
- kaasujousi ei avaudu lainkaan

Mikäli kaasujousi avautuu itsestään, avaa mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä tankoa (A) vastapäivään sen kiristämiseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.

Ellei kaasujousi avaudu lainkaan, avaa mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierrä tankoa (A) myötäpäivään sen avaamiseksi. Kiristä mutteri (B) uudelleen.

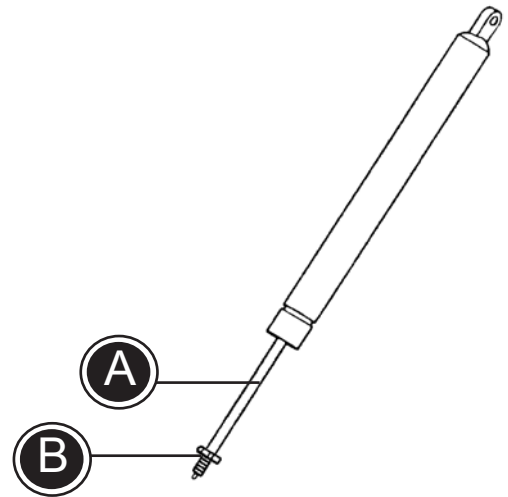

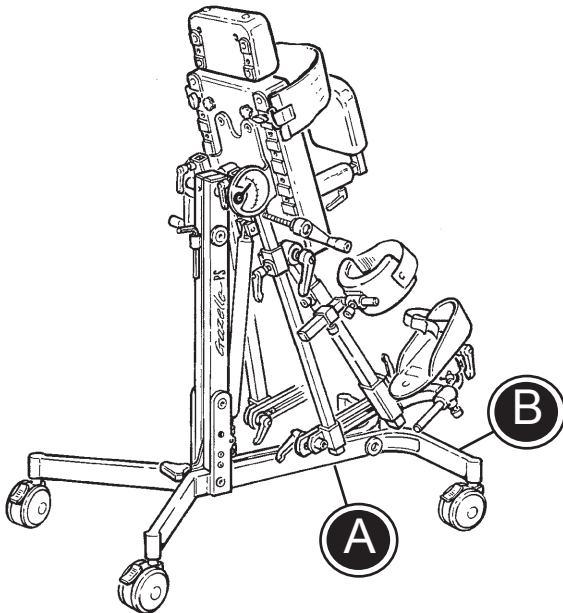

FIN TUOTTEEN TUNNISTUS

A) Sarjanumero

Etiketti sijaitsee rungon alla.

B) Valmistaja


Etiketti sijaitsee rungon takana vasemman takapyörän vieressä.

A



B



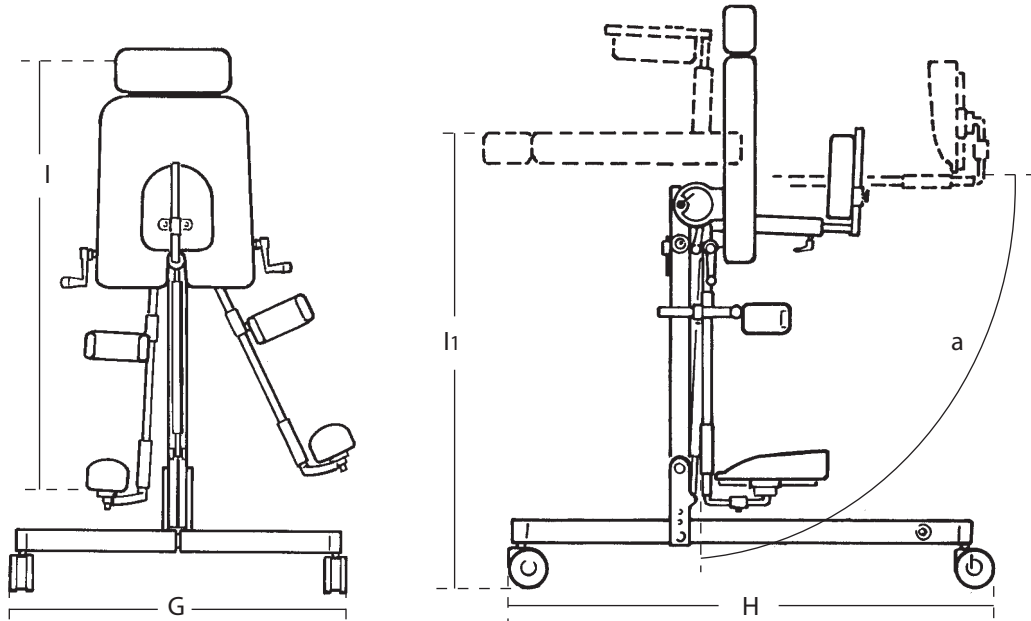

FIN MITAT

	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Kokonaisleveys, runko (G)	48 cm	58 cm	65 cm
Korkeus, vaakas. (H)	76 cm	80 cm	90 cm
Pituus, jalka-kainalo (I)	45-95 cm	60-105 cm	70-125 cm
Kokonaispituus, runko (I1)	76 cm	88 cm	99 cm
Asentokallistus (a)	90° til -15°	90° til -15°	90° til -15°
Paino	20 kg	22 kg	24 kg
Maksimikuormitus	40 kg	60 kg	80 kg

FIN TEKNISET TIEDOT

Runko: kromi tai jauhelakattu teräs
Pehmuste: PUR (polyuretaani)

FIN VALMISTAJA

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved

FIN MYYJÄ



Myyjänne löytyy verkkosivuilta www.R82.com

