

Tuotekuvaus

HandyBelt-siirtovyötä käytetään siirron tukemiseen. Useimmiten vyö asetetaan avustettavalle ja avustettava käyttää sen jälkeen vyötä siirron apuvälineenä. Vaihtoehtoisesti se voidaan asettaa sekä avustettavalle että avustajalle, jolloin myös avustettava voi käyttää vyötä siirtymisen tukena.


HandyBelt-siirtovyössä on turvasolki, joka on kestävyystestattu 200 kg:aan asti.

Lue käyttöohje ennen vyön käyttämistä; on tärkeää ymmärtää sen sisältö kokonaisuudessaan. Avustajana olet aina vastuussa käyttäjän turvallisuudesta. Sinun tulee tiedostaa avustettavan edellytykset selviytyä siirtotilanteesta. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteys valmistajaan tai toimittajaan. Voit ladata käyttöohjeet veloittuksetta sivustoltamme www.liko.com.


△ Muista seuraavat asiat ennen käyttöä:

- Suunnittele siirtotilanne ennen siirtämistä, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Ota käyttöön sopivat menettelytavat avustajien tarvittavan lukumäärän tapauskohtaista arviointia varten.
- Avustettavan tulee ymmärtää annetut ohjeet ja noudattaa niitä, jotta häntä voitaisiin ohjata liikkumaan luonnollisesti nostamisen aikana.
- Avustettavan on pystyttävä pitämään pää ja vartalo tasapainossa ja hänen on kyettävä istumaan pystyasennossa. Kävelyharjoittelussa on myös tärkeää, että avustettava pystyy pitämään tasapainon seisoessaan ja liikuttamaan itsenäisesti jalkojaan askeleen ottamista varten.
- Tarkista ennen siirtoa, että vyö on oikein asetettu.
- HandyBelt ei ole nostoväline eikä kahvoja ole tarkoitettu nostamiseen.
- Avustettavan oman rasituksen kannalta on tärkeää, ettei hän yritä pitää avustettavaa seisaallaan, jos tämä on kaatumassa. Sen sijaan suosittelemme, että hän laskee avustettavan lattialle mahdollisimman pehmeästi. Avustettavan on syytä päästää irti kahvoista käsien vääntymisen estämiseksi.
- Työskentele aina ergonomisesti - katso ergonomista käsittelyä koskevaa standardia ISO 11228.
- Tarkista HandyBelt säännöllisesti. Kiinnitä huomiota erityisesti saumoihin, kankaaseen, hihnoihin, kahvoihin ja turvasolkeen. Älä käytä vahingoittuneita siirtovarusteita.

Käyttö



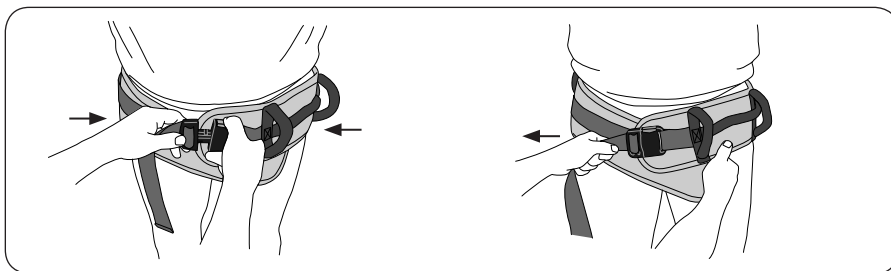


Poistaminen

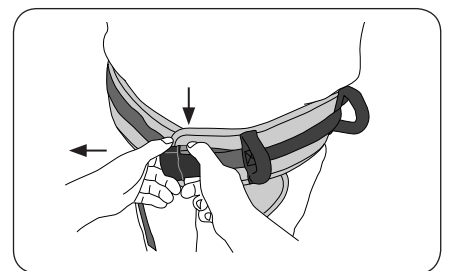


Käyttöalueet

Nouseminen istumasta seisomaan, siirtyminen istumasta istumaan ja seisonnan/kävelyn tukeminen.

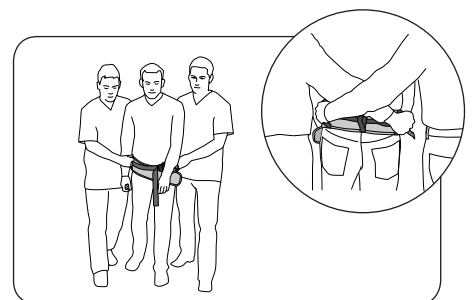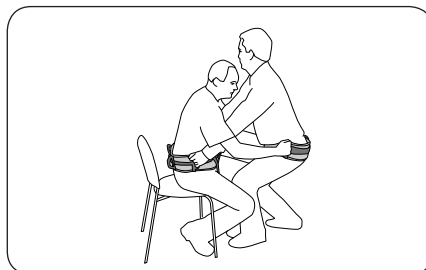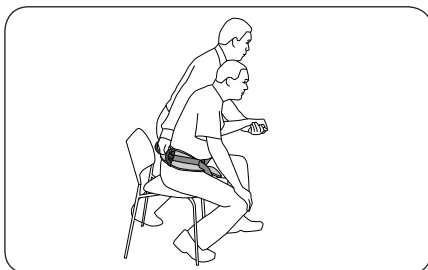

HandyBelt-siirtovyön tuotetiedot

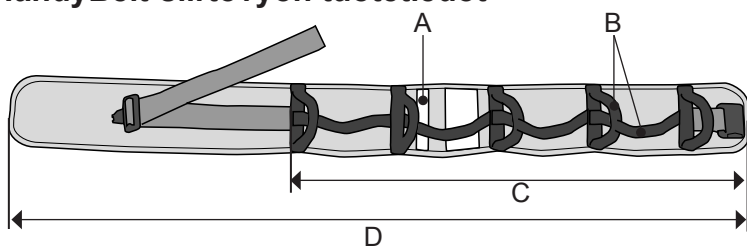

Nimi	Tuote numero	Koko	Kokomerkintä (A)	Kahvojen lukumäärä (B)	Pituus (C/D)
HandyBelt	3760014	S Pieni	Oranssi	7	60/100 cm
HandyBelt	3760015	M Keskipiko	Keltainen	9	75/120 cm
HandyBelt	3760016	L Suuri	Sininen	11	90/140 cm
HandyBelt	3760017	XL XL-suuri	Musta	13	110/180 cm

Materiaali: polyesteri

Pesuohe:
60-85°C
140-185°F

CE Luokan I lääkintälaite

HandyBelt täyttää lääketieteellisiä tuotteita koskevan direktiivin (MDD 93/42/EEC) luokan I vaatimukset.

Design and Quality by Liko in Sweden

Vaihtoehtoiset tuotteet

On tärkeää varmistaa, että siirto ei ole avustajalle liian rasittava. Jos avustettava tarvitsee lisää tukea, Liko suosittelee muita tuotteita kattavasta nosto- ja kävelyapuvälineiden valikoimasta. Katso lisätietoja sivustoltamme www.liko.com.

Muita vaihtoehtoisia tuotteita Liko-mallistossa:

RollOn-nousutuki

Sabina-henkilönostin

Liko-nostohousut yhdessä nostimen kanssa

Liko-nostoliivi yhdessä nostimen kanssa

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta.

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniiikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.



A **Hill-Rom** Company

www.liko.com

Valmistaja:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

