



Etac Swift Mobil-2

Suihku- ja wc-tuolit

 **etac**[®]
Creating Possibilities



Esittelyssä uusi Swift Mobil-2 -tuoteperhe

Etac Swift Mobil-2 -suihku- ja wc-tuolit ovat helppoja käsitellä ja niiden avulla hoidettavan siirtäminen ja kuljettaminen kylpyhuoneeseen ja sieltä pois on vaivatonta. Ne on tarkoitettu helpottamaan niitä käyttävien ihmisten elämää. Ymmärrämme, mikä hoitajille ja käyttäjille on tärkeää, sillä olemme kysyneet tätä heiltä. Kuuntelemalla asiakkaitamme ymmärrämme ominaisuuksien, kuten käytettävyys, muunneltavuus, arvokkuus ja mukavuus, merkityksen.



Helpottaa käytettävyyttä

Valtaosa hoitajista kertoo, että käytettävyys muodostuu usein ongelmaksi hoitorutiinien aikana ja pakottaa kuormittaviin työasentoihin. Käytettävyyden helpottamiseksi Swift Mobil-2 -istuimen takaosa on avonainen ja molemmilla sivuilla on vapaata tilaa. Nämä näennäisesti pienet muutokset nopeuttavat henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen rutiineja ja tekevät niistä kaikkien kannalta arvokkaampia.

Tuotteen muunneltavuus ja käyttömukavuus

Kaikkien Swift Mobil-2 -mallien enimmäiskäyttöpaino on 160 kg ja niitä voidaan helposti mukauttaa suurempien tai pienempien käyttäjien ja heidän kuntonsa ja tarpeidensa mukaan. Tuoleissa on useita eri säätöjä ja niihin saa runsaasti erilaisia lisävarusteita käyttömukavuuden ja vakauden lisäämiseksi. Muutamalla pienellä muutoksella voidaan vaikuttaa merkittävästi käyttäjän turvallisuuteen ja hyvinvointiin samoin kuin hoitajan työolosuhteisiin.

Tutustu hyötyihin

Toiminnallisten ja muunneltavien liikuteltavien suihku- ja wc-tuolien valikoima on suunniteltu helpottamaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen rutiineja niin hoitajan kuin käyttäjänkin kannalta. Swift Mobil-2 -tuolista on saatavana kolme eri mallia: vakiomallinen suihku- ja wc-tuoli, kallistettava ja 24" kelattava malli.

Säädettävä päätuki

Suunniteltu lisäämään mukavuutta ja muunneltavuutta, voidaan säätää sopimaan käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.

Mukava selkätuki

Säädettävissä, kuivuu nopeasti. Napakka malli ja kaksoiskiinnikkeet työntötangon ympärillä.

Helppo käytettävyys

Istuimen takaosa on varustettu aukolla, edessä on syvennys ja molemmilla puolilla vapaata tilaa.

Korkeussäädettävä

Helppo säätää erilaisiin kiinteisiin istuinkorkeuksiin ilman työkaluja.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2

Monipuoliset käsituet

Säädettävissä korkeus- tai leveysuunnissa.

"Etac Easy-Clean"

Ainutlaatuinen Etacin tuotteisiin suunniteltu pinta. Siinä yhdistyvät kitka, puhtaus, luistamattomuus ja hygienia!

Ergonominen jalkatuki

Hieman kaarevat jalkatuet tukevat jalkapöytää ja jalan kaartamista näin mukavuuden, vakauden ja rentouden.



Etac Swift Mobil Tilt-2



Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 on työnnettävä, muunneltava suihku- ja wc-tuoli, joka varmistaa hoitajan kannalta parhaan mahdollisen käytettävyyden potilaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehdittaessa. Tuolia on kevyt ohjata ja se voidaan mukauttaa moniin eri käyttäjätarpeisiin.

Yksilöllinen istuin

Istuimen takaosassa on aukko, mikä helpottaa hoitajaa hänen avustaessaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa. Lisäksi nimenomaisesti Etacille suunniteltu istuimen pinnan Etac EasyClean -kitkakuvioiden yhdistää täydellisesti kitkan ja puhtauden.

Helpotusta istumiseen

Herkkäihoisille on tarjolla erikoispehmeitä istuinpehmusteita, jotka muotoilun ansiosta tukevat ja helpottavat istumista. Swift Mobil-2 -tuolin pehmeä ja nopeasti kuivuva selkätuki ja kaarevat jalkatuet lisäävät entisestään käyttömukavuutta.

Erittäin mukautettava

Swift Mobil-2 -tuolin käyttäjän enimmäispaino on 160 kg ja sen istuinkorkeutta voidaan säätää 45–60 cm. Käsitukien korkeutta ja leveyttä voidaan säätää 6 cm kuhunkin suuntaan. Sivuntaitettavat jalkatuet ovat korkeussäädettävät ja niistä on saatavana myös lyhyempi malli käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun käytössä on korkeampi istuinpehmuste.

Etac Swift Mobil-2 XL

Suuremmille käyttäjille on saatavana malli, jossa on leveämpi selkätuki (6 cm leveämpi käsitukien väli). XL-kokoinen selkätukirunko on saatavana lisävarusteena.



Etac Swift Mobil-2

	Tuotenumero
Swift Mobil-2, osittain koottu	80229400
Swift Mobil-2, koottu	80229401
Swift Mobil-2, sis. ämpäriin pidikkeet	80229404
Swift Mobil-2, sis. alusastian pidikkeet	80229406
Swift Mobil-2 XL, osittain koottu, XL-kokoinen selkätuki	80229467

Vakiovarusteet: selkätuki, istuin, käsituet, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

Paino

16,6 kg

Mitat

Kokonaisleveys: 57/58/64 cm
Käsitukien välinen leveys: 42/48/54 cm

Tuotenumero

Materiaalit

Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuki: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri



Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta. Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa kolmen minuutin ajan.
Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg / 353 lbs

Ominaisuudet



Takaa avonainen istuin

Varmistaa hoitajan kannalta helpon käytettävyyden ja tuo mukavuutta käyttäjälle. Ainutlaatuinen Etacille suunniteltu istuimen pinta ja siinä yhdistyvät kitka, puhtaus, luistamattomuus ja hygienia!



Säädettävä selkätuki

Helppo säätää asennon ja vartalon mallin mukaan maksimaalista mukavuutta ajatellen. Kaksoiskiinnikkeet työntötkojen ympärillä. Pehmeä ja nopeasti kuivuva materiaali.



Säädettävät käsitet vakiona

Helposti mukautettavissa erilaisiin käyttäjätarpeisiin. Säädettävissä niin korkeus- kuin leveysuunnassa, +/- 6 cm kumpaankin suuntaan.



Ergonominen jalkatuki

Kaarevat jalkatuet tukevat jalkapöytää ja jalan kaarta varmistaen näin mukavuuden, vakauden ja rentouden.





Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 on suunniteltu niin hoitajan kuin käyttäjänkin tarpeita ajatellen. Sen suunnittelussa on tartuttu hoitajien päivittäisessä työssään kohtaamiin moniin haasteisiin ja se tuo käyttäjilleen käyttömukavuutta ja turvallisuuden tunteen.

Ainutlaatuinen kallistustoiminto

Swift Mobil Tilt-2 -tuolissa on ainutlaatuinen kallistustoiminto, joka tuo käyttäjälle lisäturvaa ja varmistaa hoitajan ergonomisen työskentelyasennon. Sen kallistustoimintoa (-5° - +35°) voidaan käyttää tuolin kummalta tahansa sivulta. Näin hoitaja voi tuolia kallistaessaan samalla rauhoitella käyttäjää.

Käytettävyyttä ja mukavuutta

Kun istuimen ympärillä liikkuminen on vaivatonta, hoitajan on helpompaa huolehtia avustettavan henkilökohtaisesta hygieniasta ja säilyttää arvokkuuden tunne. Herkkäihoisille on tarjolla erikoispehmeitä istuinpehmusteita. Swift Mobil-2 -tuolin pehmeä ja nopeasti kuivuva selkätuki ja kaarevat jalkatuet lisäävät entisestään käyttömukavuutta.

Sopii erilaisille käyttäjille

Suihku- ja wc-tuoli sopii erilaisia tarpeita omaaville ja erikokoisille käyttäjille. Käyttäjän enimmäispaino on vakiona 160 kg ja tuolin istuinkorkeutta voidaan säätää (50–65 cm). Käsitukien korkeus ja leveys on säädettävissä. Korkeussäädettävistä, sivuuntaitettavista jalkatuista on saatavana myös lyhyempi malli.



Etac Swift Mobil Tilt-2

	Tuotenro.
Swift Mobil Tilt-2, koottu	80229410
Swift Mobil Tilt-2, sis. ämpärin pidikkeet	80229411
Swift Mobil Tilt-2, sis. alusastian pidikkeet	80229412
Swift Mobil Tilt-2, sis. alusastian ja alusastian pidikkeet	80229415

Vakiovarusteet: päätuki, selkätuki, istuin, käsinojat, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

Paino

20,4 kg

Mitat

Kokonaisleveys: 57/56/64 cm
Käsinojen välinen leveys: 42/48/54 cm

Materiaalit

Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuki: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri



Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta. Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa kolmen minuutin ajan. Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg / 353 lbs

Ominaisuudet



Takaa avonainen istuin

Varmistaa hoitajan kannalta helpon käytettävyyden ja tuo mukavuutta käyttäjälle. Ainutlaatuinen Etacille suunniteltu istuimen pinta. Siinä yhdistyvät kitka, puhtaus, luistamattomuus ja hygienia!



Ainutlaatuinen ja turvallinen kallistustoiminto

Voidaan käyttää tuolin kummaltakin puolelta, mikä varmistaa hoitajan kannalta hyvän työskentelyasennon ja rauhoittaa käyttäjää kallistuksen aikana.



Säädettävät käsitet vakiona

Helposti mukautettavissa erilaisiin käyttäjätarpeisiin. Säädettävissä niin korkeus- kuin leveysuunnassa, +/- 6 cm kumpaankin suuntaan.



Monipuolisesti säädettävä päätuki

Päätuki on suunniteltu tuomaan maksimaalista mukavuutta ja muunneltavuutta, ja se voidaan säätää sopimaan käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.





Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2 on kelattava malli, joka sopii itsenäiselle käyttäjälle.

Helppo käsitellä

Kelattava suihku- ja wc-tuoli on helppokäyttöinen ja miellyttävä ohjata. Takapyörät on sijoitettu siten, että niihin ylettyy helposti ja tuolia on yksinkertainen hallita. Ylöstaitettavat käsituet ja tila kelauspyörien edessä mahdollistavat sivusuuntaiset siirrot. Sivusuuntaisia siirtoja helpottaa myös istuinalueen suhteellisen tasainen muoto.

Mukava istuin

Käytettävyyden helpottamiseksi istuin on takaa avonainen ja sen edessä on hygieniasyvennys. Istuimen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota sen käyttömukavuuteen käyttäjän asennosta ja lantion leveydestä riippumatta. Käyttömukavuutta lisäävät saatavissa olevat ergonomiset istuinpehmusteet.

Sopii erilaisten käyttäjien tarpeisiin

Swift Mobil 24"-2 on mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin ja erikokoisille käyttäjille. Käyttäjän enimmäispaino on vakiona 160 kg ja tuolin istuinkorkeutta voidaan säätää (45–60 cm). Käsitukia voidaan säätää niin korkeus- kuin leveysuunnassa, ja pehmeä selkätuki on säädettävissä asennon muuttamista ja käyttömukavuutta ajatellen.

Suuremmille käyttäjille on saatavana erikoislevä selkätuki, joka tuo 6 cm lisää tilaa käsitukien väliin.



Etac Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil 24"-2, koottu	80229402
Swift Mobil 24"-2, sis. ämpäriin pidikkeet	80229407
Swift Mobil 24"-2, sis. alusastian pidikkeet	80229408

Tuotenro.

Vakiovarusteet: selkätuki, istuin, käsituet, jalkatuet ja neljä lukittavaa pyörää

Paino

25,1 kg

Mitat

Kokonaisleveys: 72 cm
Käsitukien välinen leveys: 42/48/54 cm

Materiaalit

Runko: pulverimaalattu teräs
Istuin/käsituet: polypropeeni
Selkätuki: polyesteri/tarranauha
Jalkatuet: polypropeeni
Pyörät: polyamidi/TPE, lukittava, kuulalaakeri
Takapyörät: täyskumirenkaat, polyamidi, kuulalaakeri
Jarrut: polyamidi, ruostumaton teräs



Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttista desinfiointiaineseosta. Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa kolmen minuutin ajan.
Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg / 353 lbs

Ominaisuudet



Helppo ohjata

Kelauspyörien sijoittelun ansiosta tuolin ohjaaminen eteenpäin on helppoa, ja myös sivusuuntaiset siirrot sujuvat vaivattomasti.



Säädettävä selkätuki

Helppo säätää asennon ja vartalon mallin mukaan maksimaalista mukavuutta ajatellen. Kaksoiskiinnitys työntötangossa. Pehmeä ja nopeasti kuivuva materiaali.



Säädettävä istuimen korkeus

Swift Mobil 24"-2 -tuolin korkeutta voidaan helposti säätää ilman työkaluja, mikä takaa turvallisen ja mukavan käyttökorkeuden.



Ergonominen jalkatuki

Kaarevat jalkatuet tukevat jalkapöytää ja jalan kaarta varmistaen näin mukavuuden, vakauden ja rentouden.





Lisävarusteet – kaikki mallit

(Katso pesuohjeet sivulta 14)



Soft Comfort -istuinpehmuste, 4 cm, takaa avoin

80209519
Ergonomisesti muotoiltu ja pehmeä istuinpehmuste tuo käyttömukavuutta ja tukea. Syvennys edessä.
Materiaali: Polyuretaani



Soft Comfort -istuinpehmuste, 2 cm, takaa avoin

80209518
Istuinpehmuste, jonka pyöristetyt muodot varmistavat maksimaalisen mukavuuden. Syvennys edessä.
Materiaali: Polyuretaani



Soft Comfort -istuinpehmuste, 4 cm

Pieni aukko, 15 cm (6"): 80209507
Suuri aukko, 18 cm (7"): 80209506
Ergonomisesti muotoillut Soft Comfort istuinpehmusteet, joissa syvennys edessä. Matalimman kohdan korkeus 4 cm.
Materiaali: Polyuretaani.



Soft Comfort -istuinpehmuste, 2 cm

Aukko 18 cm: 80209306
Muotoiltu Soft Comfort -istuinpehmuste, jossa syvennys edessä. Matalimman kohdan korkeus 2 cm. Materiaali: Polyuretaani.



Istuinpehmuste

80209434
Yhtenäinen istuinpehmuste hygieni-aukon peittämiseen. Voidaan käyttää suihkussa. Korkeus 2 cm.
Materiaali: Polyuretaani.



Pehmeä istuintyyppi, jossa hygienia-aukko

80209065
Vaahtomuovityyny, jonka päällinen on vedenkestävää kangasta. Korkeus 2 cm.
Materiaali: Polyetteri / päällystetty muovi.



Pehmeä istuintyyppi, jossa soikea aukko

80209067
Vaahtomuovityyny, jonka päällinen on vedenkestävää kangasta. Korkeus 4 cm.
Materiaali: Polyetteri / päällystetty muovi.



ROHO® Protect -istuintyyppi

80209245
Yksikkammainen täytettävä istuintyyppi, joka lievittää painetta erinomaisesti. Tarkoitettu käyttäjille, jotka ovat erittäin herkkiä paineelle. Syvennyksen leveys: 21 cm. Kennon korkeus 5 cm.
Materiaali: Neopreeni



Päätuki

80209521
Moneen suuntaan säädettävä päätuki, jossa muotoiltu tukiosa. Säädettävissä korkeus-, syvyys- ja sivusuunnassa ja kallistuskulman säätö. Kiinnikkeen kanssa.
Materiaali: Tyyny: Polyuretaani
Kiinnike: Ruostumaton teräs



Comfort-päällyste

80209455
Pehmeä selkätuki ja integroidut käsitukien pehmusteet. Pehmuste tuo tukea ja käyttömukavuutta ja käsitukien tarttumapinnat jäävät paljaksi.
Materiaali: Polyeteeni.



Vartalotuki

80209509
Tukee kehon asentoa. Tukityynyjen paikka säädettävissä tarrakiinnityksellä.
Materiaali: Polyesteri, tarranauha, polyeteeni.



XL-kokoinen selkätuki

80209454
Suurikokoisille käyttäjille, tuo lisätillaa selälle ja hartioille. Lisää käsitukien väliä 6 cm, kokonaisleveys 48/54/60. (XL-selkätuki ei sovi Swift Mobil Tilt-2 -tuoliin)
Materiaali: Polyesteri, pulverimaalattu teräs, ruostumaton teräs, polypropeeni



Lisävarusteet – kaikki mallit

(Katso pesuohjeet sivulta 14)



Selkätuen pehmuste

80209448

Lämpöä heijastava materiaali lisää käyttömukavuutta. Käytetään käsitukien sisäpuolella, jolloin käsituet voidaan taittaa sivuun ja sivuttaissiirtoihin saadaan tilaa. Materiaali: Polyeteeni.



Lantiovyö, musta

80209440

Helppo säätää muovisoljella. Kiinnitetään tarranauhoilla selkätuen putkiin. Materiaali: Polyesteri



Käsituen pehmuste

80209508

Pehmentää käsitukia. Tekee käsivarsia vasten olevasta pinnasta lämpimän ja pehmeän, mutta jättää samalla tarttumapinnat vapaiksi, mikä varmistaa turvallisen nousun tuolista. Myydään pareittain. Materiaali: Polyeteeni.



Rintavyö

80209442

Helppo säätää. Kiinnitetään selkätuen pehmusteen hihnoihin. Käyttöä yhdessä lantiovyön kanssa suositellaan. Materiaali: Polyesteri



Käsituen tuki

80209035

Muotoiltu rakenne tukee käsivartta. Ulkopuoli lämpöä heijastavaa materiaalia. Sopii oikeaan ja vasempaan käsitukeen. Materiaali: Polyeteeni



Kannellinen alusastia

Kannellinen ja sangallinen alusastia: 80209255

Ainutlaatuinen muotoilu, joka estää roiskeet. Kannen sanka lukittuu alusastiaan ja varmistaa, ettei sisältö läiky. Materiaali: Polypropeeni



Käsituen lukko

80209445

Lukkotappi käsituen lukitsemiseen ala- tai yläasentoon. Materiaali: Ruostumaton teräs.



Alusastia

Alusastia ilman kantta 80209254
Sangallinen kansi 80209256

Ainutlaatuinen muotoilu, joka estää roiskeet. Materiaali: Polypropeeni



Roiskesuoja

80209430

Pehmeä suoja estää virtsaroiskeita. Kiinnitetään istuimen etusyvennykseen ja voidaan helposti irrottaa. Materiaali: Polyuretaani



Alusastian pidikkeet

80209257

Sopii sekä Etacin alusastioihin että perinteisiin sairaalan alusastioihin. Käytetään yhdessä erikseen tilattavien kiinnikkeiden kanssa. Materiaali: Polypropeeni



Poikittaistanko

60,5 cm 80303034

66,5 cm 80209452

Turvallinen tukitanko, voidaan käyttää myös tukemaan tuolin rakennetta. Kiinnitetään käsinojiin. Materiaali: Alumiini, polyeteeni.



Kiinnike

80209435

Kiinnitetään tiukasti istuimen alle, mahdollistaa alusastian pidikkeiden käytön. Mukana ruuvinväännin. Sisältää 4 kpl kiinnikkeitä. Materiaali: Polyamidi



Pehmustettu lantiovyö

80209524

2-osainen lantiovyö, jota voidaan käyttää joko lantion tai rintakehän ympärillä. Säädettävissä kolmella soljella, pituus 65–130 cm. Mukavakäyttöinen ja nopeasti kuivuva materiaali tukee hyvin valittua asentoa.



Alusastian/ämpärin madallusosa

80209259

Käytetään, kun alusastia/ämpäri halutaan sijoittaa matalammalle istuimen alle. Kiinnitetään alusastian tai ämpärin pidikkeillä. Laskee alusastian/ämpärin pidikkeitä 6 cm. Materiaali: Polypropeeni.

Lisävarusteet – kaikki mallit

(Katso pesuohjeet sivulta 14)



Ämpäriin pidike

80209258

Käytetään korkeareunaisten alusastioiden/ ämpärien kanssa. Käytetään yhdessä erikseen tilattavien kiinnikkeiden kanssa. Materiaali: Polypropeeni.



Säädettävä pohjetuki

80209437

Pohjetuki säädettävällä kulmalla, sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan. Neljä asentoa. Myydään yksittäiskappaleina. Materiaali: Ruostumaton teräs ja ABS-muovi.



Ämpäri, sanku ja kansi

80209265

Perinteinen ämpäri, jota käytetään ämpäriin pidikkeen kanssa. Materiaali: Polypropeeni



Jalkalauta pohjetukeen

80209443

Sarja sisältää erillisen jalkalaudan, joka asennetaan erikseen hankittavaan pohjetukeen. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Materiaali ABS-muovi.



Swift Mobil Tilt-2:n kaatumaste

Swift Mobil Tilt-2:n kaatumaste: 80209459

Suojaa tuolia kaatumasta taaksepäin. Parantaa turvallisuutta tilanteissa, joissa tuolin painopiste siirtyy taakse. Materiaali: Polypropeeni ja alumiini



Amputaatiotuki

80209510

Säädettävä korkeus, pituus ja kulma. Sopii sekä oikealle että vasemmalle puolelle. Jos käyttäjän raaja on amputoitu, suosittelemme käyttämään kaatumasteita.

Materiaali: Ruostumaton teräs ja polyuretaani.



Swift Mobil-2:n kaatumaste

Kaatumaste sisältäen kiinnikkeen: 80209439

Kaatumaste ilman kiinnikettä: 80209438
Suojaa tuolia kaatumasta taaksepäin. Materiaali: Polypropeeni ja alumiini



Kantaremmi

80209432

Kiinnitetään jalkalevyihin. Estää jalkaa liukumasta taaksepäin. Pituus säädettävissä. Myydään pareittain.

Materiaali: Polyesteri



Kippipoljin

80209449

Helpottaa siirtymistä kynnyksen ja ramppien yli. Myydään kiinnikkeen kanssa. Materiaali: Polypropeeni ja alumiini



Kelauspyöräsarja 24"

80209436

24" kelauspyörät, joissa täyskumirenkaat ja integroidut kaatumissuojat. Helppo kiinnittää. Sisältää kiinnikkeet ja jarrut.

Materiaali: Polyamidi, ruostumaton teräs, polyuretaani, alumiini



Lyhyet jalkatuet

80209520

Sivuunkäännettävä lyhyt jalkatuki. Säätovara 12,5 cm, jalkatuen pituus 24–36,5 cm. Jalkatuessa on pyörästetty muoto. Myydään pareittain.

Materiaali: Ruostumaton teräs ja polypropeeni



Jalkatuet käännettävillä astinlaudoilla

80209446

Säädettävissä niille, joiden on asetettava jalka avoimempaan kulmaan. Voidaan varustaa kantapäätuilla. Myydään pareittain.

Materiaali: Ruostumaton teräs ja polypropeeni.



Pesuohteet

Soft Comfort -istuimet ja istuinpehmusteet, päätuki, käsituen lukko, roiskesuojus, alusastia, alusastian pidike, kiinnike, madallusosa, ämpäriin pidike, ämpäri, kaatumaste, kippipoljin, jalkatuet, pohjetuki, amputaatiotuki, kelauspyöräsarja 24"




Selkätuen verhoilu, pehmustettu lantiovyo, lantiovyo, rintavyo, kantaremmi



Pehmeät tyynyt, Comfort-päällyste, selkätuen pehmuste, käsituen pehmuste, käsituen tuki, poikittaistanko



ROHO® Protect

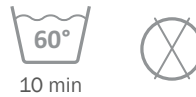

Pesumerkkien selitykset



Konepesu, enimmäislämpötila 60 °C / 140 °F



Puhdista tuote liuotainaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 6–9, tai 70-prosenttisellä desinfiointiaineella.



Tuote voidaan käsitellä suljetussa pesu-desinfiointilaitteessa enintään 85 °C:n / 185 °F:n lämpötilassa kolmen minuutin ajan.




Ei kuivapesua



Tuote voidaan pyyhkiä puhtaaksi puhdistusliinalla.

Mitat

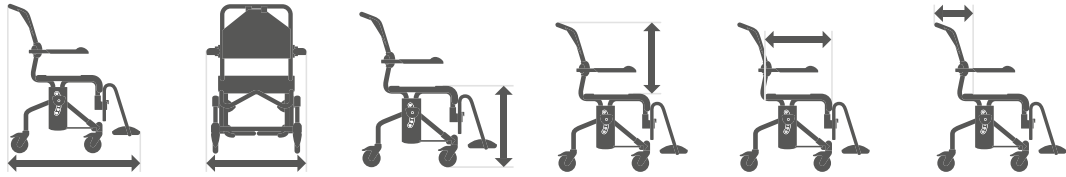

Malli	Pituus	Leveys	Istuinkorkeus	Selkätuen korkeus	Istuinsyvyys	Selkätuen syvyys
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	58/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	72 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	104 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5 cm	25 cm



Malli	Istuimen leveys	Käsituen korkeus	Käsitukien välinen etäisyys	Jalkatuen korkeus	Korkeus
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	95–110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	34 / 46,5 cm	100–115 cm





"Jokaisella pitäisi olla oikeus elää vapaata ja itsenäistä elämää ja tavoitella unelmiaan fyysisistä lähtökohdista riippumatta."

Lue tuoreimmat uutiset ja tutustu jatkuvasti päivitettäviin tuotetietoihin osoitteessa www.etac.com