




FI Guldmann nostoliinat - puhdistus ja desinfiointi..... 2

Käyttöopas – vers. 1.00

CE

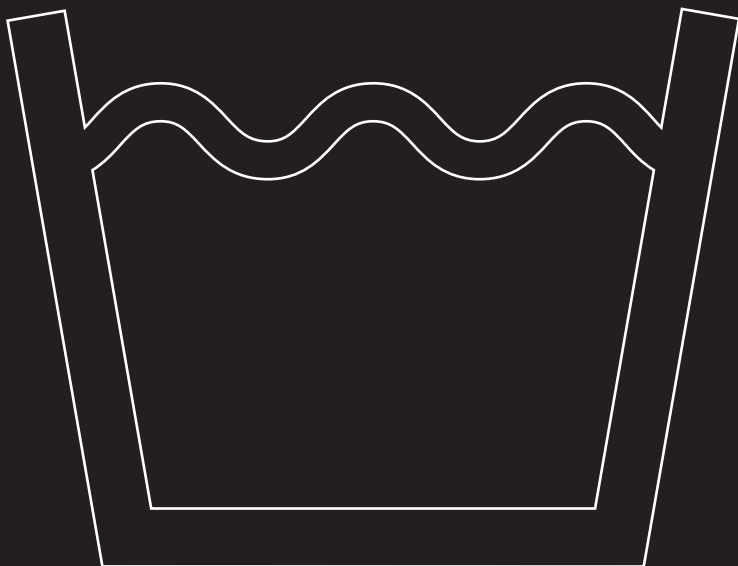

Guldmann™

1.00

Guldmann nostoliinat - puhdistus ja desinfiointi

Guldmann uudelleen käytettävät/pestävät nostoliinat on tarkoitettu yhdelle ihmiselle. Kun yhteen henkilöön käytetyt nostoliinat ovat likaantuneet, niitä ei voi käyttää toisen henkilön nostamiseen, vaan nostoliinat on puhdistettava tartuntojen estämiseksi.

Puhdistusohjeet löytyvät tuotteen etiketistä.

Mikäli puhdistus- ja huolto-ohjeita ei noudateta, takuu raukeaa ja nostoliinan käyttöikä saattaa lyhentyä.

1.01

Puhdistus



Normaali pesu merkityssä lämpötilassa



Älä käytä valkaisuaineita



Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa



Älä silitä

1.02

Desinfiointi

Guldmann suosittelee lämpödesinfiointia, sillä se on turvallisin tapa puhdistaa nostoliinat. Tehokkaan lämpödesinfiointiin saavuttamiseksi nostoliina on pestävä noudattaen seuraavia aikoja ja ilmoitettuja lämpötiloja:

- Suosittelemme huuhtelua kylmällä vedellä ennen pesua kuumassa vedessä, sillä kuuma vesi voi aiheuttaa nostoliinan värjäytymistä likaantuneissa kohdissa.
- Pesu 10 minuutin ajan 80 °C:ssa. (176 °F). Käytä hyväksyttyä pesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali.

(Tanskan kansalliset infektioiden ehkäisemissäännöt (NIR))

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da>)

Yhdysvaltain tautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention, (CDC))

<https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/laundry.html>

Jos nostoliinassa on mitä tahansa ei-huokoisia muoviosia, käytä desinfiointi-pyyhkeitä, joissa on enintään 85 prosentin liuos isopropyylialkoholia, tai pyyhi kostealla liinalla käyttäen lämmintä vettä ja desinfioivaa puhdistusainetta, esim. klooripitoista liuosta 1500 ppm:ään saakka.

Tarkista nostoliina kulumien ja vaurioiden varalta pesun jälkeen ja ennen käyttöä.

Harkitse nostoliinan poistamista käytöstä, jos niissä on jokin seuraavista vaurioista:

1. Kemiallisten/syövyttävien aineiden aiheuttamat palojäljet
2. Nostoliinan mikä tahansa osa on sulanut tai palanut
3. Aukot, repeämät ja reiät
4. Katkenneet tai kuluneet ompeleet
5. Puuttuva, lukukelvoton tai epätäydellinen nostoliinan merkintäkyltti
6. Solmuja missä osassa nostoliinaa tahansa
7. Hankautuma
8. Muut näkyvät vauriot, jotka saavat epäilemään nostoliinan vahvuutta.

Saat nostoliinan yksityiskohtaisemmat tarkastusohjeet ja tarkastuslistan joko nostoliinan käyttöoppaasta tai sivulta www.guldmann.com.

Esimerkkejä vaurioituneista nostoliinoista:



Rikkonainen sauma



Solmut



Musertunut/rispaantunut verkko



Sulaminen/palaminen

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com