

Säkra lyftet med vårt breda sortiment av lyfthjälper.



Liko™ Lyftsalar, RepoLakan™, Glidlakan™ och andra smarta tillbehör.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Design med fokus på säkerhet, funktion och komfort.

Våra lyftselar är kända för att vara av hög kvalitet. Vi har under trettio år i nära samarbete med användare och brukare utvecklat funktionella och lättanvända lyfttillbehör, alltid med fokus på säkerhet, funktion och komfort.

Dokumentation i världsklass.

Bruksanvisningar som beskriver lyftselsens användningsområde följer med varje lyftsle. Här finns bland annat vägledning om vilken lyftbygel som passar bäst. **En användaranvisning** finns för alla basmodeller. Dessa kortfattade anvisningar innehåller den viktigaste informationen runt hur lyftselen ska appliceras och skötas om. **Utprovningsprotokoll** underlättar utprovningen då vårdgivaren kan fylla i aktuella inställningar för en specifik patient. **Periodiskt inspektionsprotokoll** finns för att underlätta den periodiska inspektionen, dessa beskriver tydligt vilka kritiska punkter som behöver kontrolleras.

Visste du...

... att välja rätt material är en viktig länk i kedjan när man ska välja lyftsle. Våra lyftselar görs i olika material som vart och ett har sina speciella egenskaper och fördelar. Vanligast är det *gröna polyestertyget* som är oslagbart när det kommer till slitstyrka och hållbarhet. För bad- och duschsituationer rekommenderar vi en lyftsle i *plastad nätväv* som torkar snabbt. När lyftselen ska lämnas kvar är nätpolyestern, som finns i två grå kvaliteter och ett grönt, att föredra. Vårt Solo[™] material för förbrukningsselar är unikt eftersom de är tillverkade i ett mycket starkt *nonwoven-material*. Många av de minsta storlekarna av våra lyftselar är specialdesignade för barn och är tillverkade i ett *nallemonstrat polyestertyg*.

Alla våra lyfttillbehör är godkända för 200 kg maxlast om inte annat anges.

! Använd ej skadade lyfttillbehör!

Liko[™] lyftselar är testade av ett ackrediterat testinstitut och uppfyller alla krav för produkter i MDD klass I. De uppfyller också alla krav i enlighet med de harmoniserade standarderna EN ISO 10535-2006. Våra lyfttillbehör är godkända för 200 kg maxlast om inte annat anges men vi har också lyftselar med en maxlast på 500 kg i vårt breda sortiment lyftselar.



- 1. Produktetikett** som klart anger lyftselsesmodell, storlek och utförande. Här hittar du också tvättråd och lyftselsens maxlast.

2. Patientmärkningsetikett, som är fastsydd på lyftselen. Det finns plats för fem olika namn.

3. Periodisk inspektionsetikett underlättar för uppmärkning av inspektionsdatum. Man gör enkelt hål i en ruta för aktuell månad och år. Detta ger en hållbar märkning som inte försvinner vid tvätt.

4. Noggrant testade **förstärknings sömmar** (trånsar) samt förstärkningsband för optimerad hållfasthet och säkerhet. Den förstärkta sömmen är belastningstestad och placeringen noggrant utredd med anledning av var den ökade belastningen uppstår.

5. Storleksmarkering i olika färger. På flertalet av lyftselsmodellerna är denna färgmarkering placerad som ett mittbakband som även underlättar att få lyftselen rätt på brukaren vid applicering.

6. Lyftselsarna finns i många noga **utvalda material** så att de fungerar optimalt vid olika användningsområden.

7. Benstöd i flertalet olika utföranden – endast tyg, polstrade och med förstyvning för att passa alla olika behov. Breda och långa benstöd som ger optimal understödsyta för maximal komfort och tryckavlastning.

8. Kantband sytt i ett enda stycke, få skarvar för att erhålla maximal hållfastighet då sömmar är den svagaste länken i en konstruktion.

Den **noggrant utformade designen** på våra lyftselsesmodeller gör att brukaren alltid sitter med ett väl fördelat tryck mellan ben samt ryggdel samt får ett bra stöd under hela förflyttningen. De ger en optimal sittställning för att brukaren ska hamna rätt vid förflyttningen utan komplicerade inställningsalternativ.

Liko™ Basmodeller: De mest använda



Lyftselar för patientens behov.

Vi har sedan en lång tid använt mottot **“Lyftselen är halva lyftet”**. Lyftselen är avgörande för hur väl genomfört ett lyft blir, den är länken mellan patientlyften och brukaren. Alla lyftselsmodeller har unika egenskaper för att passa vid olika lyftbehov. En del lyftselsmodeller kallar vi basmodeller därför att de täcker ett bredare behov av att lyfta olika personer. Dessa används vid alla vanligen förekommande lyftsituationer som vid lyft till/från säng/brits/stol/rullstol.

Visste du...

... att inget lyft är det andra likt. Det är precis därför vi har ett av **marknadens bredaste sortiment**. Alla våra lyftselsmodeller har sina unika egenskaper för att passa ett visst lyftbehov. Med vår bredd av lyftselar och tillbehör kan man tillgodose både de **vanligaste lyften på en vårdavdelning och de mer krävande specialfallen**. Dessa tankar har varit en av våra ledstjärnor i vårt **utvecklingsarbete i mer än 30 år**. Vi vågar påstå att vi vet vad som fungerar.

Liko™ Basmodeller: De mest använda



LIKO. UNIVERSALSELE™, MOD 000, 002

En basmodell som passar de flesta användare. Universalselen är utmärkt för äldre personer med begränsad rörlighet. Den ger en upprätt sittställning med stöd för hela ryggen. Mod 002 är en variant som ger extra hög lyfthöjd. En utmärkt lyftsele att starta med.

- Bra basmodell, passar de flesta brukare
- Ger stöd för hela ryggen
- Brukaren har armarna på insidan
- Ger en upprätt sittställning (000)
- Mod 002 ger extra lyfthöjd

STORLEK: S, MS, M, L, XL*

MATERIAL: Polyester, nätpolyester, plastat nät



LIKO. SOFT ORIGINALSELE HÖG™, MOD 26

STORSÄLJARE

Liko Soft Originalsele Hög har utvecklad passform och komfort med bekvämt huvudstöd i sittande läge. Den ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet och passar därför bra för personer med dålig bål- och huvudstabilitet. Soft Originalsele Hög är mycket lämplig vid lyft till och från golv.

- Klarar att lyfta de flesta brukare
- Bästa valet vid lyft från plant läge
- Optimerad passform och komfort
- Ger ett extra bekvämt stöd för huvudet
- Bekväm tillbakalutad sittställning

STORLEK: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

MATERIAL: Polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



LIKO. ORIGINALSELE HÖG RYGG™, MOD 20

Liko Originalsele Hög Rygg ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet och passar därför bra för personer med nedsatt bål- och huvudstabilitet. Den är mycket lämplig vid lyft till och från golv.

- Klarar att lyfta de flesta brukare
- Bra val vid lyft från plant läge
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet
- Bekväm tillbakalutad sittställning

STORLEK: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

MATERIAL: Nätpolyester, plastat nätväv, polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



LIKO. ORIGINALSELE™, MOD 10/11

Liko Originalsele har en halvhög rygg som ger möjlighet för brukaren att hålla en eller båda armarna utanför lyftselen. Lyftselen passar den aktiva brukaren, den är enkel och smidig att arbeta med och ger en bekväm sittställning. Dessutom finns den i ett stort urval av storlekar och varianter.

- Tillåter brukarens medverkan
- Bra vid lyft från sittande till halvsittande
- Ger stöd för ryggen upp till skulderbladen
- Brukaren kan vila armarna på insidan eller utsidan
- Enkel att applicera

STORLEK: XS, S, MS, M, L, XL*

MATERIAL: Polyester, nätpolyester, plastat nätväv, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



* Några storlekar och utföranden med maxlast mellan 300-500 kg.

Liko™ Lyftselar för toalett och hygien



Assistans när du behöver den som mest.

Lyft i samband med toalettbesök kräver mer av en lyftsle. Våra lyftselar gör det möjligt att på ett enkelt sätt ta av och på kläderna under själva lyftet. Dessa lyft upplevs ofta som tunga och besvärliga för vårdpersonalen, vårt utbud med flera olika modeller som ger olika nivåer av stöd och säkerhet underlättar för alla.

Liko™ Lyftselar för toalett och hygien



LIKO. BYXSELE. MOD 40, 41 STORSÄLJARE

En enkel och lättanvänd lyftsle som passar de flesta brukare. Den underlättar av- och påklädning vid lyft till och från toalett. Byxselen är lämplig för personer med viss stabilitet i kroppen. Byxsle. mod 41 är försedd med ett bälte och har förbättrad passform. Mod 41 är en utmärkt lyftsle att starta med.

- För brukare med god stabilitet i kroppen
- Enkel att applicera
- Möjliggör på- och avklädning vid lyft till och från toalett
- Patienten håller armarna utanför lyftselen
- Mod 41 är försedd med skärp för ökad säkerhet och trygghet

STORLEK: XS, S, M, L, XL*

MATERIAL: Polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



LIKO. BYXSELE. MOD 45, 46

Byxsle. mod 45 är försedd med ett Trygghetsskärp, som lyfter runt överkroppen för extra säkerhet. Modell 46 är förutom Trygghetsskärp, även försedd med ett extra högt ryggstöd.

- Försedd med Trygghetsskärp, lämplig för brukare med nedsatt stabilitet i kroppen
- Möjliggör på- och avklädning vid lyft till/från toalett
- Kan användas med brukarens ena arm på insidan
- Mod 46 är försedd med ryggstöd som ger extra stöd, säkerhet och komfort

STORLEK: XS, S, M, L, XL*

MATERIAL: Polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



LIKO. HYGIENSELE. MOD 50, 55

Hygienselen är en unik lyftsle som är speciellt konstruerad för att säkert och tryggt lyfta personer med låg muskeltonus till toalett. Hygienselen ger en upprätt sittställning med stadigt stöd runt överkroppen och lämnar samtidigt en stor del av underkroppen fri för på- och avklädning. Hygiensele Mod 55 är försedd med huvudstöd.

Mod 50:

- Passar brukare med hög/låg tonus och spasticitet
- Möjliggör på- och avklädning vid lyft till och från toalett
- Stöder och lyfter runt överkroppen
- Hög säkerhet vid lyft till/från toalett
- Upprätt sittställning

STORLEK: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*

MATERIAL: Polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)

Mod 55:

- Extra bra för brukare med spasticitet
- Möjliggör på- och avklädning vid lyft till och från toalett
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet
- Hög säkerhet vid lyft till/från toalett
- Stöder och lyfter runt överkroppen

STORLEK: XXS, XS, S, M, L, XL

MATERIAL: Polyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



* Några storlekar och utföranden med maxlast 300 kg.

Liko™ Lyftselar för särskilda behov

Alla behov är unika, en del mera än andra.

Vårt sortiment rymmer lyftselsmodeller som är mer specialiserade för att vara optimala inom ett specifikt användningsområde. Det kan exempelvis vara vid lyft av en amputerad brukare eller personer med kraftig övervikt. För att tillmötesgå behovet av lyftselar för korttidsbruk av en enskild brukare, och som ett sätt att undvika tvättprocessen, har vi även utvecklat en serie lyftselar av förbrukningstyp. Tack vare vårt breda sortiment kan vi lösa de flesta behov.

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla nya modeller samt att förbättra redan befintliga, vilket även ger möjlighet att erbjuda individanpassade lyftselar för brukare med mycket speciella behov.



LIKO™ AMPUTATIONSSELE.. MOD 70, 75

Amputationsselen har en speciell design med extra bandstyrning som hindrar att benstöden glider isär. Vi rekommenderar Amputationsselen till brukare med dubbelsidiga höga amputationer eller till andra brukare som behöver denna extra trygghet.

Amputationsselen finns i två ryghöjder; mod 70 som ger stöd upp till axelhöjd och mod 75 som även ger stöd för huvudet.

- För brukare med enkel- eller dubbelsidig lårbensamputation
- Bra till brukare som tenderar att "glida ur" lyftselar
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet (mod 75)
- Lätt tillbakalutad sittställning

STORLEK: S, M, L, XL*

MATERIAL: Polyester, nätpolyester



LIKO™ SOLO HÖG RYGG.. MOD 25

För att tillmötesgå behovet av lyftselar för korttidsbruk av en enskild brukare, och som ett sätt att undvika tvättprocessen, har vi utvecklat en serie lyftselar av förbrukningstyp. Solo Hög Rygg.. passar de flesta brukare och kan användas vid alla vanligen förekommande lyft.

- Klarar att lyfta de flesta brukare
- Bra val vid lyft från plant läge
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet
- Bekväm tillbakalutad sittställning
- Förbrukningssele avsedd för korttidsbruk (får ej tvättas)

STORLEK: MS, M, L, XL, XXL*

MATERIAL: Nonwoven



LIKO™ COMFORTSELE PLUS.. MOD 300, 310

Comfortsele Plus.. är en vidareutveckling av Komfortsele.. (mod 30, 31) med förbättrad komfort och passform. Comfortsele Plus.. medger en upprätt sittställning och stöder hela ryggen.

Comfortsele Plus.. appliceras och tas bort med brukaren liggande, den lämnas sedan kvar i stolen efter lyftet. Modell 310 är försedd med hygienöppning.

- Bra till brukare med ledbesvär/benamputation
- Lyftselen lämnas kvar under brukaren
- Lyftselsmodell med möjlighet till öppen höftledsvinkel i kombination med 4-punktsbygel

STORLEK: M, L, XL*

MATERIAL: Nätpolyester, plastat nät



LIKO™ COMFORTSELE PLUS HÖG.. MOD 350, 360

Comfortsele Plus Hög.. är en vidareutveckling av Komfortsele.. (mod 35, 36) med förbättrad komfort och passform. Comfortsele Plus Hög.. ger en något tillbakalutad sittställning och stöd för hela ryggen. Den är försedd med ett mjukt huvudstöd. Comfortsele Plus Hög.. appliceras och tas bort i liggande ställning, den lämnas sedan kvar i stolen efter lyftet. Modell 360 är försedd med hygienöppning.

- Bra till brukare med ledbesvär/benamputation
- Lyftselen lämnas kvar under brukaren
- Lyftselsmodell med möjlighet till öppen höftledsvinkel i kombination med 4-punktsbygel
- Ger ett extra bekvämt stöd för huvudet

STORLEK: M, L, XL*

MATERIAL: Nätpolyester, plastat nät



LIKO™ SKALSELE.. MOD 22

Skalselen.. ger en tillbakalutad sittställning med bekvämt huvudstöd. Den är speciellt utvecklad för överflyttningar till trånga rullstolar där man vill lämna lyftselen kvar i stolen. Skalselen.. är tunn och smidig utan handtag eller förstärkningar.

- Smidig lyftselse i nät för lyft till skal och formgjutna sitsar.
- Extra bra för brukare med felställningar
- Kan lämnas kvar i stolen efter lyft
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet
- Brukaren kan vila armarna på insidan eller utsidan

STORLEK: XS, S, M, L

MATERIAL: Nätpolyester



Liko™ Lyftselar för tunga brukare



**Tunga brukare blir lättare
med rätt hjälpmedel.**

Att lyfta tunga brukare kräver särskilda hjälpmedel och särskilda tekniker. Med en maxlast på upp till 500 kg klarar Likos™ UltraTwin™-system de riktigt tunga lyften. Tack vare två samverkande lyftmotorer kan man med UltraTwin™ positionera brukaren till sittande, halvsittande eller liggande ställning utifrån brukarens behov. Genom att styra de två lyftmotorerna individuellt kan sittpositionen justeras för maximal komfort. Liko har en lång erfarenhet från att arbeta med tunga brukare. Sedan många år tillbaka har vi nära samarbeten med flera stora sjukhus runt om i världen, som specialiserat sig på vård och behandling av kraftigt överviktiga patienter.

Liko™ Lyftselar för tunga brukare



LIKO™ ULTRASLING™, MOD 06

Produktserien Ultra är utvecklad för att kunna lyfta tunga brukare på ett säkert och bekvämt sätt.

UltraSling™ ger stöd för hela ryggen upp till axlarna. Med sin unika design kopplas benstöden upp var och en för sig på lyftbygel vilken ger fritt utrymme för magen samt optimalt stöd för benen. UltraSling™ finns i tre storlekar där Long även ger stöd för underbenen.

- Designad för mycket tunga brukare
- Ger extra mycket utrymme för magen
- Kan kombineras med Likos lyftsystem UltraTwin™, storlek Short även med Universalbygel™ 670 Twin
- Maxlast 500 kg

STORLEK: Short, Regular, Long

MATERIAL: Polyester, (nätpolyester)



LIKO™ SOFT ORIGINALSELE HÖG™, MOD 26

Soft Originalsele Hög™ har utvecklad passform och komfort med bekvämt huvudstöd i sittande läge. Soft Originalsele Hög™ ger en tillbakalutad sittställning med stöd för huvudet och passar därför bra för personer med dålig bål- och huvud stabilitet. Soft Originalsele Hög™ är mycket lämpliga vid lyft till/ från golv. De större storlekarna av Soft Originalsele Hög™ kan med fördel användas för att lyfta tyngre brukare då gärna i kombination med en Lyftbygel Universal™ 670 Twin, Kryssbygel 670 eller Sidobyglar beroende på hur mycket utrymme brukaren behöver.

- Klarar att lyfta de flesta brukare
- Optimerad passform och komfort
- Ger ett extra bekvämt stöd för huvudet
- Bekväm tillbakalutad sittställning
- Maxlast 500 kg

STORLEK: För brukare med vikt mellan 200-500 kg finns stl XL, XXL

MATERIAL: Polyester



LIKO™ ULTRA LYFTBYXA™, MOD 920

Att få tunga brukare på benen är ett mycket viktigt steg i deras rehabilitering, exempelvis efter en operation. Den unika Ultra Lyftbyxa™ ger ett bra stöd för hela kroppen och ger brukaren den trygghet som är nödvändig för att våga ta de första stegen.

- För brukare som kan stödja på benen
- Trygg och säker vid uppresnings-, stå-, gå- och balansträning
- Tillåter naturligt rörelsemönster vid uppresning
- Tar belastningen i grenen samt via höftband
- Tillbehör: Solofodral, Polstringshylsor till avlastningsbanden
- Maxlast upp till 500 kg

STORLEK: XXL, XXXL

MATERIAL: Nätpolyester

Övriga lyfttillbehör för tyngre brukare.

LIKO™ HANDY GLIDLAKAN™

Se sidan 21.

LIKO™ REPOLAKAN™ ORIGINAL ULTRA

Se sidan 22.

LIKO™ MULTIBAND™

Se sidan 23.

Trygga lyftselar för barn.

Att lyfta barn är inte att lyfta små vuxna. Barn har speciella behov och kräver därför produkter som är speciellt utformade för att möta dessa behov. Vi har lång erfarenhet från området och var först med lyfttillbehör speciellt anpassade för barn. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla metoder och modeller för våra yngre brukare och idag finns de flesta av våra lyftselsmodeller speciellt utvecklade för barn. Flertalet av våra barnmodeller finns i ett nallemonstrat tyg för att tilltala de allra minsta. Vi kallar dem “Nalleselar”.



NALLESELE LÅG.. LIKO.. ORIGINALSELE., MOD 10

Denna lyftsle passar för lyft till och från sittande/halvsittande eller golv om barnet inte behöver särskilt stöd för huvudet. Ger stöd längs hela ryggen upp till axlarna.

- Skärp med Trygghetsspänne

STORLEK: XS, S
MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn), polyester (endast S), nätpolyester, plastat nät (endast S)



NALLESELE HÖG.. MOD 26 LIKO.. ORIGINALSELE HÖG RYGG.. MOD 20

Dessa modeller ger en skön tillbakalutad sittställning. Kan användas för alla lyft till och från liggande och sittande. Perfekt för lyft till och från golv. Mod 26 är även försedd med förstyvad huvuddel och ger en mer upprätt sittställning och ett gott stöd för brukaren. Barn med spasticitetsproblem sitter ofta bra i mod 26.

- Skärp med Trygghetsspänne
- Mod 26 även förstyvning i rygg- och huvudstöd samt i benstöd

MOD 20: STORLEK: XS, S MATERIAL: Polyester, nätpolyester, plastat nät
MOD 26: STORLEK: XS, S MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn)



LIKO.. SKALSELE.. MOD 22

Skalsele.. har vi utvecklat speciellt med tanke på de barn som sitter i formgjutna sitsar och därför behöver ha lyftselen kvar i stolen efter överflyttningen. Barnets armar kan vara på lyftselsens in- eller utsida.

- Kan lämnas kvar i stolen efter lyft
- Ger stöd för hela ryggen och huvudet

STORLEK: XS, S
MATERIAL: Nätpolyester



NALLE BYXSELE../LIKO.. BYXSELE.. MOD 41
NALLE BYXSELE.. MED TRYGGHETSSKÄRP OCH EXTRA RYGGSTÖD, MOD 46

Dessa lyftselar har vi utvecklat för lyft till och från toalett, men de kan även vara lämpliga i andra lyftsituationer. Mod 41 är försedd med skärp, mod 46 har ett Trygghetsskärp.. och ett extra ryggstöd för bästa komfort. Bägge modellerna har mjuk polstring under armarna och förstyvade benstöd.

MOD 41: STORLEK: XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn), polyester
MOD 46: STORLEK: XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn)



NALLE HYGIENSELE LÅG/LIKO.. HYGIENSELE.. MOD 50
NALLE HYGIENSELE HÖG../LIKO.. HYGIENSELE HÖG RYGG.., MOD 55

Dessa lyftselar har vi utvecklat för lyft till och från toalett, men de passar även för många andra lyftsituationer där man vill ha en upprätt och stadig sittställning. Västen lyfter runt överkroppen, vilket motverkar tendenser hos barnet att sjunka ihop. Barn med spasticitetsproblem sitter ofta bra i mod 55.

- Förstyvade benstöd
- Modell 55 har huvudstöd

MOD 50: STORLEK: XXS, XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn), polyester (endast XS)
MOD 55: STORLEK: XXS, XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn), polyester



NALLEVÄST../LIKO.. LYFTVÄST.. MOD 60
NALLEVÄST.. FRAMKNÄPPT MOD 64

Dessa modeller anpassar sig efter barnet och lyfter runt överkroppen bara så mycket som behövs för att barnet ska belasta benen efter sin förmåga.

- Modell 64 är försedd med Trygghetsspännen framtill för reglering av vidden.
- Grenband samt Polstrad hylsa för axelband, se bilderna, är tillbehör.

MOD 60: STORLEK: XXS, XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå, (barn), polyester (endast XS)
MOD 64: STORLEK: XS MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn)



NALLEBYXA.. MOD 92

Nallebyxa i nallemonstrat tyg gör ståträning till ett nöje under trygga former. Justerbar inställning i midjan ger barnet ett bra stöd runt bälen.

- Polstrad med syntetiskt fårskinn mot magen och i grenen.

STORLEK: XS
MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn)



NALLE STÅSKALSVÄST.. LIKO.. STÅSKALSVÄST.. MOD 67

Ståskalsvästen har vi utvecklat med tanke på det svåra lyftet av ett barn i ståskal från golvläge upp till stående. Lyften tar hela tyngden och barnet lyfts tryggt med bekvämt stöd för hela kroppen och huvudet.

- Huvudstöd och polstrade Grenband ingår.

STORLEK: XXS, XS, S
MATERIAL: Nallemonstrad polyestertrikå (barn), polyester (endast S)



Stå och gå med rörelsefrihet.

Våra lyfttillbehör för stå/gå/mobilisering möjliggör önskemål som många gånger annars är svårförenliga. Att exempelvis kunna ge brukaren belastningsträning utan att riskera belastningsskador hos medhjälpare och vårdpersonal.

Under förflyttningen eller träningen är det lyften som tar hela belastningen så att brukaren och medhjälparen kan inrikta sig på sin uppgift utan rädsla för konsekvenserna av ett felsteg.

Visste du...

... att våra *fjädrar för hopp/gångträning* ger en “fjädrande” gång och används i kombination med Liko. Lyftbyxa. eller Liko. Lyftväst.. Fjädrarna är både roliga och stimulerande för brukaren.



Liko. LYFTVÄST. MOD 60, 64

Lyftvästen underlättar uppresningen för en person som kan belasta benen. Lyftväst. är ett bra hjälpmedel då man under trygga former önskar stå-, gå- och balansträna. Vid lyft till eller från toalett är underkroppen fri för av- och påklädning. Liko. Lyftväst. med framknäppning, mod 64, ger möjlighet för brukaren att själv knäppa på och av västen. Grenbanden är ett tillbehör och finns i storlekar för vuxen och barn.

Mod 60:

- För brukare som kan stödja på benen
- Trygg och säker vid uppresning, stå-, gå- och balansträning
- Tillåter naturligt rörelsemönster vid uppresning
- Bra vid toalettbesök, underkroppen fri
- Kompletteras gärna med Grenband

STORLEK: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL*

MATERIAL: Polyester, plastat nät (endast S, M, L), nallemonstrad polyestertrikå (barn)

Mod 64:

- Samma användningsområde som mod 60
- Med framknäppning
- Justeringsmöjlighet framtill för byst och mage
- För självständiga brukare
- Kompletteras gärna med Grenband

STORLEK: XS, S, M, L, XL, XXL

MATERIAL: Polyester, plastad nätväv (endast M), nallemonstrad polyestertrikå (barn)



Liko. LYFTBYXA. MOD 92

Med Liko. Lyftbyxa. kan brukaren gåträna under trygga former. Lyftbyxan ger frihet att röra sig med mer eller mindre avlastning av kroppstyngden. Den lyfter säkert och tillåter brukaren att gå och röra sig utan risk att falla till golvet.

- Avlastar kroppstyngden vid stå- och gåträning
- Ger brukare med låg funktion i ben möjlighet att kunna “gå”
- Ger stor rörlighet i rummet
- Lyftbyxa finns i olika storlekar. Alla storlekar, med undantag för XS, är tillverkade i Nätpolyester med tryckavlastande polstring i grenen. En kraftig person kan behöva en större storlek än en smal person med samma längd.

STORLEK: XS, S, M, L, XL*

MATERIAL: Nätpolyester, nallemonstrad polyestertrikå (barn)



Liko. STÅSKALSVÄST. MOD 67

Ståskal är ett uppskattat hjälpmedel för rörelsehindrade barn och ungdomar. Den manuella hanteringen vid applicering av ståskalet liksom uppresningen av barnet i ståskal kan dock bli mycket påfrestande för medhjälparen. Men med rätt lyfthjälpmedel kan dessa problem undvikas.

- Tillåter brukarens medverkan
- Lyfter brukare med ståskal från liggande till stående
- Värdefullt hjälpmedel vid rehabilitering av barn och ungdomar
- Grenband ingår
- Belastar ej ståskalet

STORLEK: XXS, XS, S, M, L

MATERIAL: Polyester (endast S, M, L), nallemonstrad polyestertrikå (barn, endast XXS, XS, S)



* Några storlekar och utföranden med maxlast mellan 300-500 kg.

Sittande till Stående förflyttningar med Sabina™ Uppresningslyft.

Sabina™ är en smidig och mångsidig uppresningslyft, avsedd för brukare som själva kan medverka aktivt vid uppresningsmomentet. Stående kan förflyttning ske exempelvis till rullstol eller toalett, brukaren får då *ståträning i samband med förflyttningen*.

Uppresningen sker med hjälp av en uppresningsväst som lyfter runt brukarens överkropp. Flera olika typer av uppresningsvästar finns för att möta behovet hos olika brukare, exempelvis kan västen placeras under eller utanför brukarens armar. Sabina™ har ett brett sortiment av olika västmodeller och tillbehör.



LIKO.. UPPRESNINGSVÄST.. MOD 91

STORSÄLJARE

Liko.. Uppresningsväst.. är en bekväm uppresningsväst, som är enkel att använda och kräver liten individuell inställning. Används till brukare som behöver mycket hjälp att resa sig, men som sedan står stadigt på sina ben. Lyfter bakom ryggen och under armarna. Uppresningsväst.. kan användas med eller utan fårskinnspolstringen, västens insida är manchesterfodrad och motverkar glidning. Har avtagbart polster av fårskinn som är fäst med blixtlås. Extra polster finns som tillbehör. Fixeras runt kroppen med ett reglerbart midjebälte, som är avsett att hålla västen på plats under appliceringen. Denna modell är en utmärkt uppresningsväst att starta med.

- Fixeras runt kroppen med bälte
- Bekväm med avtagbar polstring
- Reglerbart midjebälte
- Används tillsammans med Sabina.. lyftbygel 350
- Passar stabilare brukare
- Förlängningsskärp samt extra polster finns som tillbehör

STORLEK: S, M, L, XL
MATERIAL: Polyester, fodrad med manchester



LIKO.. TRYGGHETSVÄST.. MOD 93

LIKO.. TRYGGHETSVÄST.. MED EXTRA RYGGSTÖD.. MOD 94

Trygghetsvästen.. är en uppresningsväst som är unik i säkerhet, form och funktion. Den lyfter bakom ryggen och runt bälten. Midjebältet bidrar till säkerheten genom att förhindra risken att brukaren kan glida ur. Säkerhetsprincipen i västens spännfunktion innebär att vi kombinerar två samverkande lyftöglor på varje upphängningskrok. (Samma som på Lyftväst.., Hygiensele.. och Byxsele.., mod 45/46). Trygghetsvästen.. är fodrad med plastad nätväv, vilket ger hög friktion och motverkar glidning på ett effektivt sätt. Trygghetsväst.. med extra ryggstöd, mod 94 har ett högre ryggstöd och lägre nederkant vilket fördelar trycket mjukare över större yta av ryggen. Passar till ostadiga brukare med svårighet att stå.

- För extra säkerhet/trygghet
- Lämplig om brukaren inte är så stadig
- Främst avsedd att användas tillsammans med Sabina.. lyftbygel 350
- Individuell utprovning
- Mod 94 ger extra stöd bakom ryggen
- Fårskinnspolster finns som tillbehör

STORLEK: M, L
MATERIAL: Polyester, fodrad med plastad nätväv.



LIKO.. COMFORTVÄST.. MOD 95

Liko.. Comfortväst.. skiljer sig på ett principiellt avgörande sätt från andra uppresningsvästar. Den består av två delar; den yttre västen lyfter bakom ryggen och utanpå armarna och det inre midjebältet, som är fäst i nedre kanten av den yttre västen, motverkar glidning och bidrar därigenom till ytterligare ökad säkerhet. Säkerhetsprincipen i västens spännfunktion innebär att vi kombinerar två samverkande lyftöglor på varje upphängningskrok (samma som på Lyftväst.., Trygghetsväst.., Hygiensele.. och Byxsele.., mod 45/46). Ingen av delarna skapar något tryck i armhålorna vilket gör att exempelvis smärt- och strokepatienter gärna väljer denna väst.

- Passar till ostadiga brukare med svårighet att stå
- För att undvika tryck i armhålorna, ex stroke- och smärtpatienter
- Lyfter bakom rygg och utanför armarna - ej under armarna
- Midjebältet lyfter runt bälten och motverkar glidning
- Individuell utprovning
- Används tillsammans med Sabina.. Comfortbygel

STORLEK: S, M, L, XL
MATERIAL: Polyester, fodrad med plastad nätväv.



LIKO.. SOLO UPPRESNINGSVÄST.. MOD 911

Solo Uppresningsväst.. används vid behov av en lyftsele för korttidsbruk av en enskild brukare eller för att undvika tvättprocessen. Används tillsammans med Liko.. Sabina.. uppresningslyft för att resa en brukare från sittande till stående position. Solo Uppresningsväst.. lyfter bakom ryggen och under armarna.

- Avsedd för korttidsanvändning av enskilda brukare från sittande till stående
- Ingen tvättning — kasseras efter nedsmutsning eller avslutad användning
- Används tillsammans med Sabina.. lyftbygel 350

STORLEK: M, L
MATERIAL: Nonwoven





Förenklar applicering av lyftselen.

Handy-serien är *manuella hjälpmedel som underlättar applicering av lyftsela samt förflyttning* genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget.

De kan användas för både normalviktiga och riktigt tunga brukare. Glidhjälpmedlen i Handy-serien är tillverkade i ett högkvalitativt lågfriktionsmaterial som har mycket god glidförmåga. Handy Glidlakan, används främst för att underlätta vid applicering av en lyftsela i sittande eller liggande. Den är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta applicering av lyftselar, särskilt på mycket tunga brukare, smärtekänsliga eller brukare med kontrakturer. Några unika fördelar är fickorna på det korta Glidlakanet, som underlättar placering i exempelvis trånga rullstolar och öglorna på den långa varianten av Glidlakanet, som gör det enkelt att fästa i sängens huvudände. Båda dessa lösningar är unika för Handy-serien och är mönsterskyddade av Liko..



LIKO™ HANDY GLIDLAKAN™. APPLICERINGSHJÄLP

Finns i två varianter, kort och lång där den långa modellen är försedd med handtag. Handy Glidlakan™ levereras och används i par om två.

- Materialet håller en mycket hög kvalitet, med mycket låg friktion även efter många tvättar.
- De långa varianterna av Glidlakanen har öglor i överkanten, vilket gör att de lätt kan fästas i sängen, därmed minskar behovet av vårdpersonal som håller i glidlakanet.
- De korta Glidlakanen har små fastsydda fickor som underlättar vid applicering i t.ex. en trång rullstol.
- Vi har utvecklat unika arbetsmetoder som underlättar appliceringen av glidlakan, och som även är komfortabla för brukaren. Med metoden krävs inte att brukaren vänds i sängen när glidlakanet ska läggas på plats.

Övriga tillbehör i Handyserien.

LIKO™ HANDY GLIDCYLINDER™. LIKO™ HANDY BELT™.

På vår webbplats www.liko.se kan du läsa mer om dessa produkter.



Upp och vänd runt i sängen.

Att lyfta upp och rätta till patienter som hamnat fel i sängen är ett av de vanligaste *momenten kring en vårdsäng*. Forskning visar att här uppstår många arbetsskador¹. När en patient exempelvis ska flyttas högre upp i säng eller vändas är Liko.. RepoLakan.. ett utmärkt hjälpmedel. Tillbehöret Liko.. RepoLakan.. bäddas under brukaren och kan användas både i kombination med och istället för ordinarie underlakan under hela vårdtiden (Liko.. Solo RepoLakan.. används alltid tillsammans med ordinarie lakan).



LIKO.. REPOLAKAN.. ORIGINAL

Utvecklat av Liko.. speciellt för att underlätta förflyttningar högre upp i säng samt vändning i säng med hjälp av lyft. Innebär minimal belastning på medhjälparen. Kan användas i kombination med eller i stället för underlakan. Kräver ingen medverkan från brukaren. Avsedd att använda till brukare som ej aktivt kan medverka vid förflyttningar i säng alternativt är mycket tunga för medhjälparna att positionera.

Regular för lyft upp till 200 kg. **Material:** 50% Bomull/50% Polyester, Nätpolyester
Ultra för lyft upp till 500 kg. **Material:** 50% Bomull/50% Polyester, Nätpolyester

Övrigt: Fungerar bäst i kombination med taklyft. Placering innan första användning sker enklast genom att brukaren lyfts upp i en lyftsele. Därefter kan byte av RepoLakanet ske genom vändning med hjälp av densamma.



LIKO.. SOLO REPOLAKAN..

Solo RepoLakan.. är avsett för korttidsbruk för en enskild brukare. Det ska kasseras när det blir smutsigt eller då brukaren inte längre behöver det. Finns i två utföranden (se nedan).

- Förflyttning högre upp och vändning i säng
- Avsett för korttidsbruk för en enskild brukare
- Material: 50% Bomull, 50% Polyester
- Finns i två utförande Short och Generous
- Tvättas ej, kasseras när det blivit smutsigt eller då brukaren inte längre behöver det

SOLO REPOLAKAN.. FINNS I TVÅ STORLEKAR:

Liko.. Solo RepoLakan Short..

Maxlast: 200 kg
Funktion: Möjlighet att genomföra 2-3 repositioneringar högre upp i sängen.

Liko.. Solo RepoLakan Generous..

Maxlast: 300 kg
Täcker en större del av sängen
Funktion: Möjlighet att genomföra 4-5 repositioneringar högre upp i sängen.

För mångsidig användning inom vården.

Multiband.. är ett lyfttillbehör från Liko som kompletterar övriga lyft- och positioneringshjälpmedel i Likos breda sortiment. Multibanden är utvecklade för vårdens mångsidiga behov av att lyfta och *hålla armar, ben eller andra kroppsdelar vid exempelvis behandling eller tvättning*. Tillsammans med en personlyft underlättar Multiband många tunga moment som; sårvård (exempelvis brännskador), hygienprocedurer, behandlingar (exempelvis kateterisering eller omläggning), undersökningar, placering av bäckenshål eller på/avklädning. Multibanden kan också användas för att vända en brukare till sidliggande i sängen. De kan användas enskilt eller parvis. Vid vändning i sängen rekommenderas parvis användning med någon av de bredare modellerna.



LIKO.. MULTIBAND..

Liko.. Multiband.. är tvättbara och tillverkas i ett slitstarkt och hållbart polyestermaterial.

Liko.. Multiband.. Standard Bredd 10 cm
Liko.. Multiband.. Bred Bredd 25 cm
Liko.. Multiband.. Ultra Bredd 40 cm

Spännband 135 cm medföljer samtliga tvättbara Liko.. Multiband.. och används för att spänna fast ena änden av Multibandet i sängen när ett vändningsmoment ska genomföras.



LIKO.. SOLO MULTIBAND..

Solo Multiband.. är avsedda för korttidsbruk för en enskild brukare eller för att undvika tvättprocessen.


Solo Multiband.. Smal Bredd 5 cm
Solo Multiband.. Standard Bredd 10 cm
Solo Multiband.. Bred Bredd 25 cm

Samtliga Multiband.. har en maxlast på 200 kg.

Visste du...

- att Multiband.. underlättar att lyfta/hålla ex. armar och ben vid behandling/tvättning
- att det finns tre tvättbara Multiband.. i olika storlekar
- att det även finns Multiband.. i förbrukningsmaterial avsedda för korttidsbruk av en enskild brukare

¹ Engkvist I-L, Back injuries among nurses - A comparison of the accident process after a 10-year follow-up. Safety Sci, 2007, www.sciencedirect.com

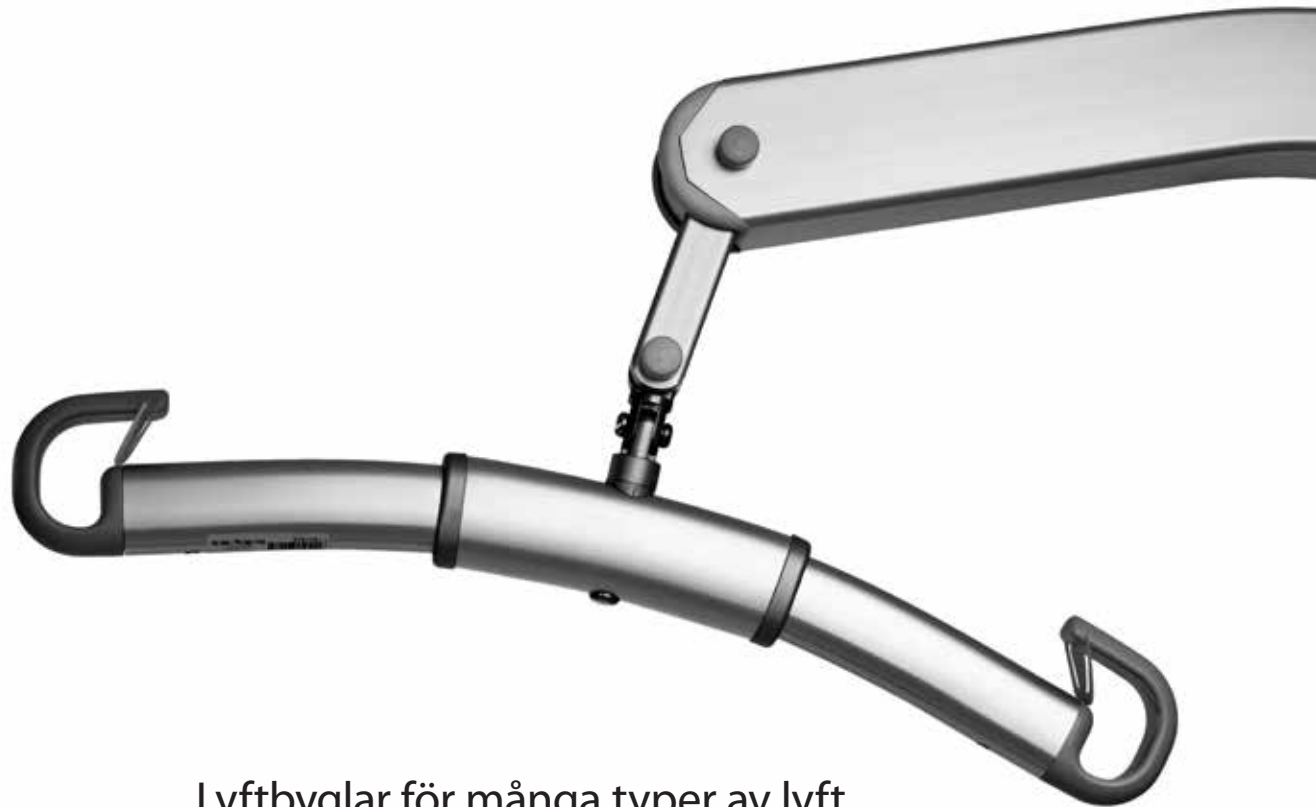

Lyftbyglar för många typer av lyft.

En lyftseles funktion blir alltid bättre tillsammans med en omsorgsfullt utvald lyftbygel. ***Tillsammans bildar lyftselen och lyftbygel en funktionell enhet.*** Lyftbygel har även stor betydelse för säkerheten. I lyftselarnas bruksanvisningar finns rekommendationer om vilken lyftbygel som passar bäst, ofta kan flera olika modeller väljas. Lyftbygelns utformning och geometri bestämmer brukarens sittställning. Vanligen innebär exempelvis en fyrpunktsbygel en mer tillbakalutad sittställning jämfört med en tvåpunktsbygel.

En bred lyftbygel innebär att brukaren håller armarna innanför lyftselen och får mer utrymme för överkroppen. En smalare lyftbygel gör att lyftselen blir tajtare på brukare som ofta håller armarna utanpå lyftselen. En gemensam nämnare för samtliga våra lyftbyglar är att de alla är försedda med **urkrokningsskydd**. Flera av lyftbyglarna finns i utförande med försmonterad snabbkoppling för att snabbt och enkelt kunna koppla på en våg eller byta lyftbygel.

Visste du...

... att det inte är någon slump
att de flesta av våra patientlyftar
och lyftbyglar är tillverkade
i hållfast aluminium. Eftersom
aluminium i princip kan
återvinnas hur många gånger
som helst kallar vi den för
“Den gröna metallen”.

**LIKO™ UNIVERSALBYGEL™ 450**

Maxlast 300 kg

Universal 450 är lyftbygeln som passar i de flesta fall och till de flesta lyftselarna. Det är den lyftbygel som sitter monterad på de flesta lyftar vid leverans (gäller ej Viking XL).

**LIKO™ UNIVERSALBYGEL™ 350**

Maxlast 300 kg

Universal 350 är tio centimeter smalare än Universal™ 450 och en vanlig modell när vi lyfter barn. När en vuxen person kombinerar sin lyftsela med Universal 350 håller man armarna på utsidan av lyftselen.

**LIKOTM UNIVERSALBYGELTM 600**

Maxlast 300 kg

Universal 600 ger mer utrymme för överkroppen och är främst avsedd för användning med våra Comfortsele Plus..mod 300/310 och 350/360 eller med lyftselar där man vill koppla benstöden "omlöst", d v s då benstöden placeras parallellt under brukarens båda lårben, exempelvis tillsammans med Amputationssele..mod 70/75.

**LIKO™ UNIVERSALBYGEL TWIN™ 670**

TwinMaxlast 300 kg

Universal 670 Twin™ är en lämplig modell för storvuxna brukare och för personer som vill minska lyftselens tryck mot sina axlar. Universal 670 Twin™ passar tillsammans med lyftselar som används med "korslagda" benstöd, exempelvis Soft Originalsele Hög™, mod 26 eller med Universalsele™, mod 000. Alla fyra krokar ska belastas vid varje lyft.

**LIKOTM LYFTBYGEL MINITM 220**

Maxlast 205 kg

Minibyggl 220. är en speciellt liten lyftbygl som är framtagen främst med tanke på brukare som vill sitta "insluta" i sin lyftsele. Vanligen är orsaken att lyftselen ska vara så "tight" som möjligt för att kännas extra säkra och trygga.

**LIKO™ KRYSSBYGEL 450**

Maxlast 300 kg

Kryssbygel 450 är en mindre fyrfunktsbygel som ger en tillbakalutad sittställning. Kryssbygel 450 passar bäst med lyftslar som har hög rygg eller huvudstöd. Den är liksidig och rekommenderas även till mindre lyftslsstorlekar. Bra kombinationer är med Skalse_™ mod 22, Soft Originalsele Hög_™ mod 26 i storlek medium och mindre. Lyftbyxa_™ mod 92 fungerar bra med Kryssbygel 450.

**LIKO™ KRYSSBYGEL 670**

Maxlast 300 kg

Kryssbygel 670 är en lyftbygel med fyrpunktsupphängning. Den är bred över axlarna och ger en bekvämt tillbakalutad sittställning. Kryssbygel 670 passar bäst med lyftselar som har hög rygg eller huvudstöd, exempelvis Universalsele™, mod 000 och Soft Originalsele Hög., mod 26, båda modeller i storlek medium eller större och Comfortsele Plus™, mod 300/310 och Comfortsele Plus Hög., mod 350/360, i alla storlekar. Comfortsele Plus Hög., mod 350/360 tillsammans med Kryssbygel 670 är en utmärkt lösning för höftopererade och personer med inskränkt böjformåga i höften.

**LIKO™ UNIVERSAL SIDOBYGLAR™ 450**

Maxlast 300 kg

Universal Sidobyglar™ är ett alternativ till Likos Kryssbyglar för att åstadkomma en fyrpunktsupphängning. Sidobyglarna kan enkelt hängas på och kopplas loss från en Universalbygel™. Vid belastning anpassar sig Sidobyglarna efter lyftselen vilket oftast innebär att de ställer sig något diagonalt och därigenom ger mer utrymme åt brukarens axlar. Sidobyglar i kombination med Comfortsole Plus Hög™ mod 350/360 är en utmärkt lösning för höfteroperade och personer med inskränkt böjformåga i höften. Universal Sidobyglar levereras tillsammans med en praktiskt förvaringsväska att hänga på vägen eller på en mobilyft.

Smarta lyfttillbehör för total anpassning.

Som vi berättat tidigare så brukar vi säga att “lyftselen är halva lyftet”. Under de tre decennier vi utvecklat lyftar och lyfttillbehör har vi fångat upp många olika behov. För att möta dessa har vi arbetat med att komplettera vårt breda sortiment med många smarta tillbehör.

Ett unikt verktyg på webben.

På vår hemsida hittar du vår smarta webbaserade lyftselsguide där du kan få hjälp med att hitta en lämplig lyftsele för din verksamhets lyftbehov eller för en specifik brukare. Du fyller i uppgifter runt brukarens status och aktuell lyftsituation så får du enkelt upp rekommenderade lyftselsmodeller. Denna guide ersätter naturligtvis inte en individuell utprovning, vilket vi alltid rekommenderar.

Hitta din lyftsele.

I vår guide kan du få hjälp med att hitta en lämplig lyftsele för din verksamhets lyftbehov eller för en specifik brukare. Tänk på att ju fler uppgifter du fyller i, desto mer rättvisande blir resultatet. När du har fått upp dina resultat till höger kan du klicka dig vidare för att läsa mer om respektive modell.



Liko™ Lyftband

Lyftbanden är avsedda för korta förflyttningar i kombination med taklyft då lyftet kan planeras så att lyft över golv undviks.

Det är viktigt att innan användning göra en noggrann individuell utprovning för att försäkra sig om att brukaren klarar av lyftsituationen och blir lyft på ett tillfredsställande sätt med tanke på säkerhet och trygghet.



Grenband till Lyftväst™

Grenband är ett vanligt tillbehör till Liko™ Lyftväst. då lyftvästen används för gåträning. Grenbanden motverkar att Lyftväst glider upp på överkroppen.



Polstringshylsa till benstöd

Som tillbehör finns tryckavlastande polstrade fodral som kan köpas extra till alla våra lyftselar. De är försedda med syntetiskt fårskinn på ena sidan och lyftselsens tygmateriel på den andra.



Polstrad hylsa för axelband

Som tillbehör finns tryckavlastande Polstringshylsor för montering på de främre avlastningsbanden. Polstringshylsorna är försedda med kardborreband längs ena långsidan för enkel applicering.



Ögleclips

För att minimera felkoppling finns Ögleclips som tillbehör för att märka ut de öglor som är utprovade för en viss person. Det underlättar för medhjälparna att välja rätt ögla att koppla på lyftbygeln.



LikoScale™

LikoScale är en smidig våg som är avsedd för att väga brukare under själva lyftet. Vågens mätvärden avläses på en display och kan efter justering visas i antingen kg eller lbs.



Huvudstöd

Huvudstödet är ett lyfttillbehör som är till för att stödja brukarens huvud. Huvudstödet används tillsammans med någon av Likos lyftselar där lyftselen inte ger stöd för huvudet. Huvudstödet är tillverkat i polyester.



Förlängningsöglor

Likos förlängningsöglor är avsedda för enklare anpassningar av Likos tillbehörssortiment. De monteras på bandöglor och ögleband för att justera längden efter behov. Förlängningsöglorna finns i två olika längder för 12 respektive 22 cm förlängning.



Solofodral för Ultra Lyftbyxa™

Som tillbehör för Ultra Lyftbyxa™ finns ett skyddsfodral i förbrukningsmaterial. Fodralet träs över Lyftbyxa för att skydda den från nedsmutsning.

Specialisterna på lyft och förflyttningar.

Vi är specialister på att lyfta och förflytta människor säkert och omsorgsfullt. Vi använder vår ledande ställning vad gäller kunskaper, teknik och metoder till att skapa ett komplett sortiment patientlyftar, lyftselar och tillbehör. Vi analyserar dina behov och levererar en lösning som uppfyller dina speciella behov. Vi erbjuder dessutom alltid utbildning och kontinuerligt samarbete för att ge personal och patienter en säker miljö vid lyft och förflyttningar. Kombinerat med andra lösningar i Hill-Roms breda produktsortiment kan vi därför tillhandahålla kompletta rumslösningar för sjukhus och andra vårdinrättningar runt om i världen.

Vi kan även erbjuda lyftselar i andra material och utföranden samt individanpassade lyftselar för brukare med speciella behov.

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

På våra webbplatser www.hill-rom.com och www.liko.se hittar du våra kontaktuppgifter samt mer om oss och våra erbjudanden.

Alla varumärken i denna broschyr är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Liko R&D, Hill-Rom Liko AB eller Hill-Rom Services, Inc.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
Deutschland _____ 0800 8 63 55 37
Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
Italia _____ + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) _____ 0800 8 63 55 37

Österreich _____ 0800 8 63 55 37
Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
Iberia _____ +34 (0)93 6856000
Nordic Countries _____ +46 (0)20 78 10 30
Export _____ Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via
website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.

© 2013 Hill-Rom® SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.