

UUSI
stingray



PERHEET LIIKKEELLE



R82[®] 

Tanskalaista designia
Innovaatiota
Laatua



Uusi Stingray tutuksi

10

Vastuullinen, hygieeninen ja turvallinen kangas



6

Ainutlaatuinen kääntötoiminto



4

Matkalla ulos?

11

Väritä elämäsi



Yhdessä ulos!

Aktiivinen perhe-elämä edellyttää oikeita välineitä. Uusissa supertyylikkäässä Stingray-rattaissa istuma-asennon säätäminen ja ainutlaatuinen saranoitu kääntötoiminto eivät vaadi työkaluja; rattaiden istuinosan suunta voidaan valita kääntötoiminnon avulla helposti.

Modernisti muotoiltu hiilikuituinen runko rohkaisee jokaista perhettä ulkoilemaan yhdessä. Uusi Stingray on omaa luokkaansa.

Säätömahdollisuudet, mukavuus ja keveys ovat näiden rattaiden avainsanoja. Uusi Stingray mahdollistaa istuimen suunnan vaihtamisen 180° kääntyvän mekanismin ansiosta lapsen istuessa siinä. Lapsen istuma-asento on mukava, ja useat kallistussäädöt helpottavat tarvittavan asennon löytämisessä.

Uuden Stingrayn avulla on helppo lähteä ulos liikkeelle ja lapsen on mahdollista saada paljon erilaisia ärsykeitä ympäristöstään. Monipuolisen istuimen ja tukevan alustan avulla saadaan lapselle hyvä istumatasapaino, ja lapsen on helpompi pitää vartalo ja pää keskilinjalla. Hyvä asentohallinta auttaa lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi ja mahdollistaa uusien motoristen taitojen omaksumisen.

Tyylikkää ja toimivat lisävarusteet tarjoavat tukea juuri siellä, missä sitä tarvitaan.



180° kääntyvä istuin myös lapsen istuessa siinä



Seikkailu ulkosalla?

Uuden Stingrayn avulla on helppo lähteä ulos liikkeelle ja lapsi voi kokea paljon uusia erilaisia ärsykeitä ympäristöstään.

Liikuntarajoitteiset lapset ovat usein hyvin herkkiä tuulelle ja auringolle.

Rattaisiin voidaan asentaa säädettävä ja taittuva kuomu.
Jos kuomun vetää kokonaan alas, lapsen eteen avautuu ikkuna, joten lapsi pystyy silloinkin aktiivisesti seuraamaan ympäristöään.



Monia vaihtoehtoja tarjoava säädettävä kuomu



Helppo & turvallinen kuljettaa

Uusi Stingray taittuu nopeasti kokoon ja mahtuu lähes jokaiseen autoon. Istuinosa ja alusta voidaan taittaa erikseen tai yhdessä autoon pakattavaksi – ja pian olet matkalla.
Uusi Stingray on ISO 7178-19 –standardin mukaisesti turvallinen kuljetettavaksi moottoriajoneuvoissa.

Lisäksi uusi Stingray on hyväksytty kuljetettavaksi 40 kg:n käyttäjäpainon kanssa moottoriajoneuvoissa.

Lisävarusteista löytyy valikoimaa matkanteon helpottamiseksi:



Ostoskori



Kuljetuskiinnikkeet



Happipullon pidike



Hengityslaitteen alusta





Katseen tasalla

Käänteentekevä 180° kääntyvä istuinosa – on käytettävissä myös lapsen istuessa siinä. Kontaktin säilyttäminen lapseen on aina tärkeää. Tilanteesta riippuen lapsi voi joko nähdä vanhemman ja kommunikoida hänen kanssaan tai seurata ympäristöään ajosuunnassa.

Uusi Stingray tarjoaa tuulesta ja auringosta riippumatta mukavan asennon lapselle, ja 180°:n kääntämismahdollisuuden avulla voidaan istuinosa kääntää myös lapsen istuessa tuolissa.

180° kääntyvä istuin
myös lapsen
istuessa siinä



Täydellinen istuma-asento

On tärkeää vaihtaa asentoa. Teemme sitä koko ajan, mutta jotkut lapset tarvitsevat apua asentonsa korjaamiseen ja lihaksiensa ojentamiseen. Istuimen kallistaminen uudessa Stingrayssä on hyvin helppoa.

Erittäin helpot
istuimen ja
selkänojan
kallistussäädöt

ISTUINKALLISTUS

Istuimen kallistus säilyttää lonkkien kulman ja antaa lapselle mahdollisuuden levätä ja rentoutua. Lapset, joiden pään hallinta on puutteellista, hyötyvät lievästä taaksepäin suuntautuvasta kallistuksesta. Kallistuksen muuttaminen lievittää myös takamukseen ja selkärankaan kohdistuvaa painetta, joten pidempiaikainen istuminen tulee erilaisten istuma-asentojen avulla miellyttävämmäksi.

SELKÄNOJAN KALLISTUS JOPA 170°

Selkänojan kallistaminen muuttaa lonkkien kulmaa. Joillekin spastisuudesta kärsiville lapsille on edullista säilyttää lonkkien kulma spastisen elementin vähentämiseksi ja käyttää pelkästään istuinkallistusta, mutta makuuasento on hyvin rentouttava toisille lapsille. Tässä asennossa lapsi voi tarvittaessa ottaa vaikkapa nokkaunet





Asentotuki ja stabiilius

On tärkeää varmistaa yksilöllisten tarpeiden mukainen asennon tukeminen. Tukevan alustan tarjoama lisätuki istuma-asennossa antaa lapselle liikkumisvapautta.

Uusi Stingray-istuinosaan sisältyy jalkatuki – vähäinenkin tuki vaikuttaa lantion asentoon



Päätuki, tyyny



Päätuki




Muotoiltu päätuki



Vartalotuet



Lantiotuet

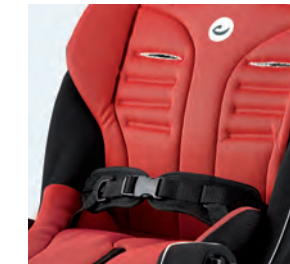

Liivit & vyöt



Abduktiokiila



Kiinnipitotanko



Pöytä

Tutustu
lisävarustevaikoimaan
lähemmin
verkkosivuillamme

ja siten myös vatsalihaksiin.

Stingray rattaisiin on runsaasti erilaisia lisävarusteita, joiden avulla voidaan tukea lapsen istuma-asentoa.

Kasvu jatkuu!

Lapsenne motoriset kyvyt kehittyvät jatkuvasti, ja johtavat uusiin taitoihin, tarpeisiin ja itsenäisyyteen. Uusi Stingray koostuu yhdenkokoisesta rungosta, ja istuinosa on saatavissa kahdessa koossa. Stingray-rattaat mukautuvat lapsen kasvuun pelkästään istuinosa vaihtamalla.

Jalkalauta, istuinosa on säädettävissä erilaisiin istuma-asentoihin, jolloin lapsi voi istua joko aktiivisesti tai olla lepoasennossa ja kaikkea siltä väliä ja siten kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.



Stingray istuin	Koko 1	Koko 2
Istuinleveys	30 cm (11¾")	35 cm (13¾")
Istuinleveys lantiotukien kanssa	18 - 22 - 26 cm (7 - 8½ - 10¼")	23 - 27 - 31 cm (9 - 10½ - 12")
Istuimen syvyys	18 - 30 cm (7 - 11¾")	25 - 40 cm (9¾ - 15½")
Selkänokan korkeus, olan tasolla	27 - 41 cm (10½ - 16")	36 - 51 cm (14 - 20")
Selkänokan kokonaiskorkeus	41 - 51 cm (16 - 20")	50 - 65 cm (19½ - 25¼")
Jalkatuen raudan pituus	21 - 28 - 34 cm (8¼ - 11 - 13¼")	21 - 28 - 34 cm (8¼ - 11 - 13¼")

YKSI RUNKOKOKO



12" takapyörät
7" etupyörät



12" taka- ja
etupyörät





Vastuullinen, hygieeninen & turvallinen

Pyrimme myötävaikuttamaan luonnonvarojen hyödyntämisen vähentämiseen, siksi tarjoamme uuteen Stingray-malliin uudenlaisen, 100-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista valmistetun kankaan, joka on saatavissa laajana värivalikoimana.

Istuinpehmuste on asennon parantamiseksi valmistettu miellyttävästä onteloneule-joustokankaasta, jonka kosketuspinta ja ulkonäkö on miellyttävä.

Kangas on kestävä ja elastinen ja soveltuu aktiivisiin seikkailuihin. Kangas on lisäksi tulenarkuudeltaan alhainen, vettä ja öljyä hylkivä, antibakteerinen, pestävä ja haalistumaton.

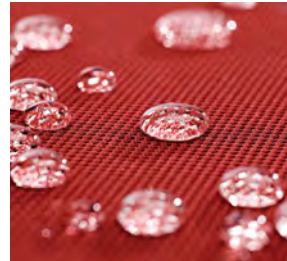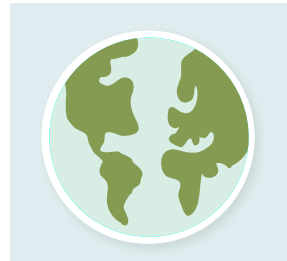

Väritä elämäsi

Vaihda istuinpehmuste Strigray-rattaisiin ja ulkonäön muuttaminen tyylikkääksi on helppoa. Valitse 7:stä eri väristä...





STINGRAY

Tulevaisuuden tasalla

R82 on markkinoiden johtava liikuntarajoitteisten lasten apuvälineiden toimittaja pitkälle kehitetyllä tuotevalikoimallaan, johon sisältyy istumisen, seisomisen, kylpemisen ja kuljetuksen apuvälineitä. Lasten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla heille tarjoutuu suurin mahdollinen vapaus ja uusia tilaisuuksia liikkumiseen

nothing compares to a smile

R82 A/S

Denmark
+45 79 68 58 88
R82@R82.com
R82.org

R82 UK Ltd.

Great Britain
0121 561 2222
R82uk@R82.com
R82.co.uk
facebook.com/R82UK

R82 Inc.

USA
+1 800 336 7684
information@R82.com
R82.com
facebook.com/R82Inc

R82 au Pty Limited

Australia
+61 (02) 8213 6666
au.sales@R82.com
R82.co.au
facebook.com/R82Australia



Jaa R82
Stingray -hetkesi



Maahantuonti ja markkinointi:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi

#R82stingray #nothingcomparestoasmile

