

# permobil

## Physio-selkätukisarja

Progeo, merkittävänä aktiivikäyttöön suunniteltujen pyörätuolien valmistajana, on lisännyt laajaan tuotevalikoimaansa täysin uudistuneen Physio-selkätukisarjan tukemaan vartalon asentoa pyörätuolissa istuttaessa.

Physio-selkätukisarja erottuu omalla ainutlaatuisella ja tyylikkäällä muotoilullaan, joka on aina ollut ominaista Progeon tuotteille ja yrityksen tyyliille.

Selkätuen innovatiivinen säätöjärjestelmä helpottaa selkätuen asentamista pyörätuoliin ja sen säätämistä sekä käyttöä ja tekee siitä sopivan kaikenlaisille pyörätuoleille.

Laajan kuorivalikoiman ja niihin saatavien lisävarusteiden ansiosta selkätukivalikoimasta on mahdollista valita kullekin käyttäjälle sopivin selkätuen anatominen malli ja muotoilu, mikä varmistaa parhaan mahdollisen tuen ja mukavuuden pyörätuolissa istuttaessa.





## Physio AIR

Erittäin kevyt hiilikuitukuorinen AIR on ihanteellinen aktiivisille ja/tai urheilullisille käyttäjille. Saatavilla kahdessa muodossa, Regular ja High Wing, paremman vartalon hallinnan takaamiseksi.



Regular



High wing

Selkänöjan leveys (cm)	Sopii pyörätuolin leveyteen (cm)
36	33 — 39
39	36 — 42
42	39 — 45
45	42 — 48



## Physio POSTURE


Alumiinikuorinen POSTURE soveltuu käytettäväksi tilanteissa, joissa tarvitaan vartaloon enemmän tukea ja erilaisia lisävarusteita.



Regular



Selkänöjan leveys (cm)	Sopii pyörätuolin leveyteen (cm)
36	33 — 39
39	36 — 42
42	39 — 45
45	42 — 48
48	45 — 51

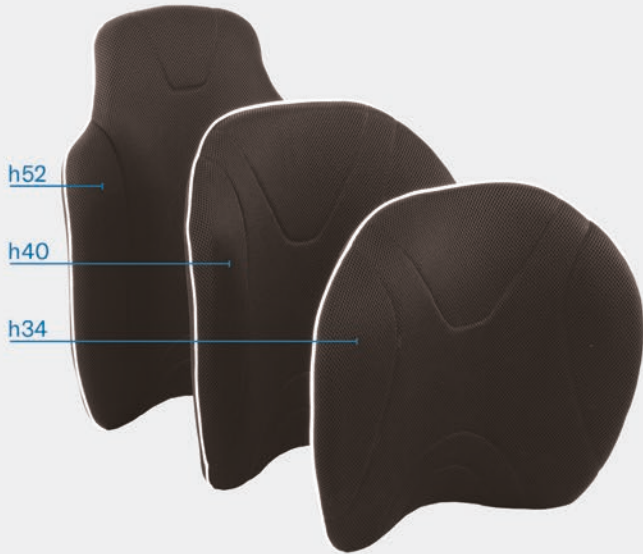

## Physio KID

Alumiinikuorinen KID on suunniteltu lapsen istuma-asennon vakautta ja mukavuutta ajatellen.



Selkänöjan leveys (cm)	Sopii pyörätuolin leveyteen (cm)
30	27 — 30
33	30 — 33
36	33 — 36



## Verhoilu

Erittäin mukava, hengittävä ja kevyt pehmuste. Heijastavat reunat ja merkinnät.



## Lisätyynyt selkätuen muotoiluun

Lisätyynyt selkätuen syvyyden muotoiluun. Lisätyynyissä ei puolieroa, saatavilla kahdessa koossa, säädettävä korkeus. Lisätyynyjen avulla voidaan muuttaa AIR-, POSTURE- ja KID-selkänöjien muotoilua syventämällä tukien avulla kuoren profiilia.



Laaja korkeuden säätö.




Pienen ja suuren, samalla puolella olevan tyynyn sekä suuren toisella puolella olevan tyynyn avulla muotoiltu ja syvennetty selkäosa.



## Swing Away -vartalotuet

Sivulle avattavat Swing away -vartalotuet on muotoiltu siten, että ne tarjoavat riittävän laajan ja mukavan tuen vartaloon korkeus-, syvyyss- ja kallistussäätöjensä ansiosta.

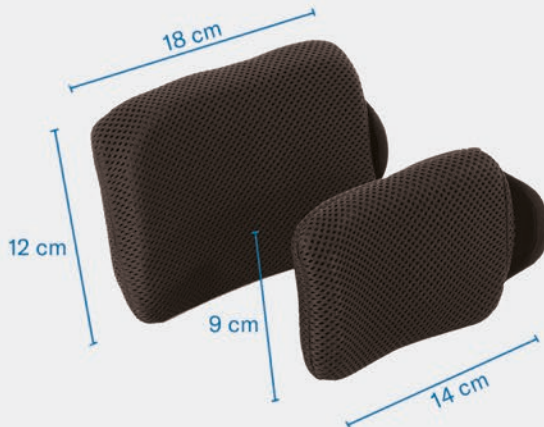

Vartalotuen kiinnike, jossa on pallonivel ja kiinnityksen säätöaukot.



Vartalotuen kiinnike, jossa on kaksi palloniveltä sekä 65 mm:n jatke 20 mm:n lisäsäädöllä.



## Pääntuki

Monisäätöinen palloniveljärjestelmä (2 kpl) mahdollistamaan haluttu pään asento. Pehmusteosaa saatavilla kahdessa koossa (28 ja 34 cm).






## Kiinnikkeet

Turvalliset ja luotettavat runkokiinnitykset soveltuvat selkänojan putkiin, joiden halkaisija on 18-26 mm. Kiinnikkeiden avulla selkätuen korkeutta, kallistusta ja syvyyttä voidaan säätää.



Sama kiinnike eri putkille välillä Ø18 - Ø26 mm.

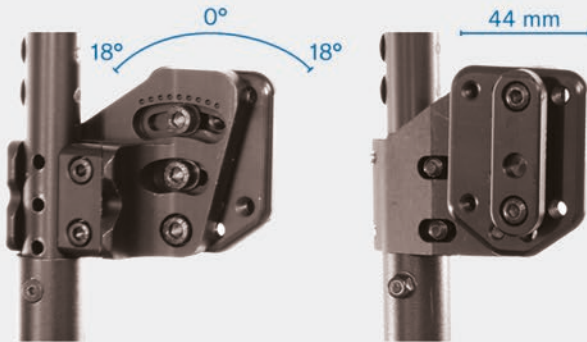

Kallistuksen ja syvyyden säätö.



Kaksi tapaa säätää selkätuen korkeutta

Portaaton korkeuden ja kallistuksen säätö sekä säädettävä syvyys.

## Asennus ja irrotus

Minimalistinen, erittäin kevyt kiinnitysjärjestelmä, joka helpottaa huomattavasti selkätuen paikalleen laittamista ja sen irrottamista.



## AIR kiinteällä asennuksella

Physio AIR kiinteästi asennettuna tuo kiinteärunkoiselle Progeo-pyörätuolillesi kevyempää ilmettä. Vaikka selkätuki ei ole pikakiinnityksellä irrotettavissa, sen korkeuden, 10 mm:n syvyyden ja 20°:n kaltevuuden säätäminen on mahdollista.

 **ALGOL**  
TREHAB

Maahantuonti ja myynti:  
Algol Trehab Oy  
Karapellontie 6 | 02610 Espoo  
Puh. (09) 5099 331  
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi





Rehateam S.r.l.  
Vicolo Negrelli, 5, 31038 - Castagnole di Paese (TV) - Italy  
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387  
customer\_support\_it@permobil.com  
permobil.it

