



TR 2000/3000

Suihkupaarit

Hygiene Equipment
Designed for People

TR 2000/3000 helpottaa potilaan suihkuttamista ja siirtämistä

Suihkupaareissa on ainutlaatuinen sivulaita, jonka ansiosta ne voidaan työntää pidemmälle sängyn päälle potilaan helppoa ja turvallista siirtämistä varten. TR 2000 on hydraulinen ja TR 3000 akkukäyttöinen malli. Kumpaakin mallia saa kolmessa eri pituudessa.



Tuote on rekisteröity Ruotsin lääkewirastossa luokan 1 lääkinälliseksi laitteeksi (MDD 93/42/ETY).

TR pidättää itsellään oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia ja/tai parannuksia ilman erillistä ilmoitusta.



Suihkupaareista on apua jo sängyn vierellä, sillä hoitaja pääsee helposti käsiksi parien säätöihin, kuten korkeuden säätöön, parien kallistukseen, pyörien jarruihin ja suoraan ohjaukseen. Suihkupaarien kummassakin päässä on vedenpoistoaukko, joten potilas voidaan asettaa paareille kummin päin tahansa. Pää- tai jalkapäätä ei ole erikseen määritetty.



TR EQUIPMENT



TR 2000/3000

Suihkupaarit

Hygiene Equipment
Designed for People




Ominaisuudet

- Suihkupaareissa on jalkatoiminen korkeudensäätö. Näin hoitaja voi asettaa itselleen tehokkaimman ja mukavimman työskentelykorkeuden ja hänen molemmat kätensä jäävät vapaiksi potilaan hoitoa varten.
- Hihnakäyttöisen nostomekanismin ansiosta TR 3000 mallin toiminta on hiljaista, sujuvaa ja nykimätöntä. Korkeudensäätö toimii kahdella ladattavalla suuren kapasiteetin akulla. Latauksen tarpeesta ilmoitetaan merkkiäänellä.
- Suihkupaarit on helppo kallistaa Trendelenburgin asentoon sokissa olevan henkilön olon helpottamiseksi. Paareja voidaan kallistaa kumpaankin suuntaan niiden kummassakin päässä olevilla kallistuksensäätövivilla. Kallistusasettoa
- säädellään kaasujousilla, joten hoitajan valittavissa on rajattomasti kallistusasettoja kallistusalueen sisällä.
- Suuret jarruilla varustetut pyörät sekä matalalta haarautuvat jalat suoraan ohjautuvilla pyörillä ovat ominaisuuksia, jotka tekevät suihkupaareista helposti ohjattavat ja siirreltävät.
- Rungon matala painopiste vakauttaa suihkupaareja.
- Sivulaitoja voidaan painaa sisäänpäin ja näin pienentää suihkupaarien leveyttä, kun kuljetaan kapeilla käytävillä.
- Runko on valmistettu jauhepinnoitetusta ruostumattomasta ja sähkönsinkittyä teräksestä.
- Tuote on suunniteltu helppoa puhdistusta silmällä pitäen.
- Kaikkiin malleihin kuuluu vakiovarusteina patja, tyyny ja yhden metrin mittainen tyhjennysletku.



Akkuikäyttöinen TR 3000 – rungon takaosa

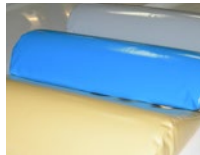

Patjojen väri vaihtoehtoja



Hydraulinen TR 2000 – rungon takaosa



Korkearunkoinen hydraulinen TR 2000 ja korkearunkoinen akkuikäyttöinen TR 3000



TR 2000 ja TR 2810 -suihkupaneeli

Tekniset tiedot

Pituus	1 600/1 900/2 100 mm (63"/75"/83")
Leveys	705 mm (27 3/4") (matalampi runko)
Korkeus	625–925 mm (24 1/2" – 36 1/2"), vakio 685–985 mm (27–39"), korkea runko, optio
Enimmäiskuormitus	150 kg (330 lbs) (potilas + vesi)
Runko	Jauhepinnoitettu ruostumaton ja sähkönsinkitty teräs
Pyörät	Kaksi jarruilla varustettua ja kaksi suoraan ohjautuvaa pyörää
Säätö	Jalkasäädin korkeudensäätöä varten
Patja, tyyny	Paloturvallinen materiaali – harmaa (vakio) / keltainen tai sininen (optio)
Akku (TR 3000)	Ladattava, 24 V

Hydrauliset mallit

TR 2000	Vakio	P = 1 900 mm
TR 2000 - S	Pediatrinen	P = 1 600 mm
TR 2000 - L	Pitkä	P = 2 100 mm

Akkukäyttöiset mallit

TR 3000	Vakio	P = 1 900 mm
TR 3000 - S	Pediatrinen	P = 1 600 mm
TR 3000 - L	Pitkä	P = 2 100 mm

Lisävarusteet/optiot

- selkätukityyny, 15 astetta
- potilaiden nostinavusteista siirtämistä varten suihkupaareihin voidaan lisätä tehdasasenteinen pyöräsarja, joka mahdollistaa vähintään 135 mm:n vapaan tilan etujalkojen alla – pyöräsarja korottaa suihkupaareja 60 mm
- kaikki mallit voidaan toimittaa sinisellä tai keltaisella patjalla ja tyynyllä
- kiinnittimet/hihnat patjojen kiinnittämiseksi sivulaitoihin
- turvallaidat sataprosenttisesti jauhepinnoitettua ruostumatonta terästä.

Dimensions (mm)

