

meywalk® 4

Mikäli haluatte kokeilla Meywalk® 4 –kävelytelinettä, pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot meille tai lähimmälle jälleenmyyjälle: jalkojen sisämitta, ruumiinpaino ja rinnan ympärys.



Tekniset tiedot	Mini	Small (pieni)	Medium (keskikoko)	Large (suuri)
Pituus:	80 cm	85 cm	93 cm	110 cm
Ulkoleveys:	56 cm	62 cm	62 cm	68 cm
Sisäpuolinen toimintaleveys:	44 cm	49 cm	50 cm	57 cm
*Istuimen korkeus:	28-46 cm	44-67 cm	60-84 cm	80-104 cm
*Vartalotuen korkeus:	55-77 cm	74-99 cm	101-133 cm	120-152 cm
Maksimikuormitus:	80 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Paino:	20 kg	25 kg	32 kg	34 kg
Väri:	Keltainen	Vihreä	Punainen	Musta
Tilausnumero:	012000	013000	011200	011250

* Korkeudet mitattu jousien ollessa puoliksi kokoonpuristuneina.



Meywalk® 4 on patentoitu rakenne ja varustettu CE-merkinnällä ja yhdenmukainen vastaavien normien kanssa. Meywalk® 4 on valmistettu teräksestä ja verhoilu on polyuretaania.

meyland-smith
mobility and more

Maahantuonti ja myynti Suomessa:

Algol Trehab Oy - Karapellontie 6 (PL13)
FI-02610 Espoo
puh.(09)-5099 331
www.algoltrerehab.fi
E-mail: algol-trehab@algol.fi

Meyland-Smith A/S - Mads Clausens Vej 1 - DK-9800 Hjørring
+45 98 96 19 85 - Fax.: +45 98 96 19 86
www.meyland-smith.dk
E-mail: info@meyland-smith.dk

meywalk® 4

lapsista aikuisiin

Mini, Small, Medium ja Large



meyland-smith
mobility and more

Meywalk® 4

se dynaaminen kävelyteline

Uuden Meywalk®4-kävelytelineen käyttäjät ovat tyypillisesti kaikenikäisiä pyörätuolista riippuvaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat huomattavissa määrin apua ja tukea seisomiseen ja kävelyyn.

Samalla Meywalk® 4 tarjoaa käyttäjälle paljon parempaa elämänlaatua mahdollistamalla käyttäjän osallistumisen jokapäiväisiin toimintoihin ja itsenäisten päätösten tekemisen.

Meywalk®4 on tunnetun Meywalk®-tuoteperheen neljäs sukupolvi, joka on nyt varustettu uusin ja parannetuin ominaisuuksin käyttäjän avustamiseksi ja tukemiseksi jokapäiväisessä elämässä



Jousitettu kävelyteline

Meywalk®4 erottuu markkinoilla edukseen kierrejousituksensa ansiosta. Jouset stimuloivat käyttäjän lihaksia ja liikkeitä, jotka jäljittelevät luonnollista kävelyä. Tämä kehittää kävelytaitoa. Lisäksi on havaittu, että jousitus varsin usein motivoi psyykkisesti vajaakuntoisia käyttäjiä liikkumaan enemmän ja luo näin ollen perustan edelleen kuntoutumiselle.

Käytännössä rungon yläosa seuraa käyttäjän liikkeitä ja tarjoaa ihanteellisen tuen kävelyn eri vaiheissa.

Dynaaminen satulaistuin

Meywalk®4:n uutena ominaisuutena on dynaaminen satulaistuin, joka myös sallii käyttäjän liikkeitä. Kumijousilla varustettu istuin sallii jonkin verran lantion kiertymistä kävelyn aikana. Käyttäjän kävellessä satulaistuin seuraa lanteiden sivuttaisliikkeitä, mutta samalla palauttaa käyttäjän aina hellävaraisella ja turvallisella tavalla takaisin alkuasentoon kävelyn eri vaiheiden aikana. Dynaaminen istuin on Meywalk®4:n ainutlaatuinen ominaisuus, jota ei ollut tarjolla Meywalk®-tuoteperheen aiemmissa sukupolvissa.



Painovoima hallintaan

Kävelytelineen dynaaminen istuin ja pehmustettu vartalotuki tukevat käyttäjää ja auttavat kehon pitämistä pystysuorassa. Sekä istuin että vartalotuki ovat korkeuden osalta portaattomasti säädettäviä. Kävelyteline voidaan näin sovittaa tarkasti käyttäjän mukaiseksi ja mukautuu siten kasvuun.

Lisäksi on mahdollista säätää istuimen ja vartalotuen kallistusta siten, että käyttäjä pystyy asettumaan mihin tahansa asentoon pystysuoran ja hieman eteenpäin kumartuneen asennon välillä, mikäli tämä osoittautuu tarpeelliseksi kävelytoiminnon tukemiseksi. Tämä tuote on ensisijaisesti tarkoitettu sisäkäyttöön kovilla ja tasaisilla alustoilla. Suosittelemme aina avusteista käyttöä ulkokäytössä.

2

Helppo nousta sisään ja poistua

Jo aiempien Meywalk®-mallien perusteella on luonnollista, että Meywalk®4-kävelytelineeseen siirtyminen ja siitä poistuminen on varsin vaivatonta yhdysrakenteisen kääntötangon avulla, joka laskee ja nostaa istuinta ja vartalotukea avustetun käyttäjän siirtyessä kävelytelineeseen tai poistuessa siitä.

Säädöt ilman työkaluja

Meywalk®4 on saatavissa neljässä koossa ja säädettävissä jokaisen yksittäisen käyttäjän tarpeiden ja koon mukaiseksi. Kaikki säädöt on helppo tehdä työkaluja käyttämättä, mikä on suuri etu toimeliaina ja kiireisinä päivinä. Kävelytelineen useimmat pinnat ovat joko pinnoitettuja tai verhoiltuja umpisolupolyuretaanilla, mikä varmistaa pitkäikäisyyden, helpon huollettavuuden ja puhdistamisen.

Raskasta kuormitusta

Monet ovat kyselleet tämän tyyppistä kävelytelinettä käyttäjille, joiden paino ylittää 100 kg. Tämä on nyt mahdollista uuden Meywalk®4-kävelytelineen kanssa, sillä se on testattu ja hyväksytty 130 kg:n painoisille käyttäjille.

Meywalk®4-kävelytelineen perustoimitukseen sisältyvät



dynaaminen satulaistuin ja takastoppari, käsitanko, halutun kokoinen vartalotuki, seisonta- ja laahausjarru, peruutuksenesto, etupyörien saranalukot ja käyttäjän ruumiinpainon mukaiset jouset.

Vartalotuki Meywalk®4-kävelytelinettä varten on saatavissa viidessä koossa:

Ympärysmitta 70 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm ja 130 cm.

Jouset ovat saatavissa seitsemänä eri vaihtoehtona:

- :: Oranssit jouset 10 - 15 kg:n painoille.
- :: Violetit jouset 15 - 20 kg:n painoille.
- :: Valkoiset jouset 20 - 50 kg:n painoille.
- :: Keltaiset jouset 45 - 65 kg:n painoille.
- :: Siniset jouset 65 - 80 kg:n painoille.
- :: Punaiset jouset 80 - 100 kg:n painoille.
- :: Hopeanväriset jouset 100 - 130 kg:n painoille.

Meywalk®4


mahdollistaa

käyttäjän

osallistumisen

jokapäiväisiin

toimintoihin

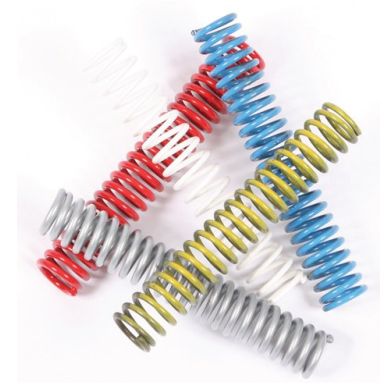

Oikea sopivuus

Laaja lisävarusteiden valikoima on saatavissa Meywalk®4-kävelytelineeseen. Lisävarusteiden avulla kävelyteline saadaan entistäkin soveltuvammaksi käyttäjän tarpeisiin:

- :: **Vartalotyyny**
- :: **Lannetyyny vartalotyynyllä**
- :: **Jalkojenerotin**
- :: **Jalkaohjaimet**
- :: **Pieni kääntötanko Medium-koolle**
- :: **Kippieste**

