

***Raizer on todella hyvä  
apuväline arjessa.***

- Sairaanhoitaja, Heidi Aagaard



**RAIZER®**

by Liftup

Raizer on siirrettävä nostotuoli, jonka avulla makaavan ihmisen voi nostaa pystyasentoon muutamassa minuutissa. Avustaja voi käyttää Razeria yksin eikä siinä vaadita fyysistä voimaa.

# Raizer varmistaa vakaan, turvallisen noston




- Käytössä tarvitaan vain yksi ihminen.
- Akkukäyttöinen ja nostaa automaattisesti.
- Varmistaa ergonomisesti oikean noston, mikä ehkäisee selän ja käsien rasittumista.
- Auttaa makuuasennosta lähes pystyasentoon muutamassa minuutissa.



- Varmistaa miellyttävämmän noston.
- Auttaa sinua, joka työskentelet yksin, kun sinun ei tarvitse pyytää apua.
- Voit tarjota nopeasti apua ja siirtyä eteenpäin seuraavaan tehtävään.
- Ergonominen nostin ja nopea apu tilanteessa voi vähentää henkilöstön sairauspäiviä.

# Vähän manuaalista käsittelyä

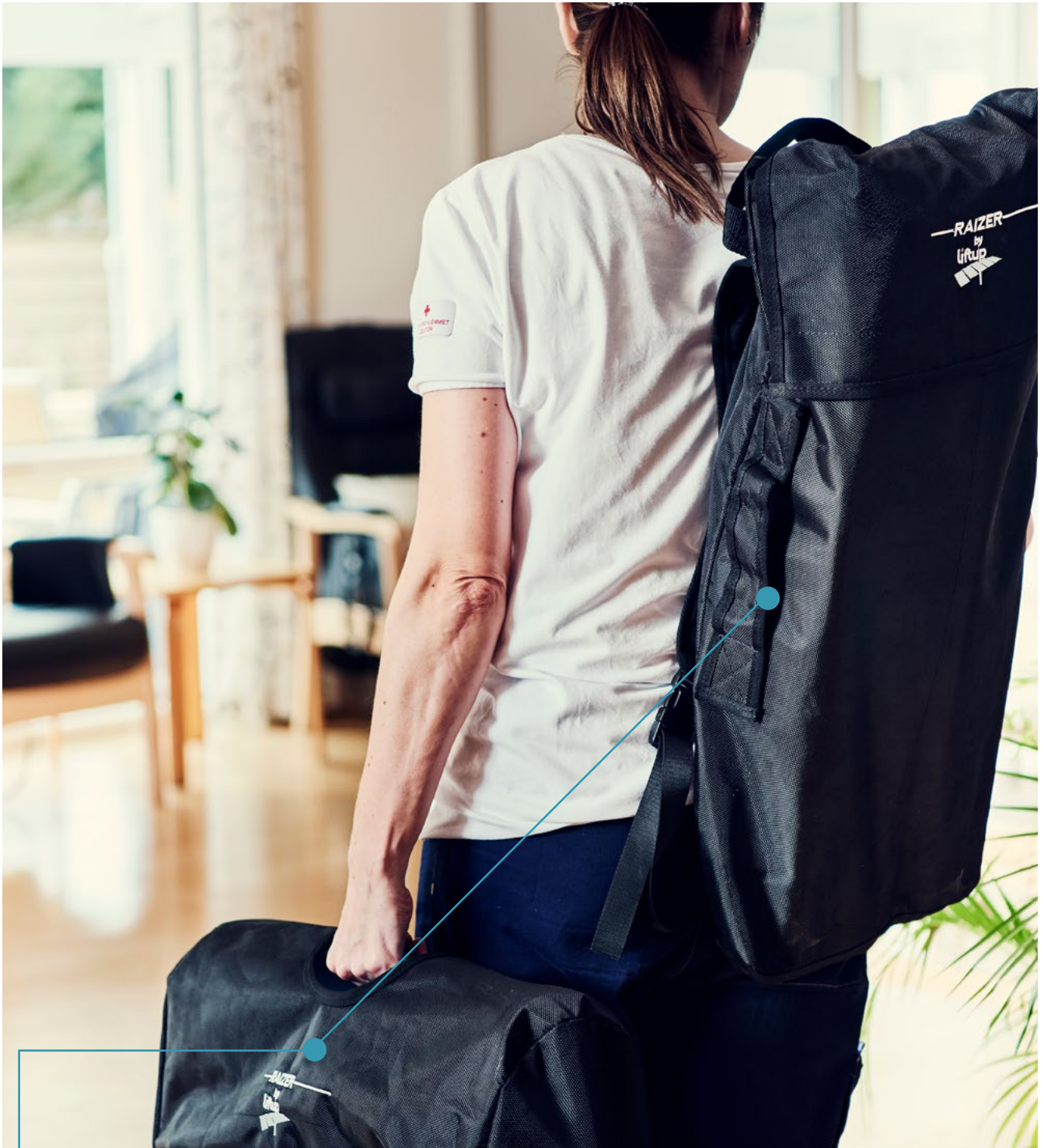

- Kätevä kuljetus kahdessa laukussa tai vetokärryllä.
- Nostaminen Raizerin kanssa vaatii erittäin vähän manuaalista työtä.
- Helppo ja nopea kokoaminen kaatuneen ihmisen ympärille (3 min.).
- Helppokäyttöinen ahtaissa paikoissa.
- Raizer vaatii vain vähän koulutusta ja on siten helposti uuden henkilöstön käytettävissä.
- Sopii hyvin fysioterapiaan, esimerkiksi nostettaessa lattialle tai lattialta terapiassa tai harjoitustilanteissa.
- Helppo desinfiointi ja puhdistus.
- Pakkaaminen sujuu nopeasti ja helposti (2 min.).

# HYVÄ INVESTOINTI, SEKÄ KÄYTÄNNÖLLINEN ETTÄ TALOUDELLINEN

- Raizerin suunnittelussa on käytetty värikoodeja, jotka varmistavat osien nopean kokoamisen ja purkamisen.
- Voidaan hankkia lisävarusteita, kuten vetokärryt (porrasrenkailla), pyöräteline ja kaukoohjain.
- Raizer sopii koonsa ansiosta ihanteellisesti sijoitettavaksi esim. käytävään defibrillaattorin tavoin.
- Voidaan käyttää kaikenlaisilla alustoilla.
- Kestävät materiaalit varmistavat pitkän käyttöiän.
- Hyvä aikaa säästävä investointi.
- Raizeria käyttämällä saadaan aikaan selkeitä säästöjä.
- Ota yhteyttä Algol Trehabin edustajaan, jos haluat lisätietoa tarpeisiinne ja tilanteeseenne liittyen.

1



2



3



4



## Toiminta ja tekniset tiedot

- Nostokapasiteetti: enint. 150 kg.
- Nostoaika: 20–30 s.
- Omapaino: istuin: 9 kg Jalka- ja selkätuki: 4 kg Yhteensä 13 kg.
- Latauslaite (2 kpl): 12 V. 90–264 V, < 20 W ja 12 V autosovitin.
- Nostojen määrä täydellä latauksella: 40 nostoa enimmäiskuormituksella N. 100 nostoa keskimääräisellä kuormituksella.
- Latausaika: enint. 6 tuntia.
- Tyhjän akun lataus: 10–15 min = 1 nosto.
- HMI-nro: 84838.
- CE-merkintä.
- Patentoitu teknologia.
- Rekisteröity design.

# Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille

Liftupin toiminta perustuu arvokkuuden, turvallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen kaikille. Kehitämme apuvälineitä hyvinvointiteknologian alalla. Alan ihmisenä huomaat muun muassa, että Raizer voi saada aikaan vakautta ja turvallisuutta, kun sinun pitää auttaa muita. Se myös auttaa sinua säästämään aikaa, varmistamaan hyvän työasennon ja suojaamaan ylikuormitukselta.

Meillä Liftup A/S:llä toimintamme perustuu aina hyvinvointiteknologian innovaation ja tuotekehitykseen. Liftup perustettiin vuonna 2003, ja se on 100-prosenttisesti yksityinen tanskalaisomisteinen yritys.

Estetiikka, design ja turvallisuus ovat ratkaisevia kaikessa, koska toimimme hyvinvointiteknologian parissa. Kehitämme arvokkaita apuvälineitä, emme koneita.

## Ota yhteyttä

ALGOL-TREHAB OY  
PL 13 (Karapellontie 6), 02611 Espoo  
Puhelin: (09) 5099 331  
Sähköposti: [algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)  
Internet: [www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)

