

# Molift® Quick Raiser 1

## Seisomanojanostin

Molift Quick Raiser 1 on pieni helppokäyttöinen pyörällinen nostin siirtymiseen ja seisomisen harjoittamiseen.

Nostin on suunniteltu avustamaan juuri sellaisia käyttäjiä, joille seisominen on vaikeaa, mutta jotka pystyvät itse osallistumaan siirtymistapahtumaan. Nostinta on helppo liikuttaa ja käsitellä ahtaissakin tiloissa. Molift Quick Raiser 1 sopii niin koti- kuin laitospöytäönkin.

**molift**  
a part of Etac



### TEKNISET TIEDOT

Valmistusmateriaali	tukivarsi alumiinia runko ja nostovarsi terästä
Moottori	12 V DC
Akku	14,4 NiMH – 2,6 Ah, Molift Power pac -järjestelmä
Käyttäjän maksimipaino	160 kg
Nostonopeus	50-60 mm/s normaali-nopeudella täysillä akuilla
Pyörät	• 4 kpl (tuplapyöriä) 50 mm polyuretaania • 2 kpl 100 mm kumia • 2 kpl (tuplapyöriä) kumia, jarruilla
Jalkojen korkeus	70 mm
Leveys	610 mm
Pituus	1070 mm
Korkeus	1280 mm
Paino	30 kg (akun kanssa)

### TUOTE

ETACM 04100 Molift Quick Raiser 1

### TUOTENUMERO

EM04100

### MOLIFT QUICK RAISER 1 OMINAISUUKSIA

- Ainutlaatuinen järjestelmä nostaa henkilön eteen ja ylös mukailleen näin kehon normaalia liikemallia Soveltuu erinomaisesti nopeisiin siirtymisiin.
- Helppo purkaa ja koota ilman työkaluja.
- Kevyt (painavin osa n. 15 kg).
- Säädettävät polvityyny ohjaavat asentoa ja tukevat jalat paikoilleen.
- Laitte on tukeva ja vakaa.
- Laitteen jalusta on matala ja muotoiltu kapeaksi siten, että sen avulla pääsee lähelle pyörätuolia/wc-istuinta jne.
- Häätä-lasku ja häätä-seis -toiminnot.
- Varoitusvalo ilmoittaa akun loppumisesta.




NOSTOLIINAT	
Tuotenumero	Nostoliina/koko
1720710	Rgo StandUp / XS
1720720	Rgo StandUp / S
1720730	Rgo StandUp / M
1720740	Rgo StandUp / L
1720750	Rgo StandUp / XL

## PUHDISTAMINEN JA HUOLTO

Nostimen kaikki ulkoiset pinnat voidaan puhdistaa yleisimmillä puhdistusaineilla, saippuvedellä tai sairaalassa desinfiointiaineilla. Hankaavien aineiden käyttöä tulee välttää. Rgo StandUp -nostoliinat voidaan pestä 60-85 °C lämpötilassa. Säännölliseen huoltoon löydät ohjeet laitteen ja liinon mukana toimitettavasta valmistajan käyttöohjeesta.

## LISÄVARUSTEET

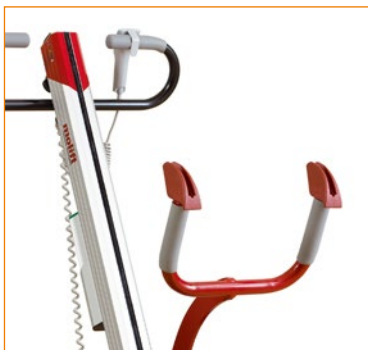

0458010 U-mallinen nostovarsi.



0451000 Säädettävä jalkatuki (pienikokoiset käyttäjät maks. 75 kg).



0452100/200/300 Sandaalit tukemaan jalkaterät paikalleen (koot S-L).

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.