


Dix-istuintyyny

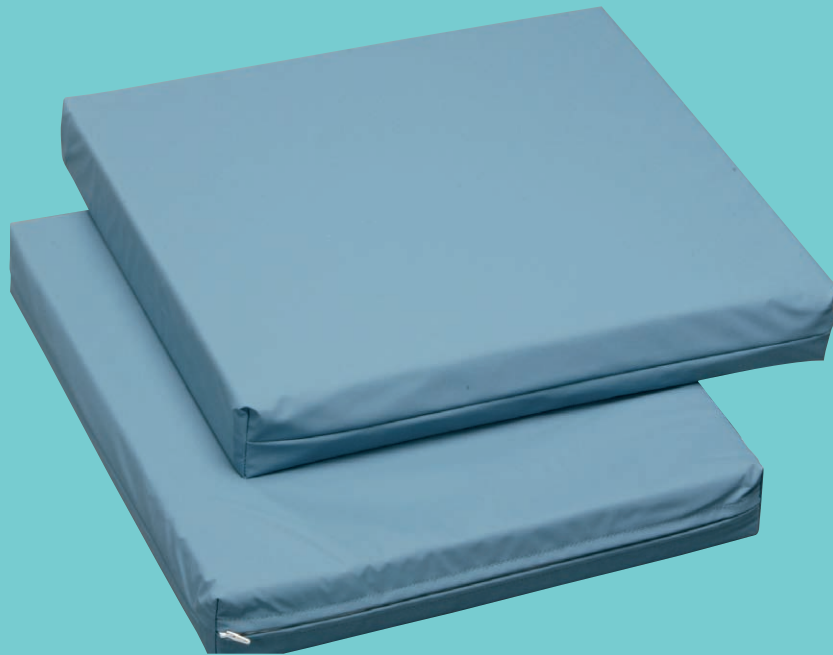

Istuintyynyssä yhdistyvät hygieenisuus, tukevuus ja antidecubitus-ominaisuudet.

Dix-istuintyyny jakaa istujan painon mahdollisimman suurelle alueelle ja ehkäisee näin pistekohtaista painetta ja parantaa verenkiertoa. Istuintyyny muotoutuu kehon lämmön ja painon vaikutuksesta istujan mukaan.

Matalan- ja keskiriskin istuintyyny on suunniteltu tukemaan asentoa erilaisissa istuimissa, mm. pyörätuoleissa.

Istuintyynyjä on useita erikokoisia käyttötarkoituksen mukaan. Liukumattoman pintakankaan vuoksi tyyny pysyy erityisen hyvin paikallaan istuimessa. Eritteitä läpäisemätön ja joustava hygieniapäällinen on irrotettavissa pesua varten.

Kotimaista laatua yhdistettynä potilasturvallisuuteen.

ERITYISOMINAISUUDET

- Viskoelastinen vaahtomuovi antaa hyvät antidecubitus-ominaisuudet
- Liukumattoman pinnan ansiosta tyyny pysyy hyvin paikoillaan eri alustoilla
- Estää tyynyä käyttävää henkilöä liukumasta pois paikaltaan
- Eritteitä läpäisemätön, hiostamaton ja hengittävä kangas
- Reagoi kehon lämpöön ja painoon
- Helpottaa istuinalueen verenkiertoa
- Sopii koti- ja laitospäyttöön

HYGIENIAPÄÄLLINEN

Hygieniapäällinen on valmistettu ihoystävällisestä kankaasta, jossa on antibakteerisia ainesosia. Vetoketjua peittää tippasuojia.

DIX-ISTUINTYNNY

- Tukeva, pehmentävä ja hoitava istuintyyny
- Rakenne: puristevaakto 2 cm + viskoelastinen vaahtomuovi 4 cm sopii erityisesti pyörätuoleihin, joissa istuinosa on kangasverhoiltu

KOOT, DIX-ISTUINTYNNY INKONTINENSSIPÄÄLLISELLÄ

Mediqn tuotenumero	Koko (leveys x syvyys x paksuus)
1005042	37 x 40 x 6 cm
1004884	37 x 43 x 6 cm
1005041	37 x 45 x 6 cm
1004885	39 x 40 x 6 cm
1004887	39 x 43 x 6 cm
1005040	39 x 45 x 6 cm
1004886	42 x 43 x 6 cm
1004815	45 x 43 x 6 cm
1004816	45 x 46 x 6 cm
1004817	47 x 43 x 6 cm
1004818	49 x 43 x 6 cm
1006725	49 x 46 x 6 cm
1004819	52 x 43 x 6 cm
1004822	52 x 46 x 6 cm
1007258	55 x 45 x 6 cm
1009545	57 x 43 x 6 cm
1004823	57 x 46 x 6 cm

HOITO-OHJEET

- Pintapyyhintä tarvittaessa neutraaleilla tai antiseptisilla puhdistusaineilla
- Tyynyn sisustaa ei suositella pestäväksi
- Päällinen irrotetaan pesua varten
- Päällinen kestää hyvin konepesua max 75 °C
- Ei linkousta
- Riippukuivatus
- Eritetahradesinfektio:
 - Klooriliuos 500-2000 ppm (max 5000 ppm)
 - Etanolipohjaiset desinfektioaineet
 - Kvaternääriset ammoniumyhdisteet (2 %)
 - Lämpödesinfektio max 85 °C
- Duqem-istuintyynyn kanssa on käytettävä aina hygieniapäällistä

PALOTURVALLISUUS

- SFS-EN 1021:2006

TAKUU

- 2 vuotta



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Riihitontuntie 7 D, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi/apuvaline