



Etac Cross 5 XL

Istumisen mukavuutta ja
kelaamisen keveyttä

**etac**[®]
Creating Possibilities



Etac Cross 5 XL

Aina 160 kg:n asti.

Paras istuma-asento ja kelattavuus

Riittävä istuinleveys yhdistettynä ainutlaatuisiin 3A-selkätuen säätöihin tarjoaa kookkaan käyttäjän keholle riittävästi tilaa.

Tehokas ja elegantti

Cross 5XL -pyörätuolissa on samat ominaisuudet istuinmukavuudeltaan ja liikkuvuudeltaan kuin Cross 5 -mallissa. Monipuolisesti säädettävä 3A-selkätuki voidaan säätää siten, että taakse saadaan lisätilaa samalla mahdollistaen vartalon riittävä tuenta ja tasapaino. Lopullinen muoto hienosäädetään tarranauhojen avulla. Cross 5 XL -pyörätuoli reagoi nopeasti kelaamiseen ja kääntämiseen.



Ominaisuudet



3A-selkätuki

Kulman, korkeuden ja muodon säätöjen yhdistelmä luo parhaat olosuhteet vartalon tuelle ja vakaudelle. Saatavana tavallisena ja korkeana versiona. Helppo säätää.



Kaksoisristikkorunko

Cross 5 -pyörätuolissa on erittäin luja poikittain taittuva rakenne, jonka vakaus on jäykän rungon luokkaa ja se takaa pitkän käyttöiän ja parhaat kelausominaisuudet.



36 + 2 kuljetuspyöräasentoa

Kuljetuspyörät voidaan asettaa neljään eri asentoon kussakin reiässä. Kun säätömahdollisuuksia on enemmän sekä vaaka- että pystysuunnassa, saavutetaan istuimen täydellinen korkeus ja tasapaino.



Erittäin matala istuinkorkeus

Asettamalla yläreikin 20" kuljetuspyörä, istuinkorkeudeksi saadaan 34 cm (13½").



Cross 5 XL -pyörätuolilla on samat ominaisuudet ja toiminnot kuin Cross 5 -mallilla. Vaativampia käyttöoloja varten selkätuki on varustettu taittavalla poikittaistangolla ja vahvistetuilla etuhaarukoilla.

Cross 5 XL / malli	Tuotenro	Kok.leveys	Istuinsyvyys selkätuen putkesta*	Paino (sis. kulj.pyörät)
47,5 cm lyhyt	13123111	68,5 cm	36-49 cm	15,9 kg
47,5 cm pitkä	13123112	68,5 cm	42-55 cm	16,1 kg
50 cm lyhyt	13123113	71 cm	36-49 cm	16 kg
50 cm pitkä	13123114	71 cm	42-55 cm	16,2 kg
52,5 cm lyhyt	13123115	73,5 cm	36-49 cm	16,1 kg
52,5 cm pitkä	13123116	73,5 cm	42-55 cm	16,3 kg
55 cm lyhyt	13123117	76 cm	36-49 cm	16,3 kg
55 cm pitkä	13123118	76 cm	42-55 cm	16,5 kg
57,5 cm lyhyt	13123119	78,5 cm	36-49 cm	16,4 kg
57,5 cm pitkä	13123120	78,5 cm	42-55 cm	16,6 kg
60 cm lyhyt	13123121	81cm	36-49 cm	16,5 kg
60 cm pitkä	13123122	81 cm	42-55 cm	16,7 kg

* 3A-selkätuella.

Paino ja mitat koskevat tuolia, jossa on 24" kuljetuspyörät pikalukituksella, massiiviset renkaat, kelausvanteet ruostumattomasta teräksestä, poikittaistanko, jalkatuet, jalkalaudat, kantahihnat, jarrut, käsituet, 6½" tukipyörät medium-haarukoilla. Mitat voivat vaihdella ± 2%.

Etuosan istuinkorkeus

34-56,5 cm

Takaosan istuinkorkeus

34-53 cm

Selkätuen korkeus

32-45 cm tavallisella selkätuella 3A.

Selkätuki 3A korkea

38-51 cm

3A-selkätuen kallistuskulman säätö

-5 - +20°

3A-selkätuen ristiselän kallistuskulma

-8 - +18°

Leveys kokoontaitettuna

32 cm

Kokonaiskorkeus

74-128 cm

Kokonaispituus

102-122 cm

Pituus taitettuna

76-92 cm

Jalkatuen pituus

26-64 cm

Jalkatuen kulma

108°-114°

Kuljetuspyörän läpimitta

46,5-48,5 cm

Käyttäjän enimmäispaino

160 kg

Runkomateriaali

Alumiinia

Lisävarusteet



Päätuki, plyysikangas

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.



Päätuki, hygieniapäällinen

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.



Päätuki sivutuen kanssa

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.



Päätuen kiinnitystanko

Tanko on helposti avattavissa pikalukolla.



Muotoiltava selkätuki

Kuusi tarranauhaa, ylin leveämpi ja tiukempi.



3A-selkätuki

Korkeus 38–51 cm (15"–20").
Lantion ja ristiselän kulman säädöt.



Päällinen

Pehmeä elastinen päällinen.
Tummanharmaa plyysikangas.



Comfort-päällinen

Päällinen on pehmustettu.
Tummanharmaa plyysikangas.



Siisti hygieniapäällinen

Hygieniapäällinen 3A-selkätuelle.
Materiaali: Dartex. Vettä hylkivä, voidaan pyyhkiä märällä liinalla, pesulämpötila 90 °C. Voidaan toimittaa yksilöllisen pehmusteen kanssa.



Työntökaari

Korkeussäädettävä ja irrotettava.



Työntökahva

Korkeussäädettävä ja irrotettava.



Kiinteä työntökahva



Poikittaistanko taakse

Vakauttava poikittaistanko. Kiinnitetään 3A-selkätukeen. Taitettavissa pikalukon kanssa.



Selkätukikiila, pitkä

30 cm (12") pitkä. Pehmeä kiila, joka kiinnitetään tarralla päällisen alle. Käytetään yhdessä suoran tai levenevän sivupysäyttimen kanssa.
Verhoilu: tummanharmaa plyysikangas.
Myydään yksittäiskappaleina.



Lisävarusteet




Selkätukihiila, lyhyt

15 cm (6") pitkä. Pehmeä kiila, joka kiinnitetään tarralla päällisen alle. Käytetään yhdessä suoran tai levenevän sivupysäyttimen kanssa. Verhoilu: tummanharmaa plyysikangas. Myydään yksittäiskappaleina.



Sivutyyny

Kaarevan mallinen tuki. Käännä tukea valitaksesi kahdesta eri muodosta. Selkätuen ja/tai suoran sivupysäyttimen tukema. Myydään yksittäiskappaleina.

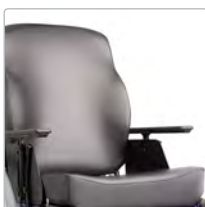


ECS-istuin ja selkätukijärjestelmä

Erillinen istuin ja selkänojajärjestelmä eri päällisten ja pehmustusten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa etac.com.




Sivupysäytin, suora

Käytetään yhdessä kiilan tai sivutyynyn kanssa. Korkeutta voi säätää. Myydään yksittäiskappaleina.

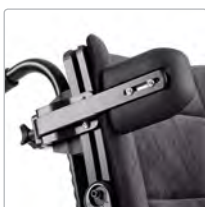


Vartalotuki, säädettävä

Korkeus- ja syvyyssäädettävä. Vartalotuen pehmustetyynyä pitävää tankoa on saatavilla neljä eri versiota. Tämä mahdollistaa hyvän istuvuuden ja käden vapaan liikkuvuuden. Irrotettavissa ilman työkaluja. Myydään yksittäiskappaleina.

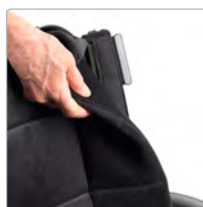

Sivupysäytin, leventävä 1,5 cm (½")

Leventää 1,5 cm (½") sivua kohden. Käytetään yhdessä kiilojen kanssa. Myydään yksittäiskappaleina.

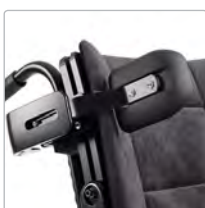

Vartalotuki, sivulle käännettävä

Korkeus- ja syvyyssäädettävä. Taakse asennetun saranan ansiosta ei ristiriitaa käsitukien kanssa. Vartalotuen pehmustetyynyä pitävää tankoa on saatavilla kolme eri versiota. Tämä mahdollistaa hyvän istuvuuden ja käden vapaan liikkuvuuden. Myydään yksittäiskappaleina.



Sivupysäytin, leventävä 3 cm (1")

Leventää 3 cm (1") sivua kohden. Käytetään yhdessä kiilojen ja suuremman päällisen kanssa. Myydään yksittäiskappaleina.



Tukikiilat, malli 1 (pieni)

Vaahtomuovi tarrakiinnityksellä. Pituus: 13 cm (5")
Leveys: 9,5 cm (4")
Korkeus: 2 cm (¾")
Myydään pareittain.



Käsituki, nihkeä pinta

Irrotettava ja korkeussäädettävä käsituki. Umpinaisen, nihkeän pehmusteen pituudet 25 tai 38 cm. Säädetään joko kuusiokoloavaimella tai sormiruuvilla.




Tukikiilat, malli 2 (keskikoko)

Vaahtomuovi tarrakiinnityksellä. Pituus: 19 cm (7½")
Leveys: 12 cm (5")
Korkeus: 2 cm (¾")
Myydään pareittain.



Käsituen pehmuste

Pehmuste on vaahtomuovia tai geeliä. Irrotettava ja pestävä. Saatavana 2 eri pituutta: 25 cm tai 38 cm. Päällinen tummanharmaata plyysiä tai mustaa Dartexia.

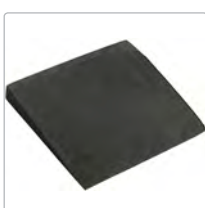

Tukikiilat, malli 3 (suuri)

Vaahtomuovi tarrakiinnityksellä. Pituus: 20 cm (8")
Leveys: 17 cm (6½")
Korkeus: 2,5 cm (1")
Myydään pareittain.



Käsituki

Irrotettava ja korkeussäädettävä käsituki. Käsituen pehmuste on vaihdettavissa. Pehmusteen pituudet 25 cm ja 35 cm. Korkeus säädetään joko kuusiokoloavaimella tai sormiruuvilla.



Käsituki, leveä ja pehmeä

Kiinnitetään valmiiksi asennettuun käsitukeen. Koko 8 x 40 cm. Sopii sekä lyhyeen että pitkään käsitukeen ja oikealle tai vasemmalle puolelle.



Käsituen pehmuste, hemi

Kiinnitetään pitkään 35 cm käsitukeen. Irrotettava ja pestävä päällinen. Tummanharmaa plyysi.



Sivusuoja

Korkeussäädettävä ja irrotettava malli.



Reisituki

Kiinnitetään valmiiksi asennettuun käsitukeen. Saatavana lyhyt (50 cm) tai pitkä (57 cm) malli.



Reisituen pehmuste

Solumuovipehmuste, joka kiinnitetään reisitukeen liimapintaisilla tarroilla.



Vaatesuoja

Korkeus-, syvyys- ja kulmasäädettävissä. Materiaali hiilikuitua.



Jalkatuki, vakiomalli

Musta. Irrotettava ja sivulle käännettävä. Saatavana myös lukituksella.



Jalkatuki, kapea

Tuo jalkalaudan 5 cm (2") lähemmäksi runkoa. Voidaan käyttää 4" tai 5" tukipyörien kanssa. Saatavilla myös lyhyenä versiona ja lukituksella.



Vaakatasoon säädettävä jalkatuki pohjetuella

Taittuvan pohjetuen kanssa säädettävissä kahteen eri korkeuteen jalkatukiputkella. Sopii oikealle ja vasemmalle puolelle.



Pohjetuen päällinen

Vaakatasoon säädettävää jalkatukea varten. Tummanharmaa plyysi tai musta Dartex-kangas.



Jalkalauta

Säädettävä syvyys ja kulma. Säädettävä korkeus. Toimitetaan vakiomallisen kiinnityspotken kanssa. Saatavana myös lyhyen ja pitkän kiinnityspotken kanssa.



Jalkalaudan pehmuste

Tuo lisämukavuutta, plyysi.



Yhtenäinen jalkalauta

Sivulle taitettava, korkeus- ja kulmasäädettävä jalkalauta.



Yhtenäisen jalkalaudan pehmuste

Tuo lisämukavuutta. Plyysiä.



Lisävarusteet



Yhtenäinen jalkalauta lapsille

Säädettävä korkeus, syvyys ja kulma. Saatavilla istuinleveyksillä 35 ja 37,5 cm (13¾" ja 14¾"). Irrotettava.



Jalkalaudan jatkopala

Pidentää jalkalaudan syvyyttä. Kiinnitetään alkuperäiseen jalkalautaan.



Pohjeremmi

Irrotettava ja säädettävä korkeuden suhteen.



Pohjeremmin pehmuste

Tarjoaa pehmeämmän tuen. Saatavana pituuksina 20 cm (7¾"), 30 cm (11¾") ja 40 cm (15¾").



Pehmustettu pohjetuki

Pehmeää ja lämmintä mukavuutta, tarranauhasäättö. Kiinnitys kiinteään tai nostavaan jalkatukeen.



Kantapäähihna

Pituus säädettävissä. Ei voida yhdistää jatkettuun jalkalautaan.




Amputaatiojalkatuki

Säädettävissä korkeuden, syvyyden ja kulman suhteen sekä sivusuunnassa. Sopii sekä oikealle että vasemmalle puolelle. Verhoilu: Tummanharmaa plyysi tai harmaa hygieniakangas.




Amputaatiopaino

Ehkäisee kaatumisriskiä alaraaja-amputoiduilla käyttäjillä ja parantaa kelausominaisuuksia. Irrottavissa, säädettävä kulma. Voidaan yhdistää amputaatiotukeen. Paino: 3 kg (6,6 lbs).

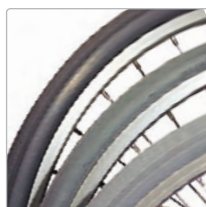


Kuljetuspyörät

20", 22" tai 24" sekä kevyt 24" kuljetuspyörä. Umpi- tai ilmakumiset renkaat. Kevyissä pyörissä on ilmakumiset korkeapainesisärenkaat.

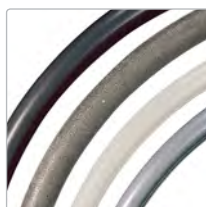

Kelausvanteet

Valittavissa muovipinnoite, vaahtokumi, alumiini, titaani ja ruostumaton teräs.

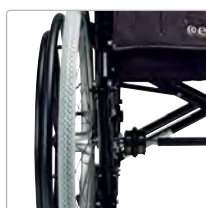

Yhden käden kelaus

Sopii tuolin sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Ei voida yhdistää avustajan jarruun.



Tukipyörät

4", 5", 6", 6,5", 7" tai 8".



Camber-kulma

Vakio 2°, valinnainen 0°.



Pinnasuojat

Saatavana harmaa tai keltainen painatus.



Kulmakahvajarru

Tarjoaa enemmän tartuntapintaa.
Väri: Musta



Kulmakahvajarru

Tarjoaa enemmän tartuntapintaa.
Väri: Punainen



Pidennetty jarrukahva

Jarruvipua voidaan kallistaa eteenpäin sivuttain siirtymisen helpottamiseksi.



Yhden käden jarru

Oikea- tai vasenkätinen. Voidaan yhdistää rumpujarrulliseen pyörään.



Avustajan jarrut, vaihtoehto 1

Pienempi tartuntaote pienikätisille avustajille. Työntökahvan ja jarruvivun etäisyys 7,5 cm (3").



Avustajan jarrut, vaihtoehto 2

Työntökahvan ja jarruvivun etäisyys 10 cm (3¾").




Istuinlevy

Irrotettava. Lisävarusteena saatavana sopiva istuintyyny. Matala kiinnitys.




Istuinlevy, korkea kiinnityssarja

Lisävarustesarja istuinlevyn kiinnittämiseksi samalle korkeudelle kuin istuinputket.

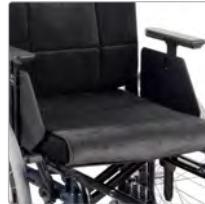


Istuintyyny

Anatomisesti muotoiltu istuintyyny. 52 cm pitkä (20,5"). Leikattavissa haluttuun istuinsyvyyteen. Verhoilu: tummanharmaa plyysikangas.

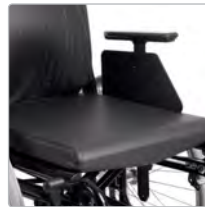

Istuintyyny hygieniapäällisellä

Vettä hylkivä, voidaan pyyhkiä kostealla liinalla, pesulämpötila 90 °C. Pituus 46 cm (18") (leveys 35–40 cm (13¾"–15¾")), pituus 50 cm (19¾") leveys 42,5–60 cm (16¾"–23¾").

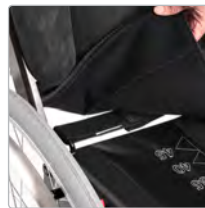


Istuimen jatko-osa

Kiinnitetty istuimeen tarralla. Lisää istuimen syvyyttä 7 cm (2¾").



Kaatumiseste, teleskooppimalli

Taitettava, säädettävä korkeus, syvyys ja kulma. Sopii kaikkiin korkeuksiin.

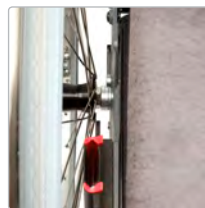

Istuimen levityssarja

Lisää käsitukien välistä etäisyyttä 1 cm (½"). Kokonaisleveys kasvaa myös 1 cm (½").



Levennetty etuhaarukan kiinnitys

Siirtää tukipyörää 3 cm (1¼") ulospäin. Tuolin kokonaisleveys ei muutu.



Levennetty etuhaarukan kiinnitys, lyhyt

4" ja 5" tukipyörälle. Erityisen alhaisiin istuinkorkeuksiin.



Lannevyö

Pikalukolla, pituus säädettävissä. Rungossa kaksi vaihtoehtoista kiinnityspistettä.



Pöytälevy

Läpinäkyvä. Sopii pitkiin käsituikiin.



Kepin pidike

Kaksiosainen; kuppi kiinnitetään yhden polkaisuputken sisäpuolelle ja elastinen hihna kiinnitetään kepin ympärille.



Pieni pöytälevy, taitettava

Syvyyttä ja leveyttä voidaan säätää. Taittuu sivuttaisiin. Kiinnitetään käsitukien pidikkeisiin. Korkeutta säädetään käsituen säädöistä.



IV-teline

Mukana toimitetaan kiinnitykset.



Kiinnitys turvavaljaille

Asennetaan päätuen tankoon.



Työkalusarja

Sisältää kolme rengasavainta, viisi kuusiokoloavainta, yhden hylsyavaimen ja yhden ristipääruuvimeisselin.

Rungon värit



Musta -01



Tummansininen -93



Valkoinen -92





Pyörätuolin käyttäjän toiminnallisuuden ylläpitäminen, jopa parantaminen, vaatii henkilön kykyjen mukaan optimaalisesti säädettyä pyörätuolia. Etac-pyörätuoleissa oikean muodon ja tuen säätävät kuntoutusammattilaiset käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

Kykyihin perustuvan lähestymistavan ansiosta voimme vahvistaa käyttäjän aktiivisuustasoa.

Olemme antaneet sille nimen Ability Based Seating™.

“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettyt tuotetiedot ovat osoitteessa
www.etac.com