




Seuraava taso

Uusi WC-apuvälineiden sukupolvi,
joka luo uusia mahdollisuuksia

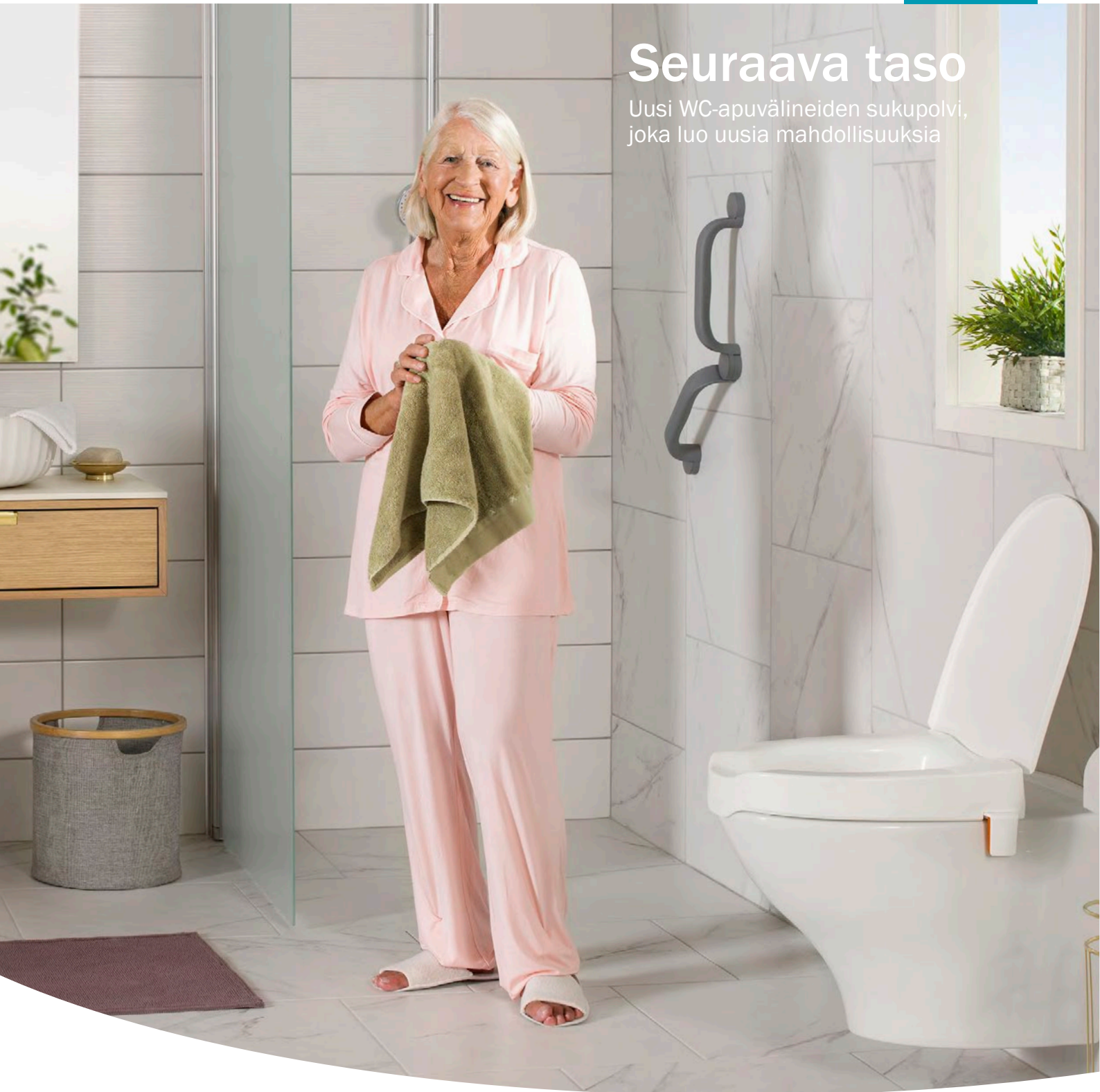

Etac My-Loo

Irrotettava WC-istuimen korotus

etac[®]
Creating Possibilities



Etac My-Loo

Irrotettava WC-istuimen korotus

Olemme yhdessä kokeneiden teollisten suunnittelijoiden kanssa kehittäneet uuden Etac My-Loo irrotettavan WC-istuimen korotuksen. Se on tuote, joka antaa uuden merkityksen käsitteille hygieeni- nen, turvallinen ja miellyttävä. Kaarevien linjojensa ja erinomaisen ergonomiansa ansiosta se tarjoaa ylimääräistä mukavuutta ja muotoilun, joka sopii ihanteellisesti moderniin WC:hen.

Suunniteltu toimivuutta ja mukavuutta silmällä pitäen

Etac My-Loo on suunniteltu sopimaan WC-ympäristöön ja sen design tarjoaa optimaalisen mukavuuden ja helppokäyttöisyyden. Kaarevat linjat ja suuri aukko tekevät My-Loosta sopivan useimmille käyttäjille. WC-korotusta on saatavana kahtena korkeutena kannen kanssa tai ilman.

Helppo pitää puhtaana ja raikkaana

My-Loo WC-istuimen korotuksen osat on tehty kestävästä materiaaleista ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi pehmeällä liinalla. Jos erillinen puhdistus on tarpeen, istuin on helppo irrottaa ja yhtä helppo panna takaisin paikoilleen.

Turvallinen, nopea asennus

Etac My-Loon asentamiseen menee vain muutama sekunti! Se asennetaan paikalleen kahdella erityisesti suunnitellulla reunaesteellä, jotka on helppo sovittaa eri WC-istuinien muotoihin. Reunaesteiden erityisen suuret kitkapinnat ja joustava materiaali mahdollistavat varman kiinnityksen posliiniin.

Aseta korotus WC-istuimeen ja työnnä reunaeste paikalleen. Kun kuulet napsahduksen, asennus on valmis!



Etac My-Loo irrotettava WC-istuimen korotus

	Tuotenro
6 cm	80301520
10 cm	80301521
6 cm kannen kanssa	80301522
10 cm kannen kanssa	80301523

Paino

6 cm: 0,8 kg	10 cm: 1,1 kg
6 cm kannen kanssa: 1,2 kg	10 cm kannen kanssa: 1,4 kg

Suurin käyttäjän paino

190 kg

Materiaali

Polypropyleeni ja TPE

Design

Myra Industriell Design AB

myra

Huolto



Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, 70-prosenttisena desinfiointiaineseoksena. Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesukone-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa 3 minuutin ajan.

Ominaisuudet



Helppo pitää puhtaana ja raikkaana

Siistit, tasaiset pinnat on helppo pyyhkiä puhtaaksi pehmeällä liinalla. Jos erillinen puhdistus on tarpeen, istuin on helppo irrottaa ja yhtä helppo panna takaisin paikalleen.



Suunniteltu toimivuutta ja mukavuutta silmällä pitäen

Istuimen pehmeä muoto antaa turvallisen tuen ja mukavuuden. Erittäin suuri aukko ja syvennys mahdollistavat helpon käytön henkilökohtaisen intiimihygienian hoidon aikana.



Turvallinen, nopea asennus

Helposti kiinnitettävät reunaesteet, joilla on laaja säätö ja suuri kitkapinta, tekevät My-Loosta turvallisen käyttää. Ei työkaluja ja täysin ilman ruuveja.








Vaihtoehdot

My-Loo WC-istuimen korotusta on saatavana kahdella eri korkeudella, 6 ja 10 cm, kannen kanssa tai ilman.



Mitat

Ulkoleveys x -syvyys	36 cm x 40 cm
Aukon leveys x syvyys	23 cm x 36 cm
Istuimen korkeus	6 cm, 10 cm
Reunaesteiden väli	29 cm - 38,5 cm

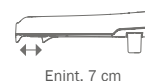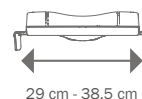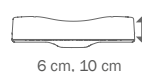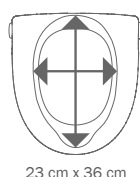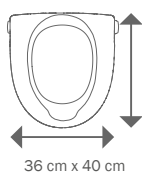



Seuraava taso.

Uusi WC-apuvälineiden sukupolvi, joka luo mahdollisuuksia!

My-Loo irrotettava WC-istuimen korotus on kokonaan uusi älykkäiden tuotteiden sukupolvi Etacilta. Olemme asettaneet suurimmat vaatimukset kaikelle turvallisuudesta, mukavuudesta ja joustavuudesta asennuksen ja puhdistuksen helppouteen ja nyt esittelemme tuotevalikoiman, joka tarjoaa aivan uusia ja ylivoimaisia ratkaisuja.

Tällä valikoimalla WC-apuvälineet siirtyvät uudelle tasolle. "Muotoilu johtaa kehitystä" on aina ollut johtava periaattemme, ja olemme vakuuttuneita siitä, että Etac My-Loo auttaa käyttäjiä ja avustajia luomaan uusia mahdollisuuksia.

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettävät tuotetiedot: www.mediq.fi/apuvaline