



# Etac My-Loo

Kiinteä wc-istuimen korotus

  
Creating Possibilities

## Seuraava taso – uusi wc-apuvälineiden sukupolvi, joka luo mahdollisuuksia



My-Loo kiinteä wc-istuimen korotus on kokonaan uusi älykkäiden tuotteiden sukupolvi Etacilta. Olemme asettaneet suurimmat vaatimukset kaikelle turvallisuudesta, mukavuudesta ja joustavuudesta asennuksen ja puhdistuksen helppouteen ja nyt esittelemme tuotevalikoiman, joka tarjoaa aivan uusia ja ylivoimaisia ratkaisuja.

Tällä valikoimalla wc-apuvälineet siirtyvät uudelle tasolle. ”Muotoilu johtaa kehitystä” on aina ollut johtava periaattemme, ja olemme vakuuttuneita siitä, että Etac My-Loo auttaa käyttäjiä ja avustajia luomaan uusia mahdollisuuksia.



# Patentoitu käsitukiratkaisu

Etac My-Loon innovatiivisessa käsituessa on täysin ainutlaatuinen korkeudensäätömekanismi. Lisäksi käsituet voidaan kätevästi taittaa ylös ja alas ilman puristumisriskiä käyttäjälle. Tämä patentoitu ratkaisu tarjoaa optimaalisen yksilöllisen tuen wc-istuimen ympärillä.



Käsitukien korkeus asetetaan yksinkertaisella manuaalisella säädöllä. Valitse asetus liu'uttamalla oranssi säädin johonkin kolmesta asennosta. Asennot on merkitty käsituessa selvästi numeroilla 1, 2 ja 3.

Käsituet asennetaan ylhäältä – täydellinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin. Käsituet on merkitty L- ja R-kirjaimilla – tarkoitettu käyttäjän vasemmalle ja oikealle puolelle.

Purkamista varten käsituki taitetaan ylös ja vedetään suoraan ylöspäin, jolloin se irtoaa pidikkeestä.

Käsituki voidaan lukita haluttuun asentoon ruuvilla (sisältyy toimitukseen).

Käytettäessä vain yhtä käsitukea, tyhjän kiinnikkeen aukko suojataan kannella (sisältyy toimitukseen).



# Etac My-Loo

Ainutlaatuisen, patentoidun käsitukiratkaisun, hyvin suunnitellun istuimen sekä nopean ja yksinkertaisen asennuksen ansiosta kiinteästi asennettava My-Loo tarjoaa turvallista tukea, täydellistä mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Sopii useimpiin wc-istuimiin ja kiinnittyy tukevasti paikalleen.

## Itsenäisyyttä ja arvokkuutta

My-Loo mahdollistaa liikuntarajotteisten ja tasapaino-ongelmaisten käyttäjien itsenäiset ja turvalliset wc-toiminnot. Wc-istuimen korotus ja vakaat käsituet auttavat alas istuutumista ja seisomaan nousemista. Kaarevat linjat ja suuri aukko helpottavat henkilökohtaista hygieniaa.

## Vaihtoehdot:

Kiinteästi asennettava Etac My-Loo on saatavana käsitukien kanssa istuinkorkeuksilla 2, 6 ja 10 cm tai ilman käsitukia 6 ja 10 cm (käsituet voidaan tarvittaessa lisätä jälkikäteen).



### Etac My-Loo kiinteä wc-istuimen korotus

Etac My-Loo kiinteä wc-istuimen korotus	Tuotenro.
My-Loo kiinteä käsituet 2 cm	80301510
My-Loo kiinteä käsituet 6 cm	80301511
My-Loo kiinteä käsituet 10 cm	80301512
My-Loo kiinteä 6 cm	80301513
My-Loo kiinteä 10 cm	80301514

### Paino

My-Loo käsituilla 2 cm: 3,2 kg	My-Loo kiinteä 6 cm: 2,2 kg
My-Loo käsituilla 6 cm: 3,4 kg	My-Loo kiinteä 10 cm: 2,4 kg
My-Loo käsituilla 10 cm: 3,7 kg	

### Suurin käyttäjän paino

150 kg  
Yhdessä tukijalka-lisävarustesetin kanssa, 80301603: 200 kg

### Materiaali

Käsituki: Polypropyleeni  
Istuin/kansi: Polypropyleeni  
Kiinnike: Ruostumaton teräs, polypropeeni, TPE

### Design

Myra Industriell Design AB

### Huolto



Puhdista/desinfioi tuote käyttämällä tavallista hankaamatonta puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineseoksella. Tuotetta voidaan turvallisesti käsitellä suljetussa pesukone-desinfiointilaitteessa 85 °C:n lämpötilassa kolmen minuutin ajan.

## Ominaisuudet



### Säädettävät käsituet

Ainutlaatuisella patentoidulla ratkaisulla käsituot voidaan nopeasti ja helposti mukauttaa tarpeen mukaan. Valitse paras tuki kolmesta eri korkeudesta. Vakaat käsituot voidaan kätevästi taittaa ylös ja alas ilman puristumisriskiä käyttäjälle.



### Yksinkertainen ja kätevä asennus

Etac My-Loo asennetaan nopeasti ja helposti innovatiivisen uuden ratkaisun avulla. Käytännölliset, nopeat mutterit mahdollistavat wc-korotuksen kiinnittämisen ylhäältä käsin. Istuin ja käsituot voidaan vain napsauttaa helposti kiinnikkeisiinsä.



### Tilava ja käytännöllinen

Kaarevat linjat ja erittäin suuri istuinaukko tarjoavat erinomaisen käytettävyyden. Wc-istuimen korotuksen muotoilu, jossa on vapaata tilaa istuimen ympärillä, antaa runsaasti tilaa kaikille vartalomuodoille.



### Vakaa

Kiinteä My-Loo istuu tukevasti paikallaan ja käyttäjän maksimipaino on 150 kg. Lisätukea ja suurempaa painokapasiteettia varten voidaan lisätä lisävarusteena tukijalat (käyttäjän maksimipaino 200 kg).



### Turvallinen ja mukava

Vakaiden käsitukien, joista saa helposti otteen ja optimaalisesti suunnitellun istuimen ansiosta My-Loo tekee wc-käynneistä turvallisia ja miellyttäviä. Mukavuutta voidaan halutessa lisätä istuinpehmusteella.



### Helppo puhdistaa

Siistit, tasaiset pinnat on helppo pyyhkiä puhtaaksi pehmeällä liinalla. Jos erillinen puhdistus on tarpeen, istuin ja käsituot on helppo irrottaa kiinnikkeistään ja yhtä helppo laittaa takaisin paikalleen.



My-Loo käsituilla  
2 cm



My-Loo käsituilla  
6 cm



My-Loo käsituilla  
10 cm




My-Loo  
6 cm



My-Loo  
10 cm

## Mitat

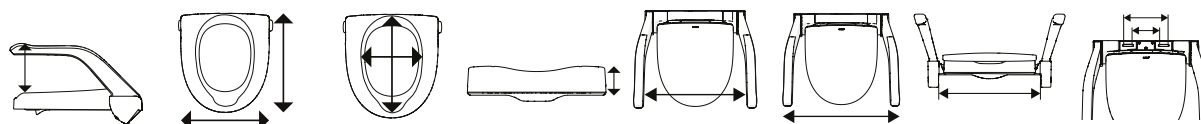

Malli	Käsituon korkeudet	Leveys/pituus	Sisämitat	Korkeus	Käsitukien välinen leveys	Kokonaisleveys	Kiinnikkeen leveys (wc-istuimen enimmäisleveys)	Reikien väliset mitat
80301510	215/245/285 mm	360/400 mm	215/285 mm	20 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301511	175/205/245 mm	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301512	135/165/205 mm	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	480 mm	570 mm	400 mm	c/c 123-203 mm
80301513	-	360/400 mm	230/360 mm	60 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm
80301514	-	360/400 mm	230/360 mm	100 mm	-	-	400 mm	c/c 123-203 mm

## My-Loo 2 cm – toimiva wc-istuimen käsituki

My-Loo 2 cm on täydellinen käsitukiratkaisu wc:n ympärille, jos haluat välttää poraamista seiniin tai lattiaan. Tuote koostuu käsituista ja wc-korotuksesta, jotka on asennettu suoraan wc-istuimeen. Kuten muissakin versioissa, malleissa, joissa on korotettu istuin, käsituet voidaan asettaa kolmeen eri korkeuteen eri käyttäjien tarpeisiin. Modernin ja huomaamattoman designin ansiosta My-Loo sulautuu kauniisti useimpiin kylpyhuoneympäristöihin.



*Etac My-Loo toimitetaan helposti käsiteltävässä pahvilaatikossa.*

## Lisävarusteet



### Istuinpehmuste

80301604  
Ergonomisesti muotoiltu, pehmeä ja mukava. Tarjoaa erinomaisen paineenpoiston ja mukavan tuen.  
Materiaali: Polyuretaani



### Ylhäältä asennettava ruuvisarja

80301626  
Wc-istuimeen, jossa ei ole kiinnitysreikiä. Käytetään vain tukijalkojen kanssa. Sopii asennettavaksi kiinnitysreikiin Ø20 mm. Materiaali: Alumiini, polyamidi, ruostumaton teräs, EPDM



### Tukijalat

80301603  
Lisävakauden antamiseksi. Sallii käyttäjän 200 kg:n maksimipainon. Taitettava.  
Materiaali: Alumiini, polyamidi, polypropyleeni, TPE, ruostumaton teräs



### Wc-paperin pidike

80301601  
Kiinnitetään käsitukeen.  
Materiaali: Polyamidi, ruostumaton teräs



### Säilytyskori

80301602  
Kiinnitetään käsitukeen.  
Materiaali: Polyamidi, polyesteri/verkko, ruostumaton teräs



### Poikittaistanko

80303034  
Turvallinen tuki. Kiinnitetään käsitukeen. 60,5 cm  
Materiaali: Alumiini, polyeteeni.



### Käsituet

80301606  
Myydään pareittain.  
Materiaali: Polypropeeni







”Jokaisella on oikeus elää vapaata, itsenäistä elämää ja toteuttaa unelmiaan fyysisistä olosuhteista huolimatta.”

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettävät tuotetiedot ovat osoitteessa [www.etac.com](http://www.etac.com)

 **ALGOL**  
TREHAB

Maahantuonti ja myynti:  
Algol Trehab Oy  
Karapellontie 6 | 02610 Espoo  
Puh. (09) 5099 331  
[algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi) | [www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities