



# Molift

Henkilönostimet ja nostoliinat  
Siirtoratkaisut

***molift***<sup>®</sup>  
a part of Etac

# Molift-tuotteet on suunniteltu elämää varten

Molift-tuotteet on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille parempaa elämänlaatua ja samanaikaisesti hoitajille parasta tukea ja optimaaliset työolosuhteet. Tavoitteemme on luoda ratkaisuja, jotka parantavat käyttäjien jokapäiväistä elämänlaatua ja tarjoavat hoitajille turvallisemman työympäristön, jossa he voivat keskittää enemmän aikaansa ja energiaansa hoidettaviin.

## Paras luokassaan - pitkäaikaista kestävyttä

Molift-tuotteet antavat liikuntarajoitteisille mahdollisuuden täyteen elämään - koulussa käyntiin, työelämään ja matkailuun - paremman elämän turvallisten, tehokkaiden ja mukavien siirtoratkaisujen avulla. Molift-siirtoratkaisu on suunniteltu luokkansa parhaiksi laadun, luotettavuuden ja kestävyuden suhteen.



## Molift Air

Molift Air on pieni, taipuisa ja vahva kattonostin, jossa on panostettu turvallisuuteen sekä pitkään ja kustannustehokkaaseen elinkaareen.

Sitä on helppo käsitellä, siirtää ja se on helppo asentaa. Se sopii täydellisesti yhteen Molift Rail System -kiskojärjestelmän kanssa. Lue lisää Molift Air -nostimesta ja Rail System -järjestelmästä sivuilta 16 - 19.

## Moliftin historia

Moliftista tuli osa Etacia vuonna 2010. Hans Kasper Andresen perusti tuotemerkin Norjassa yli 30 vuotta sitten. Hän oli norjalainen keksijä, insinööri ja suunnittelija, joka oman kokemuksensa perusteella (hän oli sairaalahoidossa sydänkohtauksen takia) ymmärsi tarpeen nostaa ja siirtää turvallisella tavalla.

## Vakaa ja arvokas nostaminen

Molift-henkilönostimet on varustettu vakiomuotoisella 4-pistenostokehikolla. 4-pistenostokehikko mahdollistaa hyvin vakaan ja turvallisen nostokokemuksen. Siirrettävät nauttivat vapaasta, avoimesta istuma-asennosta, jossa on reilusti tilaa päälle ja ylävartalolle ja jossa he voivat istuessaan tuntea olonsa turvalliseksi. Mikään hihna tai nostimen osa ei ole epämukavan lähellä. Yhdessä Molift RgoSling -nostoliinan kanssa ne tarjoavat erinomaisen mukavuuden ja oikean siirtymisen makuuasennosta istuma-asentoon ja päinvastoin liinan silmukoiden liukuessa automaattisesti paikalleen noston aikana. Useimmat Molift-nostimet ovat saatavilla myös 2-pistenostokehikon kanssa.



## Turvallinen, tehokas ja omaa luokkaansa

Kun terveydenhoitosektorilla tehokkuuden tarve kasvaa ja panostetaan yhä enemmän hoidettavien ja hoitajien tarpeisiin ja turvallisuuteen, huippuluokan siirtotuotteet ovat olennaisen tärkeitä.



## Edulliset ratkaisut

Tutkimukset osoittavat, että manuaalinen nostaminen ja muut siirrettävien henkilöiden käsittelyt muodostavat suuren riskin sekä hoitajille että siirrettäville. Molift-tuotteiden tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja turvallista hoitoa, välttää suurten kuormien nostamista vaativia tilanteita, jotka voivat vahingoittaa hoitajan selkää, sekä tarjota samalla terveydenhuoltosektorille mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja. Viimeisten 20 vuoden aikana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että asianmukaisten välineiden kustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin hoitajien työperäisiin vammoihin liittyvät kustannukset.

## Standardimme

Moliftillä on alamme ISO-standardien mukaiset sertifikaatit. Tämä vaikuttaa siihen, miten edistämme tuotteitamme ja prosessiamme laatua ja varmistamme sen.

## Laadunvarmistusjärjestelmät

Meillä on ISO 9001 -sertifikaatti, mikä tarkoittaa, että kaikki työprosessimme tuotekehityksestä ja tuotannosta tuotteisiin ja niiden toimitukseen täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset.

## Jäljitettävyys

Molift täyttää kaikki ISO 13485 -standardin vaatimukset tuotteiden jäljitettävyuden suhteen. Kaikissa nostimissamme ja nostoliinoissamme on viivakoodit ja yksilölliset sarjanumerot, joiden avulla jälleenmyyjämme voivat jäljittää ne markkinoillaan.

## Ympäristövaatimukset

Työskentelemme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja meille on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti. Tämä standardi sisältää oikeudelliset vaatimukset raaka-aineiden, päästöjen, kierrätyksen ja energiankulutuksen suhteen.

## Sisältö



### Istuma-asennosta seisoma-asentoon -ratkaisut

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Molift Quick Raiser 205..... | 5 |
| Molift RgoSling Active ..... | 6 |



### Pyörälliset henkilönostimet

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Molift Smart 150.....    | 8  |
| Molift Partner 255 ..... | 9  |
| Molift Mover .....       | 10 |

### Kattonostimet

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Molift Nomad.....        | 15 |
| Molift Air .....         | 16 |
| Molift Rail System ..... | 18 |
| Molift Quattro .....     | 21 |
| Molift Duo .....         | 22 |



### Nostoalustat ja lisävarusteet

|  |    |
|--|----|
| Molift RgoSling Fabric Stretcher ..... | 24 |
| Molift Stretcher .....                 | 25 |
| Molift-nostinvarusteet.....            | 26 |



### Molift RgoSling -nostoliinat 4-pistenostokehikolle

|  |    |
|--|----|
| Molift RgoSling HighBack .....         | 30 |
| Molift RgoSling MediumBack.....        | 30 |
| Molift RgoSling Toilet .....           | 31 |
| Molift RgoSling Amputee .....          | 31 |
| Molift RgoSling Shadow.....            | 32 |
| Molift RgoSling Comfort HighBack.....  | 32 |
| Molift RgoSling Ambulating Vest.....   | 33 |
| Molift RgoSling Fabric Stretcher ..... | 33 |



### Molift EvoSling -nostoliina 2-pistenostokehikolle

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Molift EvoSling HighBack.....         | 36 |
| Molift EvoSling MediumBack .....      | 36 |
| Molift EvoSling LowBack.....          | 37 |
| Molift EvoSling Hygiene .....         | 37 |
| Molift EvoSling Ampu MediumBack...38  |    |
| Molift EvoSling Shadow HighBack ..... | 38 |
| Molift EvoSling Comfort MediumBack39  |    |
| Molift EvoSling FlexiStrap .....      | 39 |



### Molift UnoSling

|   |    |
|---|----|
| Molift UnoSling HighBack .....          | 41 |
| Tietoja .....                           | 42 |
| Molift-nostoliinojen lisävarusteet..... | 43 |





## Istuma-asennosta seisoma- asentoon -ratkaisut

Molift Quick Raiser 205 liikemallit perustuvat ergonomiaan. Tuote jäljittelee luonnollisia liikemalleja ja täyttää käyttäjien siirtotarpeet painoa kannattamalla. Norwegian Design Council on nimennyt Molift Quick Raiser 205 -nostimen Design Excellence -ehdokkaaksi uraauurtavan suunnittelun ja toimivuuden vuoksi.

# Molift Quick Raiser 205

Ergonominen istuma-asennosta seisoma-asentoon nostava henkilönostin erinomaisen nostotehon kanssa

## Tukeva, turvallinen ja pienikokoinen

Molift Quick Raiser 205 on uusinta tekniikkaa edustava istuma-asennosta seisoma-asentoon -nostin, jossa on sähköisesti säädettävät jalakset. Nostin on mukava, vakaa ja turvallinen ja poikkeuksellisen helposti ohjattavissa. Molift Quick Raiser 205 -nostimen liike jäljittelee luonnollista liikemallia ja täyttää käyttäjien siirtotarpeet painoa kannattamalla.

Pyörän ainutlaatuinen sijainti, taivutettu työntötanko ja jalustan verraton painon jakautuminen mahdollistavat pienen kääntösäteen. Pienillä pyörillä varustettuna nostin mahtuu useimpien sänkyjen ja tuolien alle samalla, kun sähköisesti säädettävät jalakset mahdollistavat pääsyn lähes kaikkialle. Vaihtoehtoisesti saatavana myös nostin kiinteillä jalaksilla, jolloin tarvittava lattiapinta-ala on erittäin pieni.

## Ominaisuudet

- Ergonominen suunnittelu - kalteva nostopylväs edistää luonnollista liikemallia.
- 4-piste Active-nostovarsi tarjoaa yhdessä RgoSling Active-liinojen kanssa lisätukea nostettaessa istuma-asennosta seisoma-asentoon.
- Valinnaista 2-piste StandUp-nostovartta käytetään RgoSling StandUp -liinojen kanssa.
- Määräaikaistarkastuksen ja -huollon automaattinen hälytys.



### Molift Quick Raiser 205

| Akku       |                                 | Tuotenro             |                        |
|------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
|            |                                 | Säädettävät jalakset | Kiinteät jalakset (FL) |
| SLA-akku   | Active, 4-piste pienet pyörät   | 29000                | 29150                  |
|            | StandUp, 2-piste pienet pyörät  | 29001                | 29151                  |
|            | Active, 4-piste, suuret pyörät  | 29100                | 29200                  |
|            | StandUp, 2-piste                | 29101                | 29201                  |
| Litiumakku | Active, 4-piste, pienet pyörät  | 29002                | 29152                  |
|            | StandUp, 2-piste, pienet pyörät | 29003                | 29153                  |
|            | Active, 4-piste, suuret pyörät  | 29102                | 29202                  |
|            | StandUp, 2-piste, suuret pyörät | 29103                | 29203                  |

Jos haluat täydellisen yhdistelmävalikon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

### Lisävarusteet

RgoSling Active- ja StandUp -liinat (katso taulukkoa seuraavalla sivulla)  
StandUp 2-pistenostovarsi  
Kohotettu jalkalauta  
Jalkalaudan kohokuviosarja  
Valinnainen jalkatuki ja pehmusteet

Lisätietoja varusteista on sivulla 26

### Paino

Käyttäjän enimmäispaino (SWL) 205 kg  
Kokonaispaino (FL) 44 (42,5) kg

### Mitat

Pyörialustan ulkoleveys 620 mm  
Pyörialustan sisäleveys 200 mm  
Jalkalaudan korkeus: 65 mm  
Pyörän koko Ø 75/50 mm  
Pyörän koko Ø 100/75 mm 90 mm

### Tekniset tiedot

Akku SLA 24 V 2,9 Ah  
Latausaika 6 tuntia  
Nimellisuorituskyky 100 nostoa/75 kg/500 mm  
Nostokorkeus 600 mm  
Kääntösäde 1 150 mm  
Nostonopeus, 75 kg 35 mm/s  
Nostonopeus, 205 kg 30 mm/s






# Molift RgoSling Active

Ihanteellinen ratkaisu aktiivisiin siirtoihin Molift Quick Raiser 205 -nostimella


## Mukava ja helppo siirtyminen

Moliftin istuma-asennosta seisoma-asentoon -nostoliinat ovat pehmustettuja ja ne on kehitetty aktiivisiin nostoihin Molift Quick Raiser 205 -nostimella. Nostoliinat tarjoavat täydellisen lantiotuen ja ovat ihanteellinen ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen eri istuma-asentojen välillä. Liinon luistamaton sisäpinta estää niitä liukumasta ylös. Vyötäröhihna antaa lisätukea ja -vakautta.

Molift RgoSling Active on suunniteltu 4-pistenostovartta varten ja sen liukuvat silmukat mahdollistavat optimaalisen asennon istuma-asennosta seisoma-asentoon siirtymisen aikana. Molift RgoSling Active tarjoaa pitoa ja tukea lantiolle seistessä. Leveä selkätuki jakaa painon ja paineen tasaisesti laajalle pinnalle, mikä tekee siitä hyvin mukavan käyttäjälle.

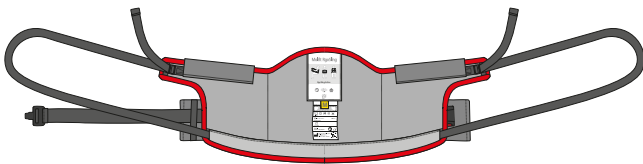

Molift RgoSling Active

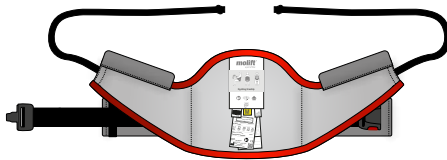

Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp on suunniteltu 2-pistenostovartta varten. Se on nopea ja helppo pukea siirrettävälle. Rakenteensa ansiosta se on ihanteellinen käytettäväksi wc-tilanteissa.



RgoSling Active ja Quick Raiser 205  
4-pistenostovarren kanssa

## Ominaisuudet

- Täydellinen ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen eri istuma-asentojen välillä.
- Iltsesäätävät, liukuvat silmukat (RgoSling Active).
- Laaja ja vakaa tuki.
- Helppo käyttää.

| Molift RgoSling                      | Vyötärö (mm) | Tuotenro |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| RgoSling Active 4 pt XS              | 500–720      | 1720910  |
| RgoSling Active 4 pt S               | 590–830      | 1720920  |
| RgoSling Active 4 pt M               | 730–950      | 1720930  |
| RgoSling Active 4 pt L               | 960–1210     | 1720940  |
| RgoSling Active 4 pt XL              | 1200–1390    | 1720950  |
| RgoSling StandUp 2 pt XS             | 530–710      | 1720710  |
| RgoSling StandUp 2 pt S              | 640–850      | 1720720  |
| RgoSling StandUp 2 pt M              | 740–960      | 1720730  |
| RgoSling StandUp 2 pt L              | 930–1220     | 1720740  |
| RgoSling StandUp 2 pt XL             | 1150–1430    | 1720750  |
| RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt XS | 530–710      | 1720810  |
| RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt S  | 640–850      | 1720820  |

| Molift RgoSling                      | Vyötärö (mm) | Tuotenro |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt M  | 740–960      | 1720830  |
| RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt L  | 930–1220     | 1720840  |
| RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt XL | 1150–1430    | 1720850  |

### Tietoja

Lisätietoja Active- ja StandUp-nostovarsista on sivulla 5.  
RgoSling StandUp on saatavilla myös tuen kanssa

Jos haluat täydellisen yhdistelmätaulukon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

### Materiaali







## Pyörälliset henkilönostimet

Pyörälliset Molift -henkilönostimet tunnetaan monista innovatiivisista ja intuitiivisista ratkaisuisista, kuten 4-pistenostokehikko, integroitu huolto-ohjelmisto, kompakti ja kevyt rakenne sekä ergonomiset ja käyttäjäystävälliset työntökahvat.



# Molift Smart 150

Kevyt, taitettava ja kuljetettavissa ilman työkaluja

## Pienikokoista älykkyyttä

Molift Smart 150 on suunniteltu työnnettäväksi ja kuljetettavaksi helposti käyttöpaikkaansa. Se on suunniteltu kotihoitoa, matkustusta ja helppoa säilytystä varten. Molift Smart 150 voidaan taittaa kokoon käyttämättä mitään työkaluja.

Pienen painonsa, pienten tilavaatimustensa ja ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta Molift Smart 150 -henkilönostinta on helppo ohjata myös ahtaissa tiloissa. Laaja 27 - 168 cm:n nostoalue tarjoaa erinomaisen maksimikorkeuden ja mahdollistaa samalla myös lattialta nostamisen. 4-pistenostokehikko varmistaa mukavan ja tilavan nostoasennon käyttäjälle.

Norwegian Design Council on myöntänyt Molift Smart 150 -nostimelle Design Excellence -palkinnon.



## Ominaisuudet

- Miellyttävä ja turvallinen nosto.
- Pienikokoinen ja taitettavissa ilman työkaluja.
- Kevyt ja pienet tilavaatimukset.
- Nostaa lattialta.
- Helppo käsitellä.

| Kuvaus  | Tuotenro | Paino  | Tekniset tiedot  |
|---|----------|--|--|
| Molift Smart 150 (sis. nostokehikon)  | 10200    | Kokonaispaino (sis. akku)<br>Paino erotettuna  | Huolto-ohjelmisto<br>Akku<br>Akun latausaika<br>Nostonopeus<br>Nimellisuorituskyky     |
| <b>Lisävarusteet</b><br>Pehmeä kuljetuslaukku<br>Matkalaukku<br><br>Lisätietoja varusteista on sivulla 26 |          | Mitat<br>Pituus<br>Jalaksen korkeus<br>Mitat taitettuna<br>Nostokorkeus<br>Nostoväli | Sisältyy<br>NIMH 14,4 V – 2,6 Ah<br>noin 3 tuntia<br>60 mm/s<br>50 nostoa/75 kg/500 mm |
| <b>Materiaali</b><br>Alumiini, teräs  |          | P 1 160 x L 475 x K 360 mm<br>270–1 665 mm<br>1 410 mm                               | <br>CE   |



# Molift Partner 255

Molifitin pyörällisten henkilönostimien lippulaiva - pystysuora nostorakenne tarjoaa erinomaisen vakauden

## Ihanteellinen ratkaisu tehohoitoon

Molift Partner 255 tarjoaa ihanteellisen nostoratkaisun sekä sairaaloiden että hoitolaitosten ensiapu- ja tehohoitotiloihin. Suora, pystysuuntainen pylväs yhdessä kiinteän nostokehikon kanssa tarjoaa erinomaisen vakauden. Se pitää käyttäjän samalla etäisyydellä pylvästä koko noston ajan. Molift Partner 255 -nostimen erinomainen nostoväli mahdollistaa nostamisen sekä lattialta että korkeilta alustoilta.

Molift Partner 255 on yksi luokkansa kevyimmistä ja yhdistettynä sen edistykselliseen rakenteeseen, suunnitteluun ja pyöräratkaisuun nostimen käsittely on erittäin helppoa 255 kg:n nostokapasiteetilla.

Molift Partner 255 -mallista on saatavana useita vaihtoehtoja, joilla tuotteen voi optimoida omaan käyttötärpeeseen sopivaksi: matalapohjainen runko, tukivarret kävelyharjoitteluun ja vaaka.

## Ominaisuudet

- Suuri nostokapasiteetti.
- Kiinteä nostokehikko ja suora, pystysuuntainen pylväs takaavat turvallisen ja vakaan noston.
- Keveys.
- Voidaan käyttää Molift-nostoalustojen kanssa.



| Kuvaus   | Tuotenumero | Materiaali  | Tekniset tiedot  |
|--|-------------|---|--|
| Molift Partner 255 (sis. nostokehikon)   | 13000       | Alumiini, teräs   | Huolto-ohjelmisto  |
| Jos haluat täydellisen yhdistelmätaulukon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.   |             | <b>Paino</b><br>Kokonaispaino   | Akku<br>Akun latausaika<br>Nostonopeus<br>Nimellissuurituskyky                         |
| <b>Lisävarusteet</b><br>Tukipyörä suuntalukituksella<br>Vaaka<br>Erilaisia nostokehikoita (katso sivu 12)<br>Nostoalustat (katso sivu 24)<br>Lisätietoja varusteista on sivulla 26 |             | <b>Mitat</b><br>Pituus<br>Rungon ulkoleveys<br>Rungon sisäleveys<br>Rungon sisäleveys, avatut jalakset<br>Nostokorkeus<br>Nostoväli<br>Jalaksen korkeus | Sisältyy<br>NiMh 26,4 V – 2,6 Ah<br>noin 3 tuntia<br>30 mm/s<br>50 nostoa/75 kg/500 mm |
|  |             | 42,5 kg   | max 255 kg<br>max 562 lbs  |
|  |             | 1 285 mm<br>700 mm<br>550 mm<br>1 065 mm<br>390–1 680 mm<br>1 290 mm<br>115 mm  |  |



# Molift Mover

Tuoteperhe pienikokoisia, kevyitä nostimia, jotka ovat muunneltavia ja tarjoavat laajan nostoalueen. Sopivat koteihin, sairaaloihin ja hoitolaitoksiin.

## Laaja nostoalue

Molift Mover -henkilönostin on valmistettu kevyestä alumiinista, joka tekee sen käsittelystä erittäin helppoa. Laitteen keveyden suhde nostokapasiteettiin on luokkansa paras. Suuri nostoalue mahdollistaa nostamisen sekä korkeilta alustoilta että lattialta. Integroitu Molift Service Tool varmistaa oikean huollon ja huoltovälit.

## Ergonominen käsittely

Hoitajien parempaa ergonomiaa varten Molift Mover -nostimet on varustettu Molifitin ainutlaatuisella, kaarevalla työntökahvalla, joka mahdollistaa useita joustavia otevaihtoehtoja. Helposti saatavilla oleva käsiohjain on käyttäjäystävällinen.

## Ominaisuudet

- Kevyt ja pienikokoinen nostin.
- Erittäin helppo käsitellä.
- Laaja nostoalue.
- Nosto lattialta.

## Molift Mover 180

Molift Mover sopii siirtotilanteisiin kodeissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Valinnainen 2- tai 4-pistenostokehikko pikalukituksella.



### Molift Mover

| Vaihtoehdot (ei sisällä nostokehikkoa) | Tuotenro  |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
|  | Mover 180 | Mover 205 | Mover 300 |
| Vakiorunko, pienet pyörät              | 18000     | 14000     | 15050     |
| Vakiorunko, suuret pyörät              | 18003     | -         | -         |
| Medium-runko                           | -         | -         | 15051     |
| Matala runko                           | -         | 14050     | -         |
| Vakiorunko ja tukivarret               | -         | 14150     | 15150     |
| Medium-runko ja tukivarret             | -         | -         | 15151     |

Jos haluat täydellisen yhdistelmätaulukon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

### Lisävarusteet

Mover 180:

Vaaka  
Erlaisia nostokehikoita (katso sivu 12)  
Suuntalukitus  
Vaaka  
Erlaisia nostokehikoita (katso sivu 12)  
Tukivarret  
Pienet pyörät  
Molift-nostoalustat (katso sivu 23)

Mover 205/300:

Lisätietoja varusteista on sivulla 26



## Molift Mover 205

Molift Mover 205 sopii toistuvaan, jokapäiväiseen käyttöön siirtotilanteisiin hoitolaitoksissa ja sairaaloissa. Pikalukitustoiminto antaa mahdollisuuden valita ja vaihtaa erikokoisia 2- ja 4-pistenostokehikoita. Erittäin monipuolinen nostin, johon saa paljon lisävarusteita.



## Molift Mover 300

Molift Mover 300 -nostimen nostokapasiteetti on peräti 300 kg. Se on ihanteellinen ratkaisu sairaaloihin ja hoitolaitoksiin, joissa on erittäin painavia henkilöitä, joita pitää siirtää ja käsitellä päivittäin. Nostokapasiteettiinsa nähden se on yksi luokkansa kevyimmistä nostimista.



Molift Mover 300 tukivarren kanssa

| Tietoja                            | Molift Mover 180       | Molift Mover 205       | Molift Mover 300       |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Käyttäjän enimmäispaino (SWL)      | 180 kg                 | 205 kg                 | 300 kg                 |
| Kokonaispaino                      | 35 kg                  | 37,6 kg                | 40,1 kg                |
| Pituus                             | 1 260 mm               | 1 285 mm               | 1 285 mm               |
| Rungon ulkoleveys                  | 700 mm                 | 700 mm                 | 700 mm                 |
| Rungon sisäleveys                  | 550 mm                 | 550 mm                 | 550 mm                 |
| Rungon sisäleveys, avatut jalakset | 1 025 mm               | 1 065 mm               | 1 065 mm               |
| Jalaksen korkeus                   | 105 mm                 | 115 mm                 | 115 mm                 |
| Akku                               | NiMH 14,4 V - 2,6 Ah   | NiMH 26,4 V - 2,6 Ah   | NiMH 26,4 V - 2,6 Ah   |
| Akun latausaika                    | 3 t                    | 3 t                    | 3 t                    |
| Nostokorkeus (maks.)               | 1 940 mm               | 2 093 mm               | 2 100 mm               |
| Nostonopeus                        | 40 mm/s                | 40 mm/s                | 32,6 mm/s              |
| Nostoväli                          | 1 365 mm               | 1 431 mm               | 1 420 mm               |
| Nimellisuorituskyky                | 50 nostoa/75 kg/500 mm | 50 nostoa/75 kg/500 mm | 50 nostoa/75 kg/500 mm |
| Huolto-ohjelmisto                  | Sisältyy               | Sisältyy               | Sisältyy               |
| Materiaali                         | Alumiini, teräs, muovi | Alumiini, teräs, muovi | Alumiini, teräs, muovi |






# Nostokehikot pyörällisiin henkilönostimiin

Kevyet, pikalukittavat nostokehikot

Molifitin alumiiniset nostokehikot sopivat niin uusiin kuin nykyisiin nostimiin ja saatavana on eri malleja ja kokoja. Kevyessä nostokehikossa on pikalukitus ja vaihto onnistuu ilman työkaluja, jonka ansiosta hoitajan

on hyvin helppo vaihtaa se. Luokan III hyväksytyllä vaa'alla varustettu nostokehikko täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea painoindeksin (BMI) yhdellä painikkeen kosketuksella.

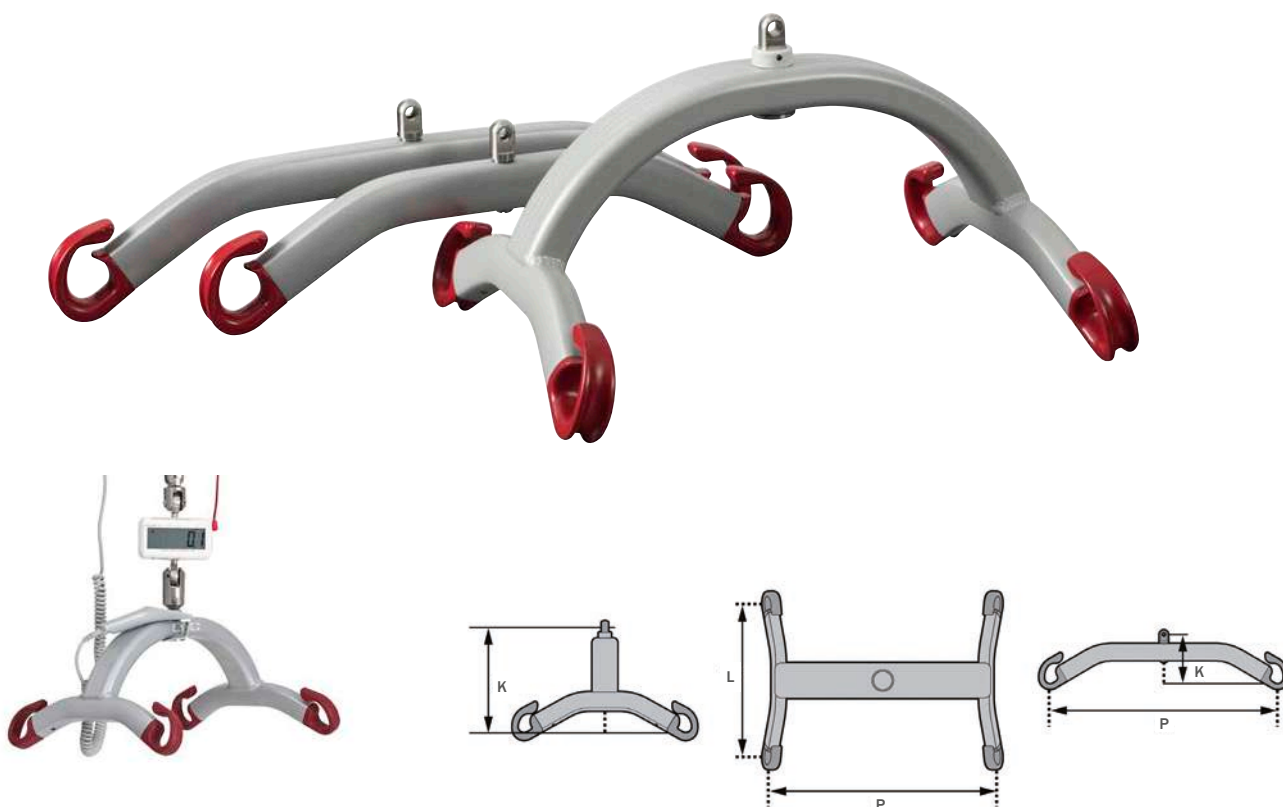

| Kuvaus        | Tyyppi                       | SWL (kg) | Tuoteno S | Tuoteno M | Tuoteno L | Tuoteno XL |
|---------------|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Mover 180     | 2-pistenostokehikko          | 300      | 1830043   | 1830042   | 1830041   | -          |
| Mover 180     | 4-pistenostokehikko          | 300      | 1830110   | 1830111   | 1830112   | 1830113    |
| Mover 205     | 2-pistenostokehikko          | 300      | 1430117   | 1430116   | 1430115   | -          |
| Mover 205/300 | 4-pistenostokehikko          | 300      | -         | 1530101   | 1530102   | 1530103    |
| Mover 205/300 | 4-pistenostokehikko ja vaaka | 300      | -         | 1530110   | 1530111   | -          |
| Partner 255   | 2-pistenostokehikko          | 255      | -         | 1330160   | 1330161   | 1330162    |
| Partner 255   | 8-pistenostokehikko          | 255      | -         | 2140002   | -         | -          |

#### Mitat (mm)

|                     |                    |                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2-pistenostokehikko | K130 x P350        | K130 x P450         | K130 x P550        | -                  |
| 4-pistenostokehikko | H210 x L300 x P350 | H240 x L300 x P450  | H240 x L350 x P550 | H240 x L350 x P650 |
| 8-pistenostokehikko | -                  | H420 x L920 x P1430 | -                  | -                  |

#### Lisävarusteet

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Vaaka Mover 180   | 1840000 |
| Vaaka Partner 255 | 1331002 |

#### Materiaali

Alumiini, sinkki

# Molift Service Tool

Ohjelmisto, joka toimii vuorovaikutuksessa nostimen kanssa

## Oikean huollon ja huoltovälin varmistaminen


Kaikissa Molift-nostimissa on integroitu huolto-ohjelmisto, joka ilmoittaa, milloin huolto on tarpeen. Tämä varmistaa käyttäjälle, hoitajalle ja johdolle, että nostin on turvallinen soveltuvien lakien ja määräysten suhteen.

Molift Service Tool laskee nostojen määrän ja antaa varoitussignaalin, kun tarvitaan huoltoa. Molift Service Tool -ohjelmiston kautta teknikko voi olla vuorovaikutuksessa nostimen kanssa ja suorittaa ja kirjata huollon sekä teknisen vianmäärityksen. Ohjelmisto sallii myös nostimen keskeisten parametrien lukemisen, tarkistamisen ja säätämisen sekä huoltohistorian kirjaamisen, lukemisen ja tulostamisen.

Ohjelmiston kautta voidaan käyttää tuotekohtaista huollon tarkistuslistaa.

## Nostimen käytön kirjaaminen ja analysointi

Molift Service Tool -ohjelmistoa voidaan käyttää nostimen käyttöä ja nostorakenteita koskevan tiedon hakemiseen. Kun tiedot liittyvät työntekijän työperäiseen vammaan, ne voivat olla hyödyllinen työkalu työnantajalle vammojen vähentämiseksi. Lisäksi Molift Service Tool voi edistää tehokkuutta, koska se osoittaa, minkätyyppiset käytettävät nostot sopivat potilasryhmälle ja sen tarpeisiin.

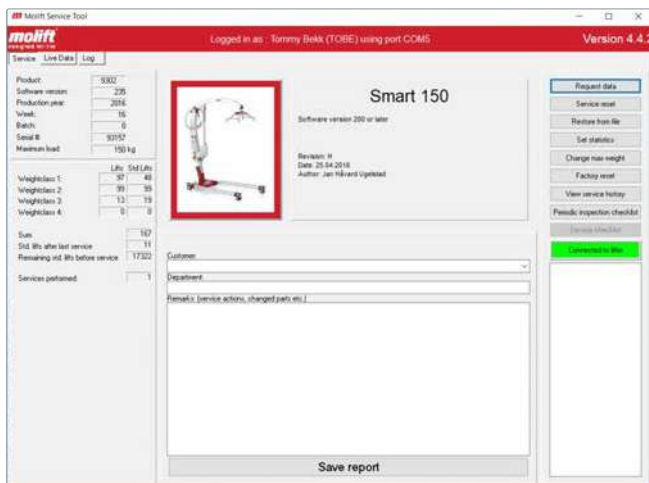

Molift Service Tool -ohjelmiston avulla voimme kerätä tietoja Molift-nostoista kautta maailman ja jatkuvasti parantaa tuotteitamme




### Kuvaus

Kaapeli (13-nastainen - USB)  
Kaapeli (USB - liitin Ø 3,5)

### Tuotenumero

1299002  
2920133

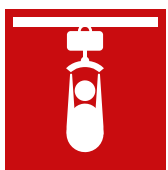

## Kattonostimet

Molift-kattonostimet ja Molift-kiskojärjestelmä ovat optimaalinen ratkaisu hoitajien avuksi. Molift-kattonostimet ovat intuitiivisia ja helppoja käyttää ja voivat täyttää kaikki liikuntarajoitteisten henkilöiden nostotarpeet. Molift-kattonostimen ja Molift-kiskojärjestelmän toimiva ja käyttäjäystävällinen rakenne parantaa käytettävyyttä sekä hoitajan ja siirrettävän turvallisuutta.



# Molift Nomad

Siirrettävä kevyt nostin, sopii kaikkiin jokapäiväisiin toimenpiteisiin.

## Kevyt - suuri nostokapasiteetti

Molift Nomad painaa vain 6,8 kg. Keveydestä huolimatta sen nostokapasiteetti on 255 kg. Molift Nomadissa on ainutlaatuinen kaareva muoto, ja sen integroitu 4-pistenostokehikko käytettynä minkä tahansa Molift-nostoliinan kanssa, tarjoaa käyttäjälle mukavan ja tilavan asennon. Molift Nomad on varustettu lukuisilla turvaominaisuuksilla, kuten elektroninen ylikuormasuoja, elektroninen hätälasku ja hätäpysäytys.

## Helppo siirto huoneesta toiseen

Molift Nomad -nostimessa on integroidut kantokahvat helppoa käsittelyä varten. KytKentä on helppo eikä edellytä työkaluja. Yhdessä erikoisrakenteisen kelkan kanssa Molift Nomad -nostinta voidaan käyttää kiipeämiseen yhdestä kiskojärjestelmästä toiseen ilman siirtokiskoa. Tämä mahdollistaa helpon siirron huoneesta toiseen. Käytettäessä Molift Nomad -jatkovartta nostin voidaan helposti kytkeä kelkkaan lattiasta ja irrottaa siitä. Molift Nomad -kärry on ihanteellinen nostimen varastointiin ja kuljettamiseen.



## Ominaisuudet

- Keveys ja suuri nostokapasiteetti.
- Siirrettävä kattonostin.
- Kiipeäminen huoneesta toiseen.
- Helppo kytKentä kelkkaan ilman työkaluja.
- Integroitu 4-pistenostokehikko.

### Kuvaus

| Kuvaus           | Tuotenumero |
|------------------|-------------|
| Molift Nomad 160 | 22160       |
| Molift Nomad 205 | 22205       |
| Molift Nomad 230 | 22230       |
| Molift Nomad 255 | 22255       |

### Lisävarusteet

Jatkovarsi (P 900 mm)  
Jatkovarsi (P 1 050 mm)  
Vaaka  
Kärry  
Lisätietoja varusteista on sivulla 26

### Materiaali

Vahvistettu komposiitti ja alumiini

### Paino

Käyttäjän enimmäispaino (SWL) 160/205/230/255 kg  
Kokonaispaino 6,8 kg

### Mitat

P 522 x L 200 x K 330 mm


### Tekniset tiedot

Huolto-ohjelmisto Sisältyy  
Akku NiMh 26,4 V - 2,6 Ah

Akun latausaika  
Nostonopeus  
Nimellisuorituskyky  
Nostoalue

noin 3 tuntia  
30 mm/s  
80 nostoa/75 kg/500 mm  
2 000 mm



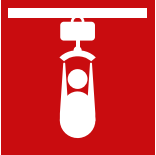

# Molift Air

Pienikokoinen ja helppo asentaa

## Toimiva ja hyvin suunniteltu

Molift Air on vahva ja käyttäjäystävällinen katonostin, jonka avulla käyttäjät saadaan siirrettyä mukavasti ja turvallisesti. Se on innovatiivinen, toimiva ja hyvin suunniteltu nostoapu liikuntarajoitteisille käyttäjille. Yhdistettynä Molift-kiskojärjestelmään Molift Air ratkaisee useimmat terveydenhoidossa ja muissa henkilöiden käsittely-ympäristöissä esiin tulevat nostotilanteet.

## Kevyt ja monipuolinen

Molift Air sopii siirtoon istuma-asennossa ja makuulla sekä seisaallaan tai kävellen tehtäviin harjoituksiin. Laaja valikoima lisävarusteita varmistaa monipuolisuuden. Nostinta käytetään kiinteiden katonostinten kanssa ja sitä voidaan myös käyttää siirrettävien vapaasti seisovien järjestelmien kanssa.

Molift Air on helppo poistaa ja vaihtaa asennuksen ja huollon aikana sen keveyden ja älykkään pikavapautus-toiminnon ansiosta. Nostin tarjoaa monipuoliset ratkaisut kuten etäohjauksen ja mahdollisuuden siirtoon huoneesta toiseen. Kun tähän lisätään turvaominaisuudet, suuri nostoalue ja useiden nostokehikoiden valikoima, saadaan täydellinen ratkaisu kaikkiin terveydenhoitotilanteisiin. Molift Air on helppo sovittaa markkinoilla oleviin toisten valmistajien kiskojärjestelmiin.

## Ominaisuudet

- Suuri nostokapasiteetti
- Pilalukituskytkentä nostokehikkoa varten
- Vaihtoehtoisia nostokehikoita
- Pikalukituslaite kelkkaa varten

## Molift Air 200

Molift Air 200, jonka nostokapasiteetti on 200 kg, on optimoitu pitkäaikaista hoitoa, hoitolaitoksia ja koteja varten. Nostin ladataan käsiohjaimen kautta.



Jos haluat täydellisen yhdistelmätaulukon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

### Lisävarusteet

Vaaka  
Huoneesta toiseen -siirtoyksikkö

Litiumakku  
Nostokehikot (kts. sivu 20)  
Kiskon sisäinen lataus (IRC)  
Työntövoima

Lisätietoja varusteista on sivulla 26



## Molift Air 350

Molift Air 350 -nostimen nostokapasiteetti on erinomainen ja sillä on pitkä käyttöikä ja alaiset huoltokustannukset. Nostin sopii useimpiin markkinoiden suoriin kiskojärjestelmiin.

Molift Air 350 on saatavilla useilla varusteilla: kiskon sisäinen lataus, työntökelkka, langaton käsiohjain ja litiumakkukennot.




## Molift Air 500

Molift Air 500 on suunniteltu ylipainoisille käyttäjille ja sen nostokapasiteetti on 500 kg. Molift Air 500 -nostimesta on useita käyttäjäystävällisiä muunnelmia: kiskon sisäinen lataus, työntökelkka, langaton käsiohjain ja erityisesti suunniteltu nostokehikko.



| Tietoja                                    | Molift Air 200   | Molift Air 350              | Molift Air 500              |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttäjän enimmäispaino (SWL)              | 200 kg   | 350 kg                      | 500 kg                      |
| Kokonaispaino (SLA-akun kanssa)            | 8,6 kg   | 8,6 kg                      | 15 kg                       |
| Pituus                                     | 360 mm   | 360 mm                      | 360 mm                      |
| Leveys                                     | 190 mm   | 190 mm                      | 250 mm                      |
| Korkeus                                    | 195 mm   | 195 mm                      | 195 mm                      |
| Akku                                       | 26,4 V SLA 2,6 Ah  | 26,4 V SLA 2,6 Ah           | 26,4 V SLA 2,6 Ah           |
| Akkulaturi                                 | 100–240 V AC, 40–60 Hz   | 100–240 V AC, 40–60 Hz      | 100–240 V AC, 40–60 Hz      |
| Akun latausaika                            | 6 t  | 6 t                         | 6 t                         |
| Moottori                                   | 24 V DC  | 24 V DC                     | 24 V DC                     |
| Nostoväli                                  | 3 000 mm   | 2 600 mm                    | 3 000 mm                    |
| Nostonopeus, 75 kg                         | 60 mm/s  | 60 mm/s                     | 30 mm/s                     |
| Arvioitu käyttöikä                         | 30 000 nostoa SWL/10 vuotta  | 30 000 nostoa SWL/10 vuotta | 30 000 nostoa SWL/10 vuotta |
| Molift Service Software                    | Sisältyy   | Sisältyy                    | Sisältyy                    |
| Hätälasku                                  | Mekaaninen ja sähköinen  | Mekaaninen ja sähköinen     | Mekaaninen ja sähköinen     |
| Hätäpysäytys                               | Ladattavissa uudelleen lattialta langalla. Nollattavissa lattialta |                             |                             |
| Suojausluokka: käsiohjain ja nostomoottori | IPX4   | IPX4                        | IPX4                        |



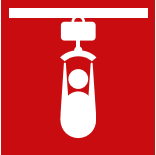

# Molift Rail System

Kustannustehokas ja monipuolinen ratkaisu kaikkiin ympäristöihin

## Tehokas asennusprosessi

Molift Rail System -kiskojärjestelmässä on innovatiiviset ratkaisut integrointiin kaiken tyyppisten kattojen ja seinien kanssa. Monet erilaiset kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat yhden markkinoiden tehokkaimmista asennusprosesseista. Se on helposti integroitavissa ja esteettisesti sovitettavissa huoneen tyyliin ja arkkitehtuuriin. Kytkinten ja muiden siirtovarusteiden valikoima tekee kiskojärjestelmästä erittäin monipuolisen.

Molift Rail System -järjestelmän kapasiteetti voi olla 160 - 500 kg tarpeiden ja nostomoottorin valinnan mukaan.

## Edulliset ratkaisut

Asennusprosessin tehokkuus ja monipuoliset ominaisuudet tekevät Molift Rail System -järjestelmästä kustannustehokkaan, kilpailukykyisen ja kannattavan sijoituksen sairaaloille, laitoksille ja kodeille. Tämä auttaa luomaan käytännöllisen ja tehokkaan työpaikan hoitajille samoin kuin viihtyisän ympäristön siirrettäville ja vierailijoille.

## Mukautettu kapasiteetti

### Poikittainen kiskojärjestelmä

Yksi markkinoiden joustavimmista ratkaisuista, joka kattaa kaikki nostotarpeet huolimatta huoneen uudistamisesta tai laitteiden vaihdosta.

### Poikittaisvaihto

Mahdollistaa kahden erilaisen kiskojärjestelmän kytkemisen, esimerkiksi poikittaisen järjestelmän ja yksittäisen kiskon. Erittäin hyödyllinen siirrettäessä huoneesta toiseen.

### Yhden kiskon järjestelmä


Suora kisko ja/tai kaarevat kiskot tarjoavat yksinkertaisen ja tehokkaan potilaan siirron useimpiin nostotilanteisiin kuten nostettaessa vuoteesta pyörätuoliin.

### Siirto huoneesta toiseen

Kun on tarve siirtää huoneesta toiseen tai yhdestä kiskojärjestelmästä toiseen, Molift voi tarjota huoneesta toiseen -toiminnon (kiipeämisen), vaihtojärjestelmät tai oven läpi jatkuvat kiskojärjestelmät jne.

### Kiskovaihto

Kiskovaihto - mahdollistaa yksittäisten kiskojen suunnan vaihdon, esimerkiksi suorasta kiskosta kaarevaan kiskoon.

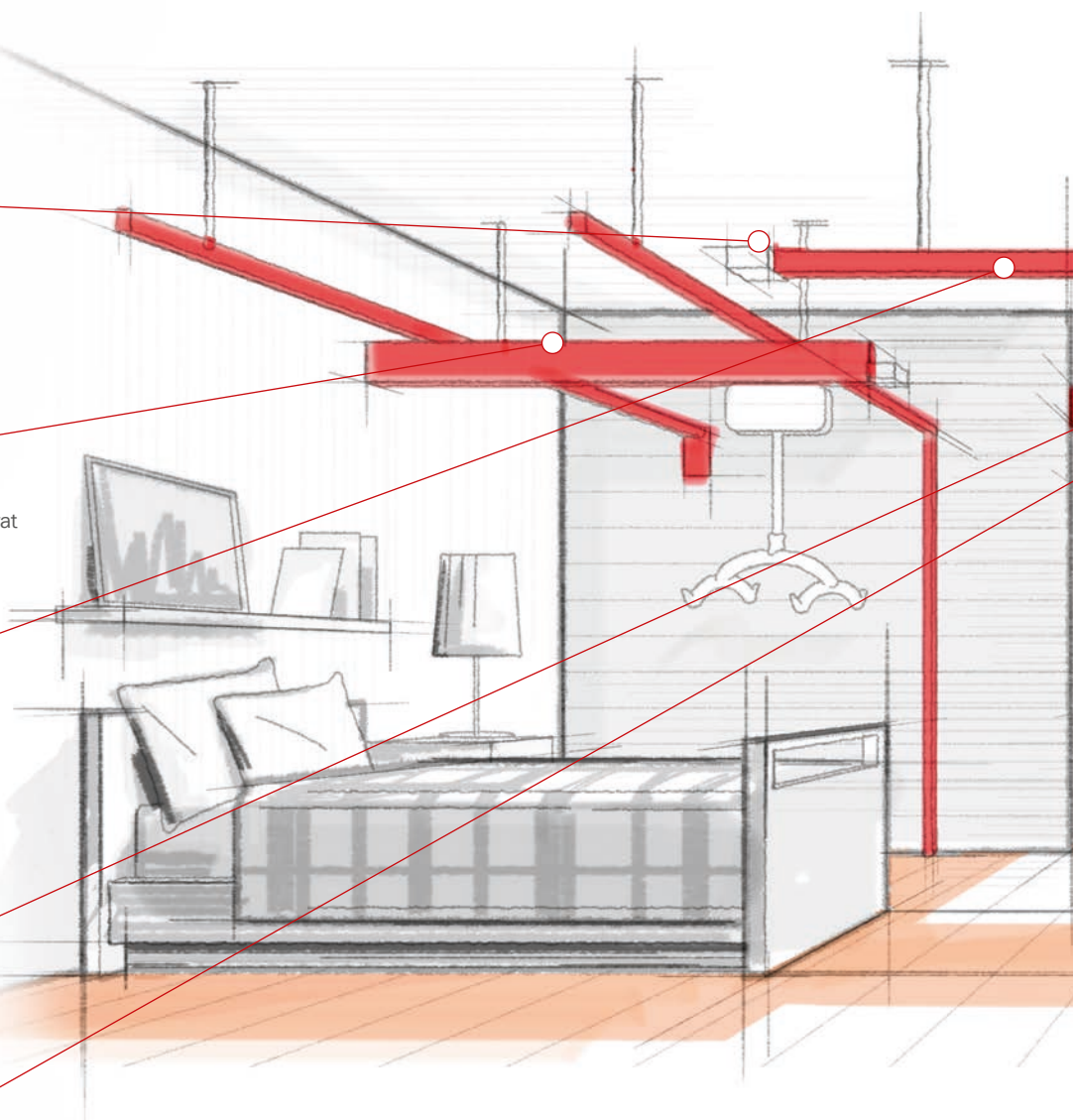

## Joustava järjestelmä

- Helppo asentaa.
- Eri painoluokkia.
- Useita asennusvaihtoehtoja – integroitu sisäkaton sisään tai alle, seinään tai lattialle pystytukien varaan jne.
- Voidaan asentaa kaiken tyyppisiin kattoihin, seiniin ja lattioille.

### Mahdollisuudet

Suorat profiilit  
Kaaret - 30, 45, 60 ja 90 astetta  
Kiinteät pidikkeet, teleskooppipidikkeet  
Monipuoliset poikittaisvaihtoehdot  
Poikittaisvaihto  
Kiskovaihto  
Kiskon sisäinen lataus  
Verhon läpikulku

### Käyttäjän enimmäispaino

(SWL)  
160–500 kg

### Värit

Valkoinen

### Kiskot


3 mittaa:  
Korkeus: 62, 112, 142 mm

### Maksimietäisyys kalusteiden välillä

Enintään 6 000 mm

### Vaihdot

Kiskovaihto  
Poikittaisvaihto

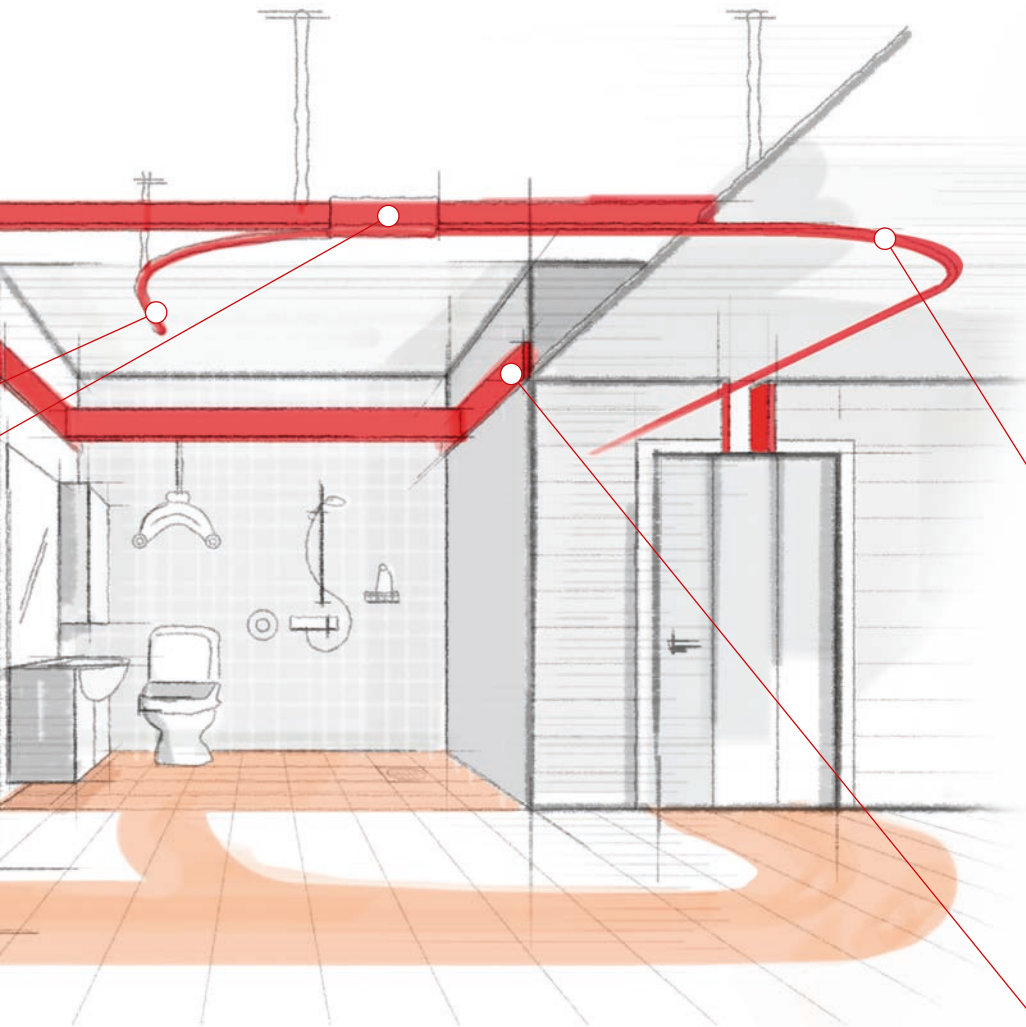

### Kiskon sisäinen lataus

Kiskon sisäisen latauksen ansiosta laite voi ladata akkuja missä tahansa järjestelmän osassa. Näin nostin on aina käyttövalmis. Kiskon sisäinen lataus voidaan asentaa vain suoriin ja poikittaisiin kiskojärjestelmiin.

### Integroitu kisko

Integroitu kiskojärjestelmä - yksittäinen integroitu kisko tarjoaa erittäin huomaamattoman ja siistin ratkaisun.

### Verhon läpikulku

Verhon läpikulku sallii aukot osaston kattoon kiinnitettyjä verhoja varten. Tämä tarkoittaa, että useat vuoteet voivat jakaa saman moottorin ja säilyttää silti yksityisyyden hoidattaessa yksittäistä potilasta.

### Seinään kiinnitetyt kiskot

Seinään kiinnitetyt kiskot - jos katto ei pysty kannattamaan järjestelmää, kiskon voi kiinnittää seinään.






# Nostokehikot katonostimiin

Kevyet, pikalukittavat nostokehikot

Molifin alumiiniset nostokehikot sopivat niin uusiin kuin nykyisiin nostimiin ja saatavana on eri malleja ja kokoja. Kevyessä nostokehikossa on pikalukitus ja vaihto onnistuu ilman työkaluja, jonka ansiosta hoitajan

on hyvin helppo vaihtaa se. Luokan III hyväksytyllä vaa'alla varustettu nostokehikko täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea painoindeksin (BMI) yhdellä painikkeen kosketuksella.

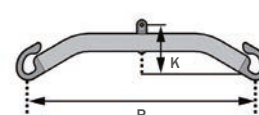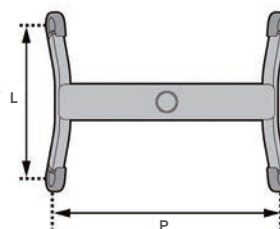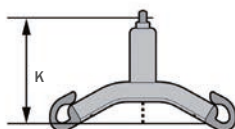

| Kuvaus                           | Tyyppi  | SWL (kg)       | Tuoteno S                        | Tuoteno M           | Tuoteno L          | Tuoteno XL         |
|----------------------------------|---|----------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Molift Air                       | 2-pistenostokehikko                           | 350            | 2530115                          | 2530120             | 2530125            | -                  |
| Molift Air                       | 2-pistenostokehikko, koukkumalli              | 350            | 1830033                          | 1830032             | 1830031            | -                  |
| Molift Air                       | 4-pistenostokehikko                           | 350            | 2530210                          | 2530211             | 2530212            | 2530213            |
| Molift Air                       | 4-pistenostokehikko, koukkumalli, bariatrinen | 550            | -                                | -                   | 2510435            | -                  |
| Molift Air                       | 8-pistenostokehikko                           | 300            | -                                | 2140003             | -                  | -                  |
| <b>Mitat (mm)</b>                |   |                |                                  |                     |                    |                    |
| 2-pistenostokehikko              |   |                | K130 x P350                      | K130 x P450         | K130 x P550        | -                  |
| 2-pistenostokehikko, koukkumalli |   |                | K150 x P400                      | K150 x P500         | K150 x P600        | -                  |
| 4-pistenostokehikko              |   |                | K210 x L300 x P350               | K240 x L300 x P450  | K240 x L350 x P550 | K240 x L350 x P650 |
| 4-pistenostokehikko, koukkumalli |   |                | -                                | -                   | K200 x L550 x P550 | -                  |
| 8-pistenostokehikko              |   |                | -                                | K420 x L920 x P1430 | -                  | -                  |
| <b>Nostinvarusteet</b>           |   | <b>Item.no</b> | <b>Materiaali</b>                |                     |                    |                    |
| Molift Air-vaaka                 |   | 1840000        | 2 ja 4-pistenostokehikko         |                     | Alumiini, sinkki   |                    |
|                                  |   |                | 2-pistenostokehikko, koukkumalli |                     | Alumiini           |                    |
|                                  |   |                | 4-pistenostokehikko, koukkumalli |                     | Teräs              |                    |
|                                  |   |                | 8-pistenostokehikko              |                     | Teräs              |                    |

# Molift Quattro

Erinomaisen vakaa tilapäinen nostoratkaisu

## Vapaasti seisova huoneen kattava kiskosto

Molift Quattro on vapaasti seisova huoneen kattava kiskosto, joka tarjoaa (nelipylväisen) poikittaisjärjestelmän, joka soveltuu parhaiten tilapäisiin nostotarpeisiin tai olosuhteisiin, joissa tilaa ei ole rakennettu kiinteitä asennuksia varten. Huoneen kattava kiskosto on helppo asentaa ilman että tarvitsee kiinnittää lisärakenteita seinille tai kattoihin. Se soveltuu ihanteellisesti tilapäisiin nostosovelluksiin hoitolaitoksissa tai yksityiskodeissa.

## Nostotilanteet

Kiskosto on kevyt alumiinirunko ja neljä teräspylvästä, jotka takaavat erinomaisen vakauden ja kattavat nostotarpeen pinta-alan. Molift Quattro ratkaisee kaikki nostotilanteet yhdessä Molift Air- tai Molift Nomad -nostomoottorin ja liinan kanssa. Järjestelmän nostokapasiteetti on 300 kg ja se soveltuu henkilön nostamiseen ja siirtämiseen vuoteesta/vuoteeseen, lattialta/lattialle, pyörätuolista/pyörätuoliin tai WC:hen/WC:stä jne.

## Ominaisuudet

- Helppo asentaa - suunniteltu kahden (suositus) henkilön suorittamaan nopeaan asentukseen.
- Seinä- tai kattokiinnitystä ei tarvita.
- Erinomainen vakaus ja käsiteltävyys.
- Helppo ladata - nostomoottori voidaan ladata helposti käsiohjaimen avulla kiskon sisäisellä latauksella.



### Kuvaus

|                  |         |
|------------------|---------|
| Molift Quattro 3 | 1600030 |
| Molift Quattro 4 | 1600035 |

### Lisävarusteet

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Säädettävä jalan alaosa | 1610201 |
|-------------------------|---------|

### Lisävarusteet

Säädettävä jalka (4 kpl)

Molift Air ja Molift Nomad kelkkojen kanssa tilataan erikseen.

Lisätietoja varusteista on sivulla 26

### Tuoteno

### Tuoteno

### Materiaali

Teräs, alumiini, muovi

### Paino

|  |          |
|--|----------|
| Käyttäjän enimmäispaino (SWL)          | 300 kg   |
| Kokonaispaino Quattro 3 (koko yksikkö) | 111 kg   |
| Kokonaispaino Quattro 4 (koko yksikkö) | 132 kg   |
| Puomi                                  | 4,2 kg/m |
| Jalka, jossa on säädettävä alaosa      | 8,5 kg   |
| Nurkka                                 | 2,7 kg   |

### Mitat

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saatavana olevat pylväiden pituudet  | 3 000, 4 000 mm |
| Korkeus ilman jalkoja                | 2 330 mm        |
| Korkeus säädettävien jalkojen kanssa | 2 360–2 430 mm  |
| Sisäkorkeus ilman jalkoja            | 2 190 mm        |

Leveys/syvyys 3 160 - 4 160 mm

Maksimi sisätilavuus ilman jalkoja 3 000/4 000 x 2 190 mm  
säädettävien jalkojen kanssa 3 000/4 000 x 2 240 - 2 290 mm


Pylväiden pituus on kiinteä. Pienin sallittu etäisyys lattiasta kattoon on 2 400 mm.

### Tekniset tiedot

Arvioitu käyttöikä: 30 000 nostokertaa (SWL) tai 10 vuotta





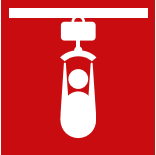

# Molift Duo

Joustava ja vapaasti seisova kiskosto tilapäisiin nostotilanteisiin

## Helppo ratkaisu useimpiin huonekokoihin

Molift Duo tarjoaa järjestelmän, joka on helppo asentaa kiinnittämättä kattoon tai seiniin. Se soveltuu ihanteellisesti tilapäisiin nostosovelluksiin sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai yksityiskodeissa. Molift Duo ratkaisee yhdessä Molift Air- tai Molift Nomad -nostimen ja liinan kanssa useimmat nostotilanteet, olipa ympäristö mikä tahansa. Laitteen nostokapasiteetti on 300 kg ja se soveltuu henkilön nostamiseen ja siirtämiseen vuoteesta/vuoteeseen, lattialta/lattialle, pyörätuolista/pyörätuoliin tai WC:hen/WC:stä jne.

## Kevyt rakenne

Molift Duon kevyen ja toimivan alumiinirakenteen ansiosta kiskosto on helppo rakentaa, purkaa ja siirtää.

Tämän 2-pylväisen järjestelmän kiskon pituus on 2 000 - 3 500 mm ja sillä on 4 säädettävää korkeutta 2 550 mm:iin asti, joten tämä vapaasti seisova nostinyksikkö sopii kaikkiin vuode- ja huonekokoihin.

## Ominaisuudet

- Helppo asentaa - järjestelmän keveyden ansiosta palkki on helppo asentaa ja siirtää toiseen paikkaan.
- Erinomainen vakaus - palkkijärjestelmällä on erinomainen vakaus ja toimiva rakenne.
- Säädettävä korkeus - korkeus voidaan säätää neljään kiinteään asentoon 225 cm - 255 cm. Korkeus säädetään pikalukitusapin avulla.
- Nostimen moottorin lataaminen - sekä Molift Air- että Molift Nomad -moottorit voidaan ladata käsiohjaimella, joka sijoitetaan pylvääseen kiinnitettyyn laturiin.



### Kuvaus

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Molift Duo 2000 | 1600013 |
| Molift Duo 2500 | 1600015 |
| Molift Duo 3000 | 1600017 |
| Molift Duo 3500 | 1600019 |

### Paino

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Käyttäjän enimmäispaino (SWL) | 300 kg       |
| Kokonaispaino                 | 38 - 44,3 kg |

### Laitteen paino

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Pylväs (kokonaisena)  | 14,8 kg  |
| Pylväs (ilman jalkaa) | 11 kg    |
| Puomi                 | 4,2 kg/m |
| Jalka                 | 3,8 kg   |

### Mitat

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Korkeus              | 2 250 - 2 550 mm |
| Syvyys               | 1 200 mm         |
| Maksimisisättilävyys | 3 500 x 2 400 mm |
| Kuljetuskorkeus      | 1 700 mm         |

### Saatavilla olevat kiskon pituudet

2 000, 2 500, 3 000, 3 500 mm

### Materiaali

Anodisoitu alumiini, muovi





## Nostoalustat ja lisävarusteet

Molift tarjoaa valikoiman lisävarusteita eri tarpeisiin. Yksi niistä on ainutlaatuinen Molift-nostoalusta, jota voidaan käyttää suoraan Molift 4-pistenostokehikon kanssa.



# Molift RgoSling Fabric Stretcher

Makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin sairaaloissa ja laitoksissa

## Pehmeä makuunostoliina

Molift RgoSling Fabric Stretcher on pehmeä, kankainen nostoliina sairaaloihin ja laitoksiin. Se on suunniteltu makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin. Molift RgoSling Fabric Stretcher soveltuu, kun normaalilla liinalla nostaminen ei sovi terveydentilan vuoksi, esimerkiksi, jos potilas on tajuton tai nukutettu ja edellyttää vakaata makuuasentoa. Se on mukava vaihtoehto tavallisille paareille. Molift RgoSling Fabric Stretcher on yhteensopiva Molift Partner 255- ja Molift Air -nostimen kanssa.

## 8-pistenostokehikko

Tällä tuotteella nostaminen edellyttää 8-pistenostokehikkoa. Nostokehikko on yhteensopiva Molift Partner 255- ja Molift Air -nostimen kanssa. Molift Fabric Stretcher -makuunostoliinassa on integroidut nostohihnat, jotka kiinnitetään suoraan nostokehikkoon. Niiden pituutta voidaan säätää jonkin verran silmukoiden avulla. Useat nostopisteet takaavat avoimen ja vakaan makuuasennossa tapahtuvan siirron.

## Ominaisuudet

- Molift RgoSling Fabric Stretcher soveltuu, kun normaalilla nostoliinalla nostaminen ei sovi terveydentilan vuoksi.
- Makuunostoliinan asettelu tapahtuu helposti Immedia SlingOn -mekanismilla potilaan ollessa makuuasennossa.
- Avoin ja vakaa nostaminen - 8-pistenostokehikon useat nostopisteet takaavat avoimen ja vakaan makuuasennossa tapahtuvan siirron.



### Kuvaus

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Molift RgoSling Fabric Stretcher M  | 1721520 |
| Molift RgoSling Fabric Stretcher L  | 1721530 |
| Molift RgoSling Fabric Stretcher XL | 1721540 |

### Materiaali

Molift Fabric Stretch: polyesteriä

### Paino

Käyttäjän enimmäispaino (SWL)\* 300 kg

### Mitat

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Ulkopituus | Medium  | 1 750 mm |
|            | Large   | 1 780 mm |
|            | X-large | 1 850 mm |
| Ulkoleveys | Medium  | 450 mm   |
|            | Large   | 650 mm   |
|            | X-large | 900 mm   |

\* Turvallinen työkuorma riippuu aina nostimien turvallisuudesta työkuormasta, kun se on vähemmän kuin Fabric Stretcherillä.



max 300 kg max 661 lbs



# Molift Stretcher

Ihanteellinen makuuasennossa tapahtuviin nostoihin

## Helppokäyttöinen

Molift Stretcher -nostoalusta on tukeva, kaarevan mallinen nostoalusta sairaaloihin ja laitoksiin. Alusta on suunniteltu makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin, kun perinteinen liinanosto ei sovellu terveydentilan vuoksi. Molift Stretcher on optimaalinen ratkaisu tajuttomien tai nukutettujen potilaiden siirtoon, joilla epäillään olevan selkärankavammoja ja -murtumia.

## Ihanteellinen ensiapuun

Yhdessä Moliftin vakiomallisen 4-pistenostokehikon kanssa se on ihanteellinen ensiavun tarpeisiin, kun nopea toiminta on tärkeää ja potilaan liikkuvuus rajoitettua. Molift Stretcher voidaan jakaa kahteen osaan pituussuunnassa ja on siksi helppo asettaa potilaan alle.

Molift Stretcher -nostoalustassa on viisi kahvaa molemmilla sivuilla, mikä tarjoaa manuaalisen nostovaihtoehdon lattialta ja mahdollistaa makuuasennossa tapahtuvan ja lateraalisen siirron vuoteiden ja pintojen välillä.



## Ominaisuudet

- Ainutlaatuinen patentoitu malli turvalliseen ja tehokkaaseen siirtoon.
- Pieni kokonaispaino ja helppo kannettavuus.
- Turvallinen lukitusjärjestelmä - helppo avata ilman kuormaa - täysin lukossa kuorman kanssa.
- Monia mahdollisia käyttökohteita, yhteensopiva röntgen-, TT- ja MRI-laitteiden kanssa. Suunniteltu minimaaliseen varjostukseen röntgenkuvauksessa.



### Kuvaus

Molift Stretcher MRI

### Tuotenro

2150108

### Mitat

Korkeus  
Ulkopituus  
Ulkkoleveys

126 mm  
1 980 mm  
630 mm



### Materiaali

Runko muovikomposiitista  
Lukot ruostumatonta terästä

### Paino

Kokonaispaino  
Käyttäjän enimmäispaino (SWL)\*

14,5 kg  
300 kg

### Yhteensopivuus

Molift Stretcher MRI:  
Yhteensopivuus MRI-kuvantamisen kanssa. Hyväksytty röntgen- ja TT-kuvantamiseen  
\* Turvallinen työkuorma riippuu aina nostimien turvallisesta työkuormasta, kun se on vähemmän kuin paareilla.





## Molift-nostinvarusteet



### StandUp-nostovarsi

2-pistenostovarsi Molift Quick Raiser 205 -nostimeen. Ihanteellinen käytettäväksi Molift RgoSling Standup -liinojen kanssa (katso sivu 6).

Tuotenro

2910061



### Pediatriinen jalkalevy

Tämä lisävaruste korottaa jalkatukea 10 cm. Lukitusvipu on helposti saatavilla, ja sen avulla on helppo lukita ja avata Molift Quick Raiser 205 -nostimen lisävaruste.

Tuotenro

2910065



### Jalkalevyn kohokuviosarja

Luistamattomasta materiaalista valmistetut kohokuviot lisäävät Molift Quick Raiser 205 -nostimen pediatriisen jalkalevyn kitkaa.

Tuotenro

2920151



### Jalkatuki, pidike ja pehmusteet

Vaihtoehtoiseen jalkatukeen Molift Quick Raiser 205 -nostimelle voi valita pienet tai suuret pehmusteet sekä lisäturvallisuutta antavan jalkaremmin.

S tuotenro

2910059

L tuotenro

2910056



### Sarja pehmusteita

Sarja sääripehmusteita Molift Quick Raiser 205 -nostimelle. Sarja sisältää vain pehmusteita, ei jalkaremmiä.

S tuotenro

2910076

L tuotenro

2910077



### Litiumakku ja latauslaite

Litiumakkuja on saatavilla vaihtoehtoisina virtalähteinä Molift Quick Raiser 205 -nostimelle. Yksikkö sisältää latauslaitteen. Litiumkennojen odotettu käyttöikä on 2 000 latausta (4 kertaa enemmän kuin tavallisilla akuilla)

Tuotenro

2910041



### Molift Smart 150 Soft Travel Bag

Molift Soft Travel Bag -kuljetuslaukku suojaa nostinta, akkua, laturia ja liinaa matkan aikana ja helpottaa kuljettamista.

Tuotenro

3049177



### Molift Smart 150 Travel Suitcase

Tämä kova matkalaukku antaa lisäsuojaa lentokuljetuksissa. Se on TSA:n hyväksymä lentokuljetukseen ja ihanteellinen aktiivista elämää viettävälle.

Tuotenro

0990200



### Molift-vaaka

Molift-vaaka on hyväksytty luokan III mukaan ja täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea BMI-painoindeksin yhdellä painikkeen kosketuksella.

Saatavilla Molift Mover 180- ja Molift Air -nostimiin.

Tuotenro

1840000



### Tukipyörät suuntalukituksella

Tukipyörät Ø 100 mm suuntalukituksella.

Saatavilla Molift Partner 255-, Mover 205- ja 300-nostimiin.

Tuotenro

1320140



### Kärry Molift Nomad -nostimelle

Kärry on ihanteellinen kuljetukseen ja säilytykseen. Siinä on myös tilaa Molift Nomad -jatkovarrelle ja erillinen kori liinoja ja muita varusteita varten.

Tuotenro

1200005



### Jatkovarsi Molift Nomad -nostimelle

Ainutlaatuinen jatkovarsi helpottaa Molift Nomad -nostimen kytkemistä kiskokelkkaan ja irrottamista siitä ilman työkaluja.

P: 900 mm tuotenro.

1200004

P: 1 050 mm tuotenro.

1200006



### Vaaka Molift Nomad -nostimelle

Molift-vaaka Nomad-nostinta varten on hyväksytty luokan III mukaan ja täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea BMI-painoindeksin yhdellä painikkeen kosketuksella.

Tuotenro

1100253







## Molift RgoSling -nostoliinat 4-pistenostokehikolle

Molift RgoSling -liinoja on saatavilla useita eri malleja ja kokoja. Näin voimme tarjota ratkaisun, olivatpa käyttäjän vaatimukset mitkä hyvänsä. Molift RgoSling -liinat on suunniteltu 4-pistenostokehikkoa varten.

### Liukusäätävät lenkit

Liukusäätävät lenkit päähihnoissa. Tekevät siirtymisestä makuuasennosta istuma-asentoon sujuvaa. Varmistavat siirrettävän mukavan ja turvallisen asennon.

### Värikoodit

Nostohihnojen lenkkien värikoodit auttavat löytämään sopivan asennon.

### Miellyttävä pehmustus

Selkä- ja jalkatuen pehmustus jakaa painon laajemmalle alueelle, mikä tekee nostoliinasta mukavamman siirrettävälle.

### Tuotetiedot

Selkeitä, käytännöllisiä tietoja hyvin näkyvässä kyltissä. Pesuohjeet ja tekniset tiedot löytyvät taustan suojataskusta.

### Ohjaushihnat

Ohjaushihnat auttavat siirrettävän henkilön asennon ohjaamista noston eri vaiheissa.

### Ohjaustasku

Ohjaustaskut selässä ja jalkatuissa helpottavat liinan pukemista.



## Molift RgoSling -liinat

Moliftillä on pitkäaikainen maine korkealaatuisten henkilönostinten ja nostoliinojen valmistajana. RgoSling on valikoima nostoliinoja, jotka on kehitetty terveydenhoidon jokapäiväisten tarpeiden vaatimukseen.

### Vakiomallit: HighBack ja MediumBack

Vakiomallimme on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa nostotilanteissa ja sopivat useimmille käyttäjille. Vakiomallit on saatavilla kahdella selkätuen korkeudella: HighBack tukee koko selän ja pään ja MediumBack tukee hartiatasolle. Verkkomallin nostoliina soveltuu yleiskäyttöön ja erityisesti peseytymistilanteisiin, koska se kuivuu nopeasti.

### Mallit erityisominaisuuksilla

Tiedämme, että käyttäjillä on monenlaisia eri vaatimuksia, joten olemme suunnitelleet erityisominaisuuksilla varustettuja lisämalleja, jotka täyttävät heidän tarpeensa, mukaan lukien wc-käyttöön RgoSling Toilet ja amputaatiomalli RgoSling Amputee.





## Molift RgoSling HighBack















### Tavallinen jalkatuen aukko

- Liukusäätävät lenkit päähinhoissa.
- Tukee koko selkää ja päätä.
- Nosto makuuasennosta tai istuma-asennosta ja takaisin.
- Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.
- Nosto lattialta.

## Molift RgoSling MediumBack

### Tavallinen jalkatuen aukko

- Liukusäätävät lenkit päähinhoissa.
- Sopii käyttäjälle, joka hallitsee pään liikkeit.
- Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.
- Säädä istuinkulmaa jalkahihnojen värikoodien avulla.

| Koko | HighBack, pehmustettu   | HighBack, verkko | Koko | MediumBack, pehmustettu   | MediumBack, verkko |
|------|---|------------------|------|---|--------------------|
| XXS  |  | 1720200          | XXS  |  | 1720300            |
| XS   |  | 1720210          | XS   |  | 1720310            |
| S    |  | 1720220          | S    |  | 1720320            |
| M    |  | 1720230          | M    |  | 1720330            |
| L    |  | 1720640          | L    |  | 1720340            |
| XL   |  | 1720650          | XL   |  | 1720350            |
| XXL  |  | 1720260          | XXL  |  | 1720360            |



## Molift RgoSling Toilet















### Laaja jalkatuen aukko

- Kiinteät hihnalenkit värikoodein.
- Helposti puettava ja riisuttava nostoliina wc-toimintoihin.
- Käyttäjille, joilla on hyvä tasapaino ja lihasjänteys.
- Mukava pehmustus.
- Joustava jalkatuki.
- Sisältää vyön - lisäturvallisuutta varten.

## Molift RgoSling Amputee

### Kapea jalkatuen aukko

- Liukusäätyvät lenkit päähienoissa.
- Käyttäjille, joiden jalka on amputoitu tai tasapaino tai lihasjänteys heikentynyt.
- Ihanteellinen ratkaisu korkealta amputoidulle käyttäjälle.
- Mukava pehmustus.
- Sisältää vyön - lisäturvallisuutta varten.

| Koko  | LowBack | HighBack | Koko  | MediumBack | HighBack |
|---|---------|----------|---|------------|----------|
| XXS  | 1720500 | 1720600  | XXS  | 1721100    | 1721200  |
| XS   | 1720510 | 1720610  | XS   | 1721110    | 1721210  |
| S    | 1720520 | 1720620  | S    | 1721120    | 1721220  |
| M    | 1720530 | 1720630  | M    | 1721130    | 1721230  |
| L    | 1720540 | 1720640  | L    | 1721140    | 1721240  |
| XL   | 1720550 | 1721450  | XL   | 1721150    | 1721250  |
| XXL  | 1720560 | 1720660  | XXL  | 1721160    | 1721260  |



## Molift RgoSling Shadow













### Tavallinen jalkatuen aukko

- Liukusäätävät lenkit päähinnoissa.
- Suunniteltu jätettäväksi käyttäjän alle, jolloin soveltuu käytettäväksi yksilöllisesti muotoilluissa istuimissakin.
- Miellyttävä nauhaton ja saumaton pinta, joka ei paina ihoa.
- Pienisilmäinen polyesteriverkko: Ei hihnoja, saumoja, taskuja tai tarroja, jotka joutuisivat kosketuksiin käyttäjän kanssa.

## Molift RgoSling Comfort HighBack

### Koko kehoa tukeva liina ilman halkaistua jalkaosaa

- Koko kehon ja pään tuki.
- Voidaan jättää pyörätuoliin käyttäjän alle.
- Polyesteriverkko tarjoaa hyvän ilmanvaihdon.
- Punainen sauma osoittaa takaosan keskikohdan ja helpottaa oikeaa pukemista.

| Koko  | HighBack | Koko  | HighBack |
|---|----------|---|----------|
| XXS  | 1722900  | XS   | 1721410  |
| XS   | 1722910  | S    | 1721420  |
| S    | 1722920  | M    | 1721430  |
| M    | 1722930  | L    | 1721440  |
| L    | 1722940  | XL   | 1721450  |
| XL   | 1722950  | XXL  | 1721460  |



## Molift RgoSling Ambulating Vest

### Kävelyharjoituksiin avustajan kanssa

- 4 nauhaa kiinteiden silmukoiden kanssa.
- Itsestään kiristävä hihna vyötäröllä.
- Seisomis- tai tasapainoharjoitteluun.
- Kaksinkertaiset soljet lisäturvallisuutta varten.
- Pehmustettua polyesterikangasta.
- Pehmustetut nivushihnat lisävarusteina.

## Molift RgoSling Fabric Stretcher

### Pehmeäkankainen nostoalusta makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin

- Molift RgoSling Fabric Stretcher soveltuu, kun normaalilla liinalla nostaminen ei sovi terveyden tilan vuoksi.
- Helppo pukea.
- Polyesterikangasta pään alueen pehmusteella.
- 8-pisteripustus.

| Koko  | Tuoteno | Koko   | Leveys x pituus | Tuoteno |
|---|---------|--|-----------------|---------|
| XXS  | 1721300 | M   | 45 x 175 cm     | 1721520 |
| XS   | 1721310 | L   | 65 x 178 cm     | 1721530 |
| S    | 1721320 | XL  | 90 x 183 cm     | 1721540 |
| M    | 1721330 |  |                 |         |
| L    | 1721340 |  |                 |         |
| XL   | 1721350 |  |                 |         |





## Molift EvoSling -nostoliina 2-pistenostokehikolle

Molift RgoSling -nostoliinoja on saatavilla useita eri malleja ja kokoja. Näin voimme tarjota ratkaisun, olivatpa käyttäjän vaatimukset mitkä hyvänsä. Molift EvoSling -nostoliinat on suunniteltu 2-pistenostokehikkoa varten.

### Värikoodit

Nostohihnojen lenkkien värikoodit auttavat löytämään sopivan asennon.

### Tuotetiedot

Selkeitä, käytännöllisiä tietoja hyvin näkyvässä kyltissä. Pesuohjeet ja tekniset tiedot löytyvät taustan suojataskusta.

### Ohjaustasku

Ohjaustaskut selässä ja jalkatuissa helpottavat liinan pukemista.

### Säädi kiinteillä lenkeillä

Nostolenkit sekä pää- että jalkatuissa mahdollistavat nostokehikon etäisyyden ja siirrettävän istuinkulman säätämisen.

### Mukava pehmustus

Selkä- ja jalkatuen pehmustus jakaa painon laajemmalle alueelle, mikä tekee nostosta mukavamman siirrettävälle.

### Ohjaushihnat

Ohjaushihnat auttavat siirrettävän henkilön asennon ohjaamista noston eri vaiheissa.



## Molift EvoSling

Moliftillä on pitkäaikainen maine korkealaatuisten henkilönostinten ja nostoliinojen valmistajana. EvoSling on valikoima nostoliinoja, jotka on kehitetty terveydenhoidon jokapäiväisten tarpeiden vaatimuksiin.


### Vakiomallit: HighBack, MediumBack ja LowBack

Vakiomallimme on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa nostotilanteissa ja sopivat useimmille käyttäjille. Niitä on saatavilla kolmella eri selkätuen korkeudella: HighBack, MediumBack ja LowBack. Pehmustetussa versiossa on polyesterikangas, jonka selkä- ja jalkaosat ovat pehmustettuja, ja verkkomallin nostoliinassa on polyesteriverkko pehmustettujen reisitukien kanssa.


### Mallit erityisominaisuuksilla

Tiedämme, että käyttäjillä on monenlaisia eri vaatimuksia, joten olemme suunnitelleet erityisominaisuuksilla varustettuja lisämalleja, jotka täyttävät heidän tarpeensa, mukaan lukien EvoSling Hygiene ja EvoSling Ampu.




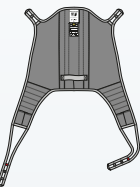


HighBack,  
pehmustettu

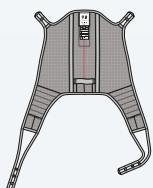

HighBack,  
verkko

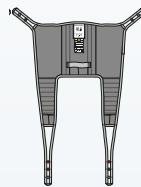

MediumBack,  
pehmustettu

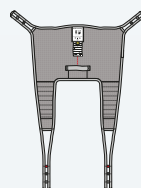

MediumBack,  
verkko

## Molift EvoSling HighBack

### Tavallinen jalkatuen aukko


- Tukee koko selkää ja päätä.
- Nosto makuuasennosta tai istuma-asennosta ja takaisin.
- Nosto lattialta.
- Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.
- Verkkomallissa on pehmustetut reisituet lisämukavuutta varten.

## Molift EvoSling MediumBack


### Tavallinen jalkatuen aukko

- Sopii käyttäjälle, joka hallitsee pään liikkeitä.
- Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.
- Verkkomallissa on pehmustetut reisituet lisämukavuutta varten.


| Koko |                                     | HighBack,<br>pehmustettu | HighBack,<br>pehmustettu verkko | Koko |                                     | MediumBack,<br>pehmustettu | MediumBack,<br>pehmustettu verkko |
|------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| XS   | <input type="checkbox"/>            | 1722810                  | 1722710                         | XS   | <input type="checkbox"/>            | 1723010                    | 1723110                           |
| S    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722820                  | 1722720                         | S    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1723020                    | 1723120                           |
| M    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722830                  | 1722730                         | M    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1723030                    | 1723130                           |
| L    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722840                  | 1722740                         | L    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1723040                    | 1723140                           |
| XL   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722850                  | 1722750                         | XL   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1723050                    | 1723150                           |
| XXL  | <input type="checkbox"/>            | 1722860                  | 1722760                         | XXL  | <input type="checkbox"/>            | 1723060                    | 1723160                           |

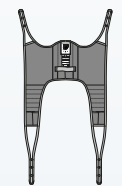

LowBack,  
pehmustettu

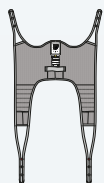

LowBack,  
verkko

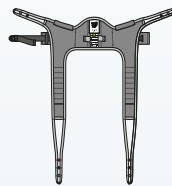

LowBack



## Molift EvoSling LowBack

### Tavallinen jalkatuen aukko

- Sopii käyttäjille, jotka hallitsevat pään liikkeitä.
- Mukava nojaava istuma-asento.
- Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.
- Verkkomallissa on pehmustetut reisituet lisämukavuutta varten.


## Molift EvoSling Hygiene

### Laaja jalkatuen aukko

- Mukava pehmustus.
- Vyö lisäturvallisuutta varten.
- Käyttäjille, joilla on hyvä perusvakaumus ja lihasjänteys.
- Helposti puettava ja riisuttava nostoliina wc-toimintoihin.

| Koko |                                     | LowBack,<br>pehmustettu | LowBack,<br>pehmustettu verkko | Koko |                                     | LowBack,<br>pehmustettu |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------|
| XS   | <input type="checkbox"/>            | 1722310                 | 1722510                        | XS   | <input type="checkbox"/>            | 1722210                 |
| S    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722320                 | 1722520                        | S    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722220                 |
| M    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722330                 | 1722530                        | M    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722230                 |
| L    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722340                 | 1722540                        | L    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722240                 |
| XL   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722350                 | 1722550                        | XL   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1722250                 |
| XXL  | <input type="checkbox"/>            | 1722360                 | 1722560                        | XXL  | <input type="checkbox"/>            | 1722260                 |



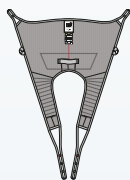

MediumBack,  
pehmustettu  
verkko



HighBack,  
verkko



## Molift EvoSling Ampu MediumBack

Kapea jalkatuen aukko


- Käyttäjille, joiden jalka on amputoitu tai perusvakaus tai lihasjänteys heikentynyt.
- Sopii käyttäjälle, joka hallitsee pään liikkeit.
- Osassa sisäpuolta on luistamatonta materiaalia.
- Nojaava istuma-asento.
- Mukava jalkatuen pehmustus.
- Polyesteriverkko.

## Molift EvoSling Shadow HighBack

Tavallinen jalkatuen aukko

- Käyttäjille, jotka tarvitsevat lisätukea.
- Suunniteltu jätettäväksi siirrettävän alle
- Kuusi hihnaa antavat lisää tukea, turvallisuutta ja joustavuutta.
- Käsivarret voidaan sijoittaa nostoliinan sisä- tai ulkopuolelle.
- Pienisilmäinen polyesteriverkko: Ei hihnoja, saumoja, taskuja tai tarroja, jotka joutuisivat kosketuksiin käyttäjän ihon kanssa.

| Koko                         | MediumBack, pehmustettu verkko | Koko                         | HighBack |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| XS <input type="checkbox"/>  | 1723210                        | XXS <input type="checkbox"/> | 1723900  |
| S <input type="checkbox"/>   | 1723220                        | XS <input type="checkbox"/>  | 1723910  |
| M <input type="checkbox"/>   | 1723230                        | S <input type="checkbox"/>   | 1723920  |
| L <input type="checkbox"/>   | 1723240                        | M <input type="checkbox"/>   | 1723930  |
| XL <input type="checkbox"/>  | 1723250                        | L <input type="checkbox"/>   | 1723940  |
| XXL <input type="checkbox"/> | 1723260                        | XL <input type="checkbox"/>  | 1723950  |

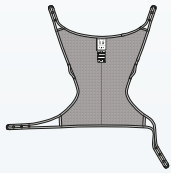

MediumBack



## Molift EvoSling Comfort MediumBack

Koko kehoa tukeva nostoliina ilman halkaistua jalkaosaa

- Ihanteellinen käyttäjille, joilla on nivelongelmia tai kipuherkkyyttä.
- Voidaan jättää pyörätuoliin käyttäjän alle.
- Polyesteriverkko tarjoaa hyvän ilmanvaihdon.
- Punainen sauma osoittaa takaosan keskikohdan ja helpottaa oikeaa pukemista.

## Molift EvoSling FlexiStrap

Avuksi ala- tai yläraajan nostamiseen

- Kannattelee ala- tai yläraajaa, ja siten voidaan välttää raskas nostotilanne ja vapauttaa hoitajan kädet muuhun.
- FlexiStrap on saatavana kahdella leveydellä.
- Pehmustettu polyesteri.
- Ohjaustasku helpottaa pukemista.

| Koko                         | MediumBack, verkko | Versio                            | Leveys x pituus | FlexiStrap |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| XS <input type="checkbox"/>  | 1722610            | Molift EvoSling FlexiStrap, vakio | 15 x 95 cm      | 1723310    |
| S <input type="checkbox"/>   | 1722620            | Molift EvoSling FlexiStrap, leveä | 25 x 95 cm      | 1723330    |
| M <input type="checkbox"/>   | 1722630            |                                   |                 |            |
| L <input type="checkbox"/>   | 1722640            |                                   |                 |            |
| XL <input type="checkbox"/>  | 1722650            |                                   |                 |            |
| XXL <input type="checkbox"/> | 1722660            |                                   |                 |            |



## Molift UnoSling

Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettut nostoliinat ovat käyttäjäkohtaisia. Molift UnoSling on tehokas ratkaisu infektiotartuntojen estämiseen.

Molfit UnoSling -nostoliinat on suunniteltu sopimaan sekä 2-piste että 4-pistenostokehikoihin.

### Hihnat 2 korkeudella

Nostohihnat kahdella eri korkeusasetuksella.

### 2-piste tai 4-piste

Molift UnoSling sopii käytettäväksi joko 2-piste- tai 4-pistenostokehikon kanssa.

### Miellyttävä tuki


Tukee koko selkää ja päätä.

### Tuoteseloste ja tila merkinnöille

Takana: suuri, selkeä tarra, jossa on käytännöllisiä tuotetietoja. Koko näytetään selvästi ja käyttäjän nimi on helppo lisätä, mikä varmistaa turvallisen käytön.

### Hävittävä tuote

Useimmille käyttäjille sopiva yleisliina.

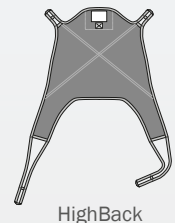

## Molift UnoSling HighBack

### Tavallinen jalkatuen aukko

- Henkilökohtainen hävitettävä liina lyhytaikaiseen käyttöön.
- Nosto makuuasennosta tai istuma-asennosta ja takaisin.
- Tukee koko selkää ja päätä.
- Ympäristöihin, joissa on lyhytaikaista tarvetta liinalle. Sama käyttäjä voi käyttää nostoliinoja useita kertoja.



Hävittävä tuote, joka toimitetaan pakkauksessa, jossa niitä on helppo säilyttää ja josta on helppo ottaa uusi nostoliina tarvittaessa.

| Koko | Määrä pakkauksessa | Tuotenumero |
|------|--------------------|-------------|
| S    | 20                 | 3060020     |
| M    | 20                 | 3060030     |
| L    | 20                 | 3060040     |
| XL   | 20                 | 3060050     |
| XXL  | 10                 | 3060060     |

### Hävittävä tuote

Älä pese. UnoSling pitää hävittää, kun käyttäjä ei enää tarvitse sitä tai kun se vahingoittuu tai likaantuu.



max  
300  
kg

max  
660  
lbs







# Tietoja

## Materiaalit



### Polyesteriä

Vakiopolyesterikangas on vahvaa ja kulutusta kestävä. Materiaalia on helppo huoltaa ja sen pinta hylkii likaa.




### Polyesteriverkko

Kulutusta kestävä, vahva verkkokangas on hengittävä ja kuivuu nopeasti. Sopii suihku- ja kylpytilanteisiin.



### Kuitukangas

Polypropyleenikuitua. Potilaskohtaiset nostoliinat, kun liinaa tarvitaan lyhytaikaiseen käyttöön.

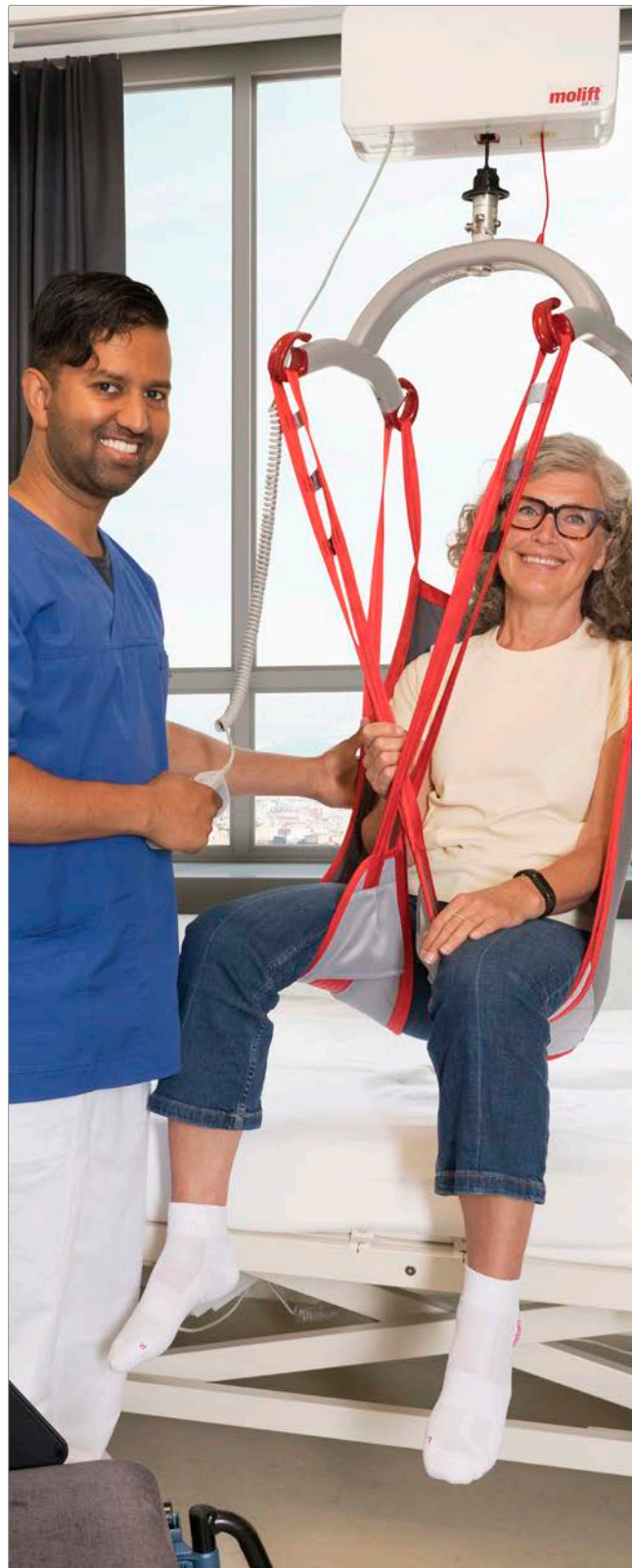

## Lisätietoja

| Koko | Suosittelu käyttäjän paino. |
|------|-----------------------------|
| XXS  | 12–17 kg                    |
| XS   | 17–25 kg                    |
| S    | 25–50 kg                    |
| M    | 45–95 kg                    |
| L    | 90–160 kg                   |
| XL   | 160–240 kg                  |
| XXL  | 230–300 kg                  |

### Pesuohteet



Pesulämpötila 60 - 85 °C  
Korkeammissa lämpötiloissa peseminen kuluttaa materiaalia enemmän.

max  
300 kg  
max  
660 lbs



# Molift–nostoliinojen lisävarusteet




## Molift EvoSling Support

Sopii nostoliinoille, joissa ei ole päätukea. Päätuki liitetään liinaan, ja sen pituutta voidaan säätää tarpeen mukaan käyttämällä muovisolkea. Se tukee käyttäjän päätä ja on hyödyllinen lisävaruste, kun käyttäjä tarvitsee lisätukea.



## Molift Strap Marker

Käytetään valitun nostolenkin merkitsemiseen pää- tai jalkatuen nostohihnoja varten. Merkitse nostolenkit, jotka valitaan liinan yksilöllisen testauksen aikana.

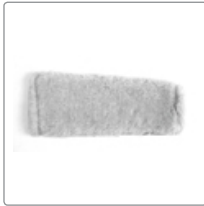

## Molift EvoSling Soft Padding

Paineherkille käyttäjille. EvoSling Soft Padding on painetta vähentävä pehmustettu suojuus, joka pujotetaan nostoliinan yksittäisen jalkatuen päälle. Pesulämpötila 40 °C.



## Molift Ambulating Vest -kävelyharjoitteluliivin nivusremmit

Nivusremmit sijoitetaan ulkokuulmaan, mikä minimoi puristumisriskin, kun liiveihin kohdistuu enemmän painoa.



## Molift RgoSling -lisälenkit

Hihnat helpompaa säätöä varten RgoSling: Käytetään nostohihnojen pidentämiseen, 3 eri kokoa.



## Molift-säilytysjärjestelmä -siirrettävä säilytyspussi

Molift Sling Storage System -säilytysjärjestelmä on hyödyllinen tuote Molift–nostoliinojen säilyttämiseen ja esittelemiseen ammattimaisesti!



## Molift EvoSling -lisälenkit

Hihnat helpompaa säätöä varten Käytetään nostohihnojen pidentämiseen tai jalkatukien pitämiseen yhdessä. Huom.: Tilaa 2, kun haluat parin.



## Immedia SlingOn

Kun käyttäjää ei voi kääntää kyljelleen Immedia SlingOn -liinan taittoteeniikan ansiosta se voidaan pukea käyttäjälle ilman, että tätä täytyy ensin kääntää kyljelleen. Pesulämpötila 80 °C.

| Tuote                                | Tuotenro                  |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Molift EvoSling Support              | 1723400                   |
| <b>Tuote (myydään pareittain)</b>    | <b>Koko</b>               |
| Molift EvoSling Soft Padding         | XS-M                      |
| Molift EvoSling Soft Padding         | L-XXL                     |
| Molift EvoSling Hygiene Soft Padding | S-XXL                     |
| <b>Tuote</b>                         | <b>Jatke</b>              |
| Molift RgoSling -jatkonostosilmukat  | Joustava: +6, +18 tai +26 |
| Molift EvoSling -jatkonostosilmukka  | +9 cm                     |
| Molift EvoSling -jatkonostosilmukka  | +18 cm                    |
| <b>Tuote (myydään pareittain)</b>    | <b>Tuotenro</b>           |
| Molift Strap Marker                  | 1723600                   |

| Tuote                                      | Koko            | Tuotenro        |
|--|-----------------|-----------------|
| Molift Ambulating Vest -liivin nivusremmit | XXS - XS        | 1721700         |
| Molift Ambulating Vest -liivin nivusremmit | S - M           | 1721720         |
| Molift Ambulating Vest -liivin nivusremmit | L - XL          | 1721740         |
| <b>Tuote</b>                               | <b>Tuotenro</b> |                 |
| Molift-säilytysjärjestelmä                 | 3030700         |                 |
| <b>Tuote (myydään pareittain)</b>          | <b>Koko</b>     | <b>Tuotenro</b> |
| Immedia SlingOn - Small                    | 80 x 100 cm     | IM437/S         |
| Immedia SlingOn - Medium                   | 80 x 170 cm     | IM438           |
| Immedia SlingOn - Large                    | 120 x 150 cm    | IM437           |



“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettyt tuotetiedot ovat osoitteessa [www.etac.com](http://www.etac.com)