



**Arkielämän
apuvälineet**


etac[®]
Creating Possibilities

Tuotteita, joiden suunnittelussa on pyritty toimivuuteen, turvallisuuteen ja yksinkertaisuuteen

Kylpyhuone on tapaturma-altis tila

Istuminen suihkun aikana sekä tukikahvojen ja ammelaudan käyttäminen turvalliseen siirtymiseen ovat hyviä esimerkkejä kylpyhuoneen turvallisuuden parantamisesta. Suihkujakkaran, wc-istuimen korotuksen ja ammelaudan on kuitenkin oltava toimivia ja turvallisia.

Toimivuus ja turvallisuus kulkevat Etacilla käsi kädessä. Siksi olemme ottaneet toimintaterapeutteja ja käyttäjiä mukaan tuotekehitystyöhömmme. Kaikki tuotteet testataan ja tarkistetaan huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikkien turvallisuusmääreiden vaatimukset.

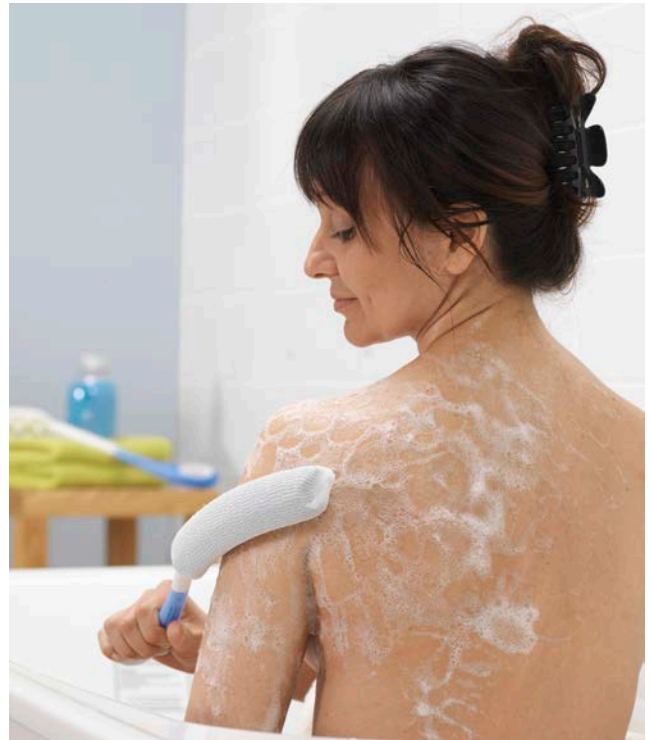

Katso osoitteesta www.etac.com tietoja viiden vuoden takuustamme.



Tuotekehitystä parhaimmillaan

Toimintaterapeutti teki kotikäynnin ikääntyneen, reumaa sairastavan miehen luokse, joka asuu yksin maalla. Hän huomasi epämiellyttävää hajua, joka oli peräisin miehen sukista. Hän piti samoja sukkia neljän päivän ajan, koska hänen oli hyvin vaikea saada puettua ja riisuttua ne itse.

Toimintaterapeutti esitteli yksinkertaisen muovisen sukanvetolaitteen, joka piti taittaa ja asettaa samaan aikaan sukan sisään. Se oli miehelle liian vaikeaa. Terapeutti ei antanut periksi, vaan kysyi tuotesuunnittelijaveljeltään, ottaisiko tämä haasteen vastaan. Kolmikko muodosti tiimin, joka oli päättänyt kehittää sukanvetolaitteen, jota vanha mies pystyisi käyttämään. Tuloksena syntyi pitkä, kartiomainen malli, joka oli yläosan muovikahvaa lukuun ottamatta sileää nailonkangasta. Nyt vanhus pystyi helposti vaihtamaan sukkansa joka päivä.

Lue lisää Etac Socky -sukanvetolaitteesta sivulta 12. Katso ohjevideoitamme Etac Socky -sukanvetolaitteiden käyttöön osoitteesta www.etac.com



Sisältö



Arkielämän apuvälineet

Etac Beauty -vartalonhoitotuotteet.....	6
Etac Torkel -wc-paperipihdit	8
Etac Aktiv -tarttumapihdit.....	10
Etac Socky -sukanvetolaite.....	12
Etac Butler -napittimet.....	12
Etac Contour -kynä ja Uni-yleisavaaja.....	14
Etac Relieve ergonomiset veitset.....	16
Etac Fix -monitoimileikkuulauta	18
Etac Cut -leikkuulauta.....	18
Etac Light -ruokailuvälineet.....	20
Etac Tasty -lasi, -muki ja -lautanen	22
Etac Feed -ruokailuvälineet.....	23



Katso osoitteesta www.etac.com
tietoja viiden vuoden takuustamme.

 etac®





Arkielämän apuvälineet

Tärkeistä jokapäiväisistä tehtävistä, kuten esineisiin tartumisesta, kääntämisestä, syömisestä, kirjoittamisesta ja pukeutumisesta, saattaa tulla vaikeaa niille, joiden käsivarsien ja käsien voima ja liikkuvuus ovat heikentyneet.

Arjen apuvälineemme lievittävät lihaksiin ja niveliin kohdistuvaa räsitystä ja kuormitusta helpottaen näiden tärkeiden tehtävien suorittamista itsenäisesti.




Etac Beauty -vartalonhoitotuotteet

Sen lisäksi, että Beauty-tuotteiden käyttö helpottaa vartalon pesemistä, ne myös hierovat pehmeästi ihoa ja päänahkaa.

Etac Beauty -vartalon- ja selänpesin

Beauty-vartalon- ja selänpesimet on suunniteltu helpottamaan ylettymistä ja peseytymistä. Pesuliinat eivät ime vettä, mikä tekee niistä kevyitä ja tasapainoisia myös märkinä. Kahvat ovat soikeat, ja niiden pinta mahdollistaa varman otteen. Pesuliinat ovat konepestäviä ja vaihdettavia.

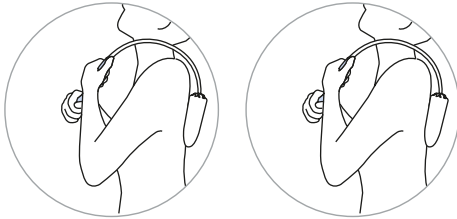

Etac Beauty - vartalonpesin on malliltaan käyttäjäystävällinen ja kaareva.

Etac Beauty -selänpesin on suunniteltu helpottamaan kahden käden otetta.



Etac Beauty -hiustenpesin

Beauty-hiustenpesin korvaa sormet shampooon levittämisessä ja päänahan hieromisessa. Varsi ja kädensija ovat malliltaan samanlaiset kuin vartalonpesimessä, mikä mahdollistaa päähän yltämisen käsiä, hartioita tai käsivarsia rasittamatta.

Kuvaus

Beauty-vartalonpesin	80210076
vartalonpesimen varapesuliina 2 kpl/pkt	80210103
Beauty-selänpesin	80210080
selänpesimen varapesuliina	80210104
Beauty-hiustenpesin	80210078

Pituus

Beauty-vartalonpesin: 38 cm
Beauty-selänpesin: 77 cm
Beauty-hiustenpesin: 36 cm

Tuoteno

Paino

Beauty-vartalonpesin: 112 g
Beauty-selänpesin: 203 g
Beauty-hiustenpesin: 112 g

Materiaalit

Polypropeeni ja TPE
Pesuliina: puuvilla, sisävuori polyeteeniä

Design

Ergonomidesign
Beauty-tuotemallit ovat rekisteröityjä



Etac Beauty -kampa ja -harja

Beauty-kammasta ja -harjasta on saatavana kaksi pituutta. Lyhyempää mallia suositellaan, kun käyttäjä yltää korvaan. Pidempi sopii käyttäjille, jotka yltävät ainoastaan hartioille. Sekä kampa että harja ovat kaarevia parhaan mukavuuden ja hallinnan varmistamiseksi hiusten kampaamisen/harjauksen aikana.



Beauty-monitoimikahva

Beauty-monitoimikahva asettuu mukavasti käteen ja tarjoaa useita eri käyttömahdollisuuksia. Asettamalla kynsiviilan monitoimikahvaan saat tehtyä helpon pedikyyrin. Kahvan leveämpään päähän voi kiinnittää hammasharjan tai parranajokoneen.

Etac Beauty -monitoimikahvassa on pehmeä ja tasainen pinta.



Kuvaus

Beauty-hiusharja	80210072
Beauty-hiusharja, pitkä	80210074
Beauty-kampa	80210068
Beauty-kampa, pitkä	80210070
Beauty-monitoimikahva	80210082

Pituus

Beauty-hiusharja: 29/37 cm
Beauty-kampa: 30/37 cm
Beauty-monitoimikahva: 11 cm

Tuotenro

Paino

Beauty-hiusharja 102/112 g
Beauty-kampa 80/90 g
Beauty-monitoimikahva: 45 g

Materiaalit

Polypropeeni ja TPE
Kynsiviila: hiomapaperi

Design

Ergonomidesign
Beauty-tuotemallit ovat rekisteröityjä






Etac Torkel -wc-paperipihdit

Intiimihygieniasta huolehtiminen on jokaiselle tärkeä tehtävä.


Enemmän yksityisyyttä

Kun tarttuminen, ulottuminen ja liikkuvuus ovat rajoittuneet, näiden pihdien avulla voidaan käyttää WC-paperia, pesuliinoja tai pieniä pyyhkeitä. Torkel-pihdit voidaan desinfioida, ja ne kestävät myös keittämisen.


Torkel-wc-paperipihdien käyttö:

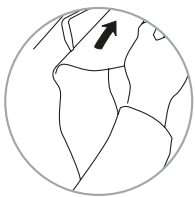


1. Repäise wc-paperipala (noin 40 cm).
Avaa pihdit puristamalla kahvasta ja pujota sitten paperi niiden väliin.

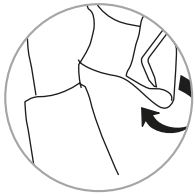

2. Kääri paperi löysästi pihdien ympärille, niin että se peittää kärjen.

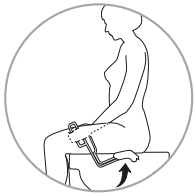

3. Pyyhi.

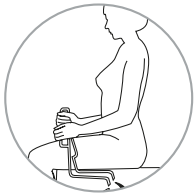

4. Avaa pihdit ja ravistele niitä irrottaaksesi wc-paperin.



Kuvaus

Torkel-wc-paperipihdit

Tuotenumero

80304001

Materiaali

Polyamidi-muovi

Mitat

Pituus: 33 cm

Design

Designkonsultterna

Paino

100 g




Puhdista tuote liuotinvapaalla puhdistusaineella (pH-arvo 5–9) tai 70-prosenttisella desinfiointiaineliuoksella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida enintään 85 °C:n lämpötilassa. Kestävät myös keittämistä.






Etac Aktiv -tarttumapihdit

Etac Aktiv -tarttumapihdeistä on saatavana useita eri malleja. Ne ovat kevyitä, ja niissä on ergonomisesti muotoillut kädensijat, jotka helpottavat kurottamista ja tarttumista. Pihdit avautuvat kokonaan, mutta tarttuvat silti pienimpiinkin esineisiin. Ainutlaatuista on mahdollisuus kääntää pihtien leuat. Ne on helppo vaihtaa vaaka-asennosta pystyasentoon. Kaikkien mallien kahvassa on magneetti pienien metalliesineiden poimimista varten.

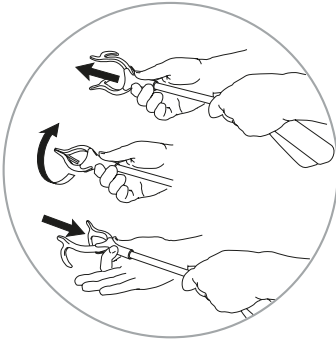

Pihdit voi asettaa kahteen eri asentoon.

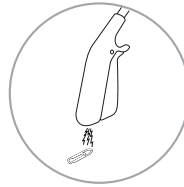

Kaikkien mallien kahvassa on magneetti metalliesineiden poimimista varten.

Etac Aktiv -tarttumapihdit, pitkät ja lyhyet

Etac Aktiv -tarttumapihtien kahvat ovat hieman taivutetut, ja niiden ohjaamiseen riittää kevyt ote kädellä. Väline hyödyntää käden voimaa ja siitä saa tehokkaan otteen. Kahvassa on tuki etusormelle, mikä parantaa pihtien käsiteltävyyttä. Tarttumapihtien leukojen tartuntapinta on pinnoitettu lujalla kumilla, mikä takaa suuren kitkan samalla pienentäen myös tarvittavaa voimaa.

Aktiivisista tarttumapihdeistä on saatavana viisi eri pituutta. Pitkiä pihtejä suositellaan, kun käyttö tapahtuu enimmäkseen seisaallaan.



Aktiivisilla 45 cm pitkillä tarttumapihdeillä yletty hyvin lattialle istuvasta asennosta.

Etac Aktiv -tarttumapihdit tuetulla otteella ja koukuilla

Näissä Aktiv-tarttumapihdeissä on 90° taivutettu kädensija ja kyynärvarren tuki, joka mahdollistaa käytön henkilöille, joiden nostokyky on hyvin rajallinen ja kädet heikot. Pihdeissä on koukut esineiden vetämistä tai työntämistä varten. Koukulla varustetuissa tarttumapihdeissä on myös samat käännettävät pihtien leuat ja magneetti pienten metalliesineiden poimimiseen.



Aktiv-tarttumapihdit, joissa tuenta käsivarrelle ja koukut pihtien leuoissa

Kahvaa on taivutettu, jotta ranne pysyy suorassa ja pihdeistä saa tukevan otteen. Kyynärvarren tuki yhdistettynä ote on tukeva ja tehokas.

Koukulliset Etac Aktiv -tarttumapihdit

Nämä kätevät koukulliset Etac-tarttumapihdit ovat täydellinen apuväline puukeutumiseen ja riisuutumiseen, kun koukkujen ansiosta vaatteita voidaan vetää tai työntää. Lisäksi koukulliset tarttumapihdit ovat yhtä kevyet ja erinomaisen toimivat kuin muut Aktiv-sarjan tarttumapihdit.



Koukulliset Aktiv-tarttumapihdit ovat täydellinen työkalu kurkottamiseen ja puukeutumiseen.



Koukkujen kuvioitu kuminen sisäpinta antaa hyvän otteen.

Kuvaus

Kuvaus	Tuotenumero
Aktiv-tarttumapihdit 45 cm	80505004
Aktiv-tarttumapihdit 60 cm	80505007
Aktiv-tarttumapihdit 70 cm	80505003
Aktiv-tarttumapihdit 80 cm	80505008
Aktiv-tarttumapihdit 90 cm	80505009
Tarttumapihdit tuetulla otteella ja koukuilla, 60 cm	80505005
Koukulliset tarttumapihdit, 45 cm	80505006

Nostokapasiteetti

Tarttumapihtejä ei tulisi käyttää yli 2 kg:n kuormien nostamiseen.

Paino

45 cm: 111 g
70 cm: 128 g
Tuetulla otteella varustetut tarttumapihdit: 139 g
Koukulliset tarttumapihdit: 117 g

Materiaalit

Kädensija ja pihdit: polykarbonaatti/ABS
Kyynärvarren tuki ja pihtien kiinnike: polyamidi
Putki: alumiini

Design

Ergonomidesign



Etac Socky -sukanvetolaite

Etac Butler -napittimet

Jalkoihin kurkottaminen tai pienten nappien tai vetoketjujen kiinnittäminen voi olla tuskallista, jos kipu rajoittaa liikkuvuutta tai motoriset taidot ovat heikentyneet. Nämä ongelmat voivat olla monimutkaisia, ja sama malli ei välttämättä sovi kaikille. Tässä on kolme vaihtoehtoista sukanvetolaitetta ja kaksi napitinta.

Etac Socky -sukanvetolaite, lyhyt

Lyhyt Socky on täydellinen sukanvetolaite sekä lyhyille että polvipituisille sukille, lentosukat mukaan lukien. Se koostuu muovipohjasta, jossa on kaksi koukkuja valmiiksi taitellun nailonkankaan alla.

Lyhyen Etac Sockyn käyttö

Sukka vedetään yksinkertaisesti Sockyn kankaan päälle, kunnes sen yläreuna ylittää koukkujen päälle. Aseta nauha pohkeen taakse ja vedä. Lyhyt Socky liukuu jalkaterän ja säären ympäri kevyesti ja asettaa sukan täydellisesti paikalleen.



Nailonkankaan alla olevat muovikoukut pitävät sukan paikallaan ja tekevät sukan pukemisesta helppoa.

Etac Socky -sukanvetolaite, pitkä

Pitkä Socky on täydellinen ratkaisu, kun käsivoimat ja liikkuvuus ovat rajoittuneita tai kun sukan ja lattian/maton välistä kitkaa on vähennettävä. Sitä voidaan käyttää sekä lyhyisiin että polvipituisiin sukkiin ja myös sukkahousuihin. Pitkä Socky koostuu pitkästä muovilevystä, joka on asetettu valmiiksi taitetun nailonkankaan alle ja jonka yläreunassa on kahva.

Pitkän Etac Sockyn käyttö

Sukka asetetaan yksinkertaisesti Sockyn kankaan ympärille ja vedetään ylös. Kahvaa käytetään pitkän Sockyn vetämiseen ylös samalla, kun muovilevy liukuu pitkin lattiaa ja pitää sukan varmasti paikallaan. Käytä sukkahousujen kanssa kahta pitkää Sockya, jotka on yhdistetty toisiinsa Etac Socky -yhdistäjäosalla.



Kahva tekee pitkän Sockyn käytöstä helppoa, kun käsien ja käsivarsien voima ja liikkuvuus ovat rajoittuneita.

Etac Socky -sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille

Tämä sukanvetolaite on suunniteltu eripituisille ja -tyyppisille tuki- ja kompressiosukille. Se koostuu kahdesta pitkästä nailonkangasosasta, jotka kiinnitetään toisiinsa tarranauhalla. Kummassakin osassa on suuri kahva, josta vetämällä sukka vedetään jalkaterän ja säären päälle.

Pitkän Sockyn käyttö

Aseta tukisukka Sockyn päälle. Kangasosat irtoavat toisistaan, kun vedät sukan ylös. Se auttaa myös hoitajaa hoidettavan avustamisessa.



Tämä Socky-malli auttaa myös hoitajaa avustamaan tuki- tai kompressiosukkien pukemisessa.

Etac Butler -napittimet

Butler-napittimista on saatavana kaksi mallia. Pyöreäkahvaista mallia voidaan käyttää sekä suurten että pienten nappien ja myös vetoketjujen käsittelyyn. Pitkähävainen malli sopii kaikenlaisten nappien, myös farkkujen metallinappien käsittelyyn.



Ohjevideo osoitteessa etac.com
Etac Sockyn käyttö



Pyöreä kahva tuntuu mukavalta kämmenellä.

Metallikoukku voidaan puristaa kokoon niin, että se sopii pieneen napinreikään.

Kuvaus

Socky-sukanvetolaite, lyhyt	80601002
Socky-sukanvetolaite, pitkä	80601001
Socky-yhdistäjäosa	80601021
Socky-sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille	80601003
Butler-napitin, pyöreä	80602001
Butler-napitin, pitkä	80602004

Pituus

Socky, lyhyt, 40 cm
 Socky, pitkä, 60 cm
 Socky-sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille: 100 cm
 Butler, pyöreä: 13 cm
 Butler, pitkä: 22 cm

Patentti

Lyhyt ja pitkä Socky on patentoitu.

Tuoteno

Paino

Socky, lyhyt: 94 g
 Socky, pitkä: 146 g
 Socky-sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille: 90 g
 Butler, pyöreä: 25 g
 Butler, pitkä: 18 g

Materiaalit

Socky-sukanvetolaitteet:
 Kangas: polyamidi
 Muoviosat: polypropeeni
 Butler-napittimet:
 Kahva: polystyreeni
 Pyöreä Butler, varsi: epoksinnoitettu metalli
 Pitkä Butler, koukku: galvanoitu lanka

Design

HM Center




Etac Contour -kynä ja Uni-yleisavaaja

Meidän kaikkien on aina joskus kirjoitettava muistiinpanoja tai allekirjoitettava asiakirjoja. Lisäksi ovien ja kaappien avaamiseksi tai lamppujen sytyttämiseksi ja sammuttamiseksi on käännettävä nuppeja ja kahvoja.

Etac Contour -kynä

Contour-kynä on suunniteltu erityisesti tarjoamaan mahdollisuus käsin kirjoittamiseen henkilöille, joiden käden otteet ovat heikot. Ohennetun otealueen ansiosta kynä asettuu mukavasti peukalon ja etusormen väliin. Peukalo vakauttaa otteen, ja kirjoittaminen onnistuu hyvin pienellä vaivalla. Kevyesti juokseva muste pienentää myös osaltaan sormiin kohdistuvaa kuormitusta.

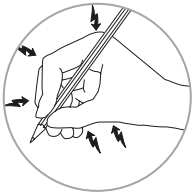


Contour-kynä lepää mukavasti peukalon ja etusormen välissä.



Etac Uni -yleisavaaja

Uni-yleisavaaja helpottaa arjen pieniä askareita, kuten pienten nappien ja kahvojen avaamista ja kääntämistä. Siinä on mukava ergonominen kahva, joka helpottaa punaisten tappien painamista sisään ennen kahvan kääntämistä. Punaiset kuusikulmaiset tapit varmistavat hyvän otteen nupin ympäri.

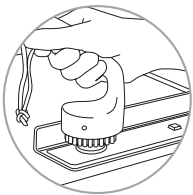

Uni-yleisavaaja antaa ranteelle tukevan ja mukavan otteen ja pienentää sorminivelten kuormitusta käytön aikana.



Kuvaus

Contour-kynä
Uni-yleisavaaja

Tuoteno

80701001
80503003

Design

Contour-kynä: Designkonsulterna
Uni-yleisavaaja: Ergonomidesign

Materiaalit

Contour-kynä: Kahva ABS-muovia
Uni-yleisavaaja: ABS
Tapit: polyamidi

Paino

Contour-kynä: 26 g
Uni-yleisavaaja: 84 g





Etac Relieve ergonomiset veitset

Relieve-veitsissä on pystykahva ja terävä terä, jotka helpottavat leikkaamista. Kahvan taivutus pitää ranteen suorana ja soikea muoto varmistaa tukevan otteen. Kahvan yläosa on pehmeästi kaareva, jotta peukalolle saa mukavan asennon. Leikkaamisen helpottamiseksi terä on erittäin terävä. Terän reuna on matalammalla kuin kahva, jotta vältetään käden kosketusta ruokaan.

Etac Relieve pystykahvainen yleisveitsi

Terä on riittävän pitkä ruoan ja leivän leikkaamiseen. Kädensijan taivutus on suunniteltu siten, että ranne on suorassa, kun leikkaaminen tapahtuu seisaallaan.



Relieve-yleisveitsi

Etac Relieve -leikkuuveitset

Näistä veitsistä on saatavana kaksi eri versiota: normaalikokoisille sekä pienille tai lasten käsille. Ne on suunniteltu siten, että ranne on suorassa, kun leikkaaminen tapahtuu pöydän ääressä istuen.



Relieve-leikkuuveitset

Kuvaus

Relieve-yleisveitsi	80501101
Relieve-leikkuuveitsi	80402101
Relieve-leikkuuveitsi, pieni	80402102

Materiaali

Terä: ruostumaton teräs
Relieve-yleisveitsi: kahva polyamidia
Relieve-leikkuuveitset: kahva polyamidia

Veitsen terän pituus

Relieve-yleisveitsi: 15 cm
Relieve-leikkuuveitsi: 11,5 cm
Pieni Relieve-leikkuuveitsi: 9 cm

Tuotenumero

Paino

Relieve-yleisveitsi: 75 g
Relieve-leikkuuveitsi: 72 g
Pieni Relieve-leikkuuveitsi: 37 g

Hoito

Konepesun kestävä

Design

Ergonomidesign

Etac Relieve -juustohöylä

Relieve-juustohöylällä viipaloit helposti juustoa, kurkkua ja muita vihanneksia.

Juustohöylään tartutaan siten, että peukalo asettuu kädensijan yläosaan. Kahva sopii kaikenkokoisiin käsiin. Pystykahvan alaosa on taivutettu, jotta käsi ei kosketa juustoa. "Aaltoileva" terä nostaa juusto- tai vihannesviipaleen irti terästä.



Kuvaus

Relieve-juustohöylä

Tuotenro

80502001

Materiaalit

Kahva: polypropeeni
Terä: ruostumaton teräs

Paino

Relieve-juustohöylä: 69 g

Hoito

Konepesun kestävä

Design

Ergonomidesign




Etac Fix -monitoimileikkuulauta

Etac Cut -leikkuulauta

Jos käsien toiminta on heikkoa tai käytössä on vain yksi käsi, nämä laitteet ovat korvaamattomia leikkattaessa, vatkattaessa tai raastettaessa.

Etac Fix -monitoimileikkuulauta

Fix-monitoimileikkuulauta pysyy tukevasti neljän kumitassun tai mukana tulevien imukuppijalkojen varassa. Leuat pitävät kulhon, raastimen tai ruokapalan paikallaan. Leikkuulaudan mukana tulee myös pieni levy, jonka sisältämät piikit pitävät pienemmät ruoanpalat paikoillaan. Se voidaan irrottaa tai kääntää piikit alaspäin tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.

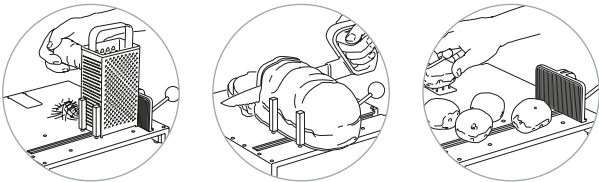

Etac Cut -leikkuulauta

Cut-leikkuulauta helpottaa leivän, pateen, pihvin tai minkä tahansa ruoan leikkaamista. Poikittaista tankoa kääntämällä on helppo säätää viipaleiden paksuutta.

Veitsi sopii ohjaimiin, mikä mahdollistaa turvallisen ja suoran leikkaamisen. Tämä arvokas apuväline kompensoi heikentynyttä näköä.



Kuvaus

Fix-monitoimileikkuulauta
Cut-leikkuulauta

Tuotenro

80501004
80501005

Paino

Fix-monitoimileikkuulauta: 1,3 kg
Cut-leikkuulauta: 415 g

Materiaalit

Fix-monitoimileikkuulaudan leikkuuosa: polystyreeni
Metalliosat: ruostumaton teräs
Leuat: PC/ABS
Cut-leikkuulauta: polystyreeni

Hoito

Konepesun kestävä

Design

Ergonomidesign
Fix-monitoimileikkuulauta on patentoitu





Etac Light -aterimet

Etac Light -aterimet sekä Tasty-lautaset ja -lasit helpottavat syömistä, kun käsien ja käsivarsien liikkuvuus on heikentynyt. Saatavana on useita eri malleja, ja ne kaikki ovat tietysti kevyitä.

Kaikille Light-aterimille on yhteistä kädensijan toimiva muotoilu ja muoto, joka tekee otteesta tukevan ja mukavan. Jokaisella aterimella on oma ainutlaatuinen muotonsa ja mallinsa käyttötarkoituksen mukaan ja käsien heikentyneen toiminnan kompensoimiseksi.

Etac Light -aterimet, paksut kädensijat

Paksuilla kädensijoilla varustetut Light-aterimet mahdollistavat rennon otteen. Paksu soikea muoto ja kevyt rakenne pienentävät sormiin kohdistuvaa rasitusta.

Ruokalusikassa on hieman pidempi ja ohuempi kädensija. Tämä helpottaa lusikan pitämistä peukalon ja etusormen välissä, mikä on yleisin tapa käyttää ruokalusikkaa. Leikkaamisen helpottamiseksi veitsen kädensijassa on viisto kohta, joka pienentää etusormeen kohdistuvaa kuormitusta, sekä erikoismallinen terävä terä.



Etac Light -lusikka, taivutettu

Kevyet ja taivutetut lusikat on suunniteltu helpottamaan tehokkaan otteen käyttöä syödessä. Pitkä ruostumaton varsi voi olla hieman taivutettu ranteen entisestäään heikentyneen liikkuvuuden kompensoimiseksi.

Taivutettuja lusikoita on saatavissa sekä oikea- että vasenkätisten käyttöön.



Kuvaus

Light-haarukka, paksu kädensija	80402002
Light-ruokalusikka, paksu kädensija	80402004
Light-veitsi, paksu kädensija	80402006
Light-jälkiruokalusikka, paksu kädensija	80402007
Light-lusikka, taivutettu	
- oikeaan käteen	80403201
- vasempaan käteen	80403202

Mitat

Haarukka: 18 cm
Lusikka: 22 cm
Veitsi: 21 cm
Jälkiruokalusikka: 18 cm
Lusikka, taivutettu: 19 cm

Tuotenro

Paino

Haarukka: 27 g
Ruokalusikka: 37 g
Veitsi: 23 g
Jälkiruokalusikka: 30 g
Lusikka, taivutettu: 35 g

Materiaalit

Käyttöesineosat: ruostumaton teräs
Kahva: ABS-muovi

Hoito

Konepesun kestävä


Design

Ergonomidesign

Etac Light -aterimet, ohuet kädensijat

Ohuiden kädensijojen ansiosta aterimet saa otettua kätevästi sormien väliin. Tämä on toimiva ote, kun voima ja liikkuvuus ovat niin rajoitettuja, että käden nostaminen edellyttää kämmenen kääntämistä ylöspäin. Pitkien kädensijojen ansiosta aterimia ei tarvitse nostaa yhtä korkealle kuin aterimia, joiden kädensijat ovat lyhyet.


Toimiva ote, kun lihasvoimaa on rajoitetusti.

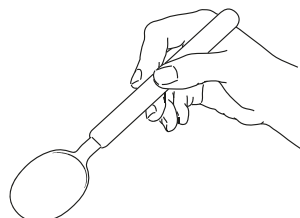

Ohuet kädensijat myös helpottavat syömistä, kun tarttumisotteet heikkenevät nivelten liikkuvuuden vaikeiden rajoitusten vuoksi.

Etac Light -monitoimiaterimet

Light-yhdistelmäaterimiin kuuluu veitsi/haarukka ja veitsi/lusikka, ja ne on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä. Kädensijan toinen puoli on litteä. Se takaa tukevan otteen leikattaessa. Veitsi-haarukkahdistelmästä on saatavissa oikea- ja vasenkätiset mallit, kun taas veitsi/lusikka sopii kummallekin kädelle.

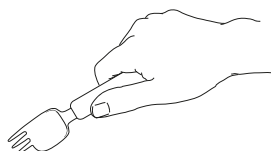

Kuvaus

Light-haarukka, ohut kädensija	80401003
Light-ruokalusikka, ohut kädensija	80401005
Light-veitsi, ohut kädensija	80401001
Light-jälkiruokalusikka, ohut kädensija	80401007
Monitoimiaterimet	
Light-veitsi/lusikka	80403001
Light-veitsi/haarukka, oikealle kädelle	80403002
Light-veitsi/haarukka, vasemmalle kädelle	80403003

Mitat

Haarukka: 21 cm
Lusikka: 21 cm
Veitsi: 22 cm
Jälkiruokalusikka: 20 cm
Monitoimiaterimet:
Veitsi/haarukka: 18 cm
Veitsi/lusikka: 20 cm

Tuotenro

Paino

Haarukka: 24 g
Ruokalusikka: 34 g
Veitsi: 21 g
Jälkiruokalusikka: 26 g
Monitoimiaterimet:
Veitsi/haarukka: 25 g
Veitsi/lusikka: 35 g

Materiaalit

Käyttöesineosat: ruostumaton teräs
Kahva: ABS-muovi

Hoito

Konepesun kestävä

Design

Ergonomidesign



Etac Tasty – lasi, muki ja lautanen

Tasty on kevyt tuotemallisto, joka sopii toiminnallisen ja kauniin muotoilunsa ansiosta tavalliselle katetulle pöydälle.

Etac Tasty -lasi

Tasty-lasi on keveytensä ja viinilasin inspiroiman muotoilunsa ansiosta helppo käsitellä. Se on helppo nostaa jalkaan tarttumatta. Aseta vain peukalo ja etusormi jalan ympärille, niin lasin pesä lepää kättä vasten.

Etac Tasty -lautanen

Tasty-lautasessa on korotettu reuna ja toisella puolella matala reuna, joka helpottaa ruoan ottamista yhdellä kädellä. Lautasen alapinnalla on kumipinnoitetta, joka varmistaa lautasan pysymisen tukevasti paikallaan. Tasty-lautanen sopii myös hoitajalle hoidettavan syöttämiseen.



Etac Tasty -muki

Tasty-muki koostuu muovimukista, mukinpidikkeestä ja nokallisesta kannesta. Suuri kahva yhdistettynä vastakkaisen reunan pidikkeen kanssa mahdollistaa erilaisia otteita, ja mukinpidikkeen suojakuori estää käsien palamisen kuuman nesteen vuoksi. Yksikahvainen ja pienellä pidikkeellä varustettu malli säästää tilaa keittiön kaapissa.



Kuvaus

Tasty-lasi	80404001
Tasty-lautanen korotetulla reunalla	80404005
Tasty-muki	80404042

Materiaalit

Lasi: polykarbonaatti
Lautanen: valkoinen, kuumuutta kestävä melamiini
Muki: polykarbonaatti
Pidike / nokallinen kansi: polypropeeni

Tilavuus

Lasi: 2 dl
Muki: 3 dl

Tuotenro

Paino

Lasi: 75 g
Lautanen: 160 g
Pidikkeen ja nokallisen kannen sisältävä muki: 125 g
Muki: 50 g
Pidike: 60 g
Nokallinen kansi: 15 g

Hoito

Konepesun kestävä. Säilyttää kiiltävän pintansa käsin pestynä.
HUOMAA! Lautasta ei saa käyttää mikroaaltouunissa.

Design

Ergonomidesign

Etac Feed -ruokailuvälineet

Aterimet ja juomamukit ovat toimiva ratkaisu sekä syötettävälle että syötöstä huolehtivalle. Tuotteet sopivat sekä lasten että apua tarvitsevien aikuisten syöttämiseen.

Etac-syöttöaterimet

Litteillä ja sileillä aterimilla on helppo syöttää hoidettavaa, jonka suunavaamiskyky on rajallinen. Avustava henkilö saa mukavan otteen kahvan yläosasta, ja tilaa jää myös syötettävän henkilön otetta varten.

Kaikki kolme mallia ovat litteitä, ja niiden päät ovat pehmeästi pyöristettyjä, minkä ansiosta ne tuntuvat mukavilta suussa.



Etac Feed -lusikka, säädettävä

Lusikka on suunniteltu erityisesti lapsille, jotta heidän olisi helpompi syödä itse. Tuetun tarttumisosteen ja muotoillun peukalotuen ansiosta käsi ei pääse luistamaan kahvasta. Lusikkapesän kulma säädetään sopivaksi pienellä ruuvilla. Elastisesta nauhasta on hyötyä lapsille, joiden tarttumisote on heikko.

Etac Feed -lusikka on saatavissa sekä oikea- että vasenkätisten käyttöön.



Etac-annosmuki

Annosmuki helpottaa juomisen avustamista. Nokkamainen muoto antaa hyvän kosketuksen huuliin ja pienentää tarvetta kallistaa päätä taakse turvallista kaatamista varten. Tämä muki on läpinäkyvä, ja siinä on ½ dl:n ja 1 dl:n merkinnät.



Kuvaus

Kuvaus	Tuotenro
Syöttölusikka	80403101
Syöttölusikka, pieni	80403102
Syöttöhaarukka	80403103
Lusikka, säädettävä	
taivutettu oikeaan käteen sopivaksi:	80403301
taivutettu vasempaan käteen sopivaksi:	80403302
Annosmuki	80404101

Tilavuus

Annosmuki: 1 dl

Mitat

Syöttölusikka: 22 cm
 Syöttölusikka, pieni: 20 cm
 Syöttöhaarukka: 22 cm
 Lusikka, säädettävä: 16 cm
 Annosmuki: Korkeus ilman nokkaa: 7 cm

Paino

Syöttölusikka: 37 g
 Syöttölusikka, pieni: 31 g
 Syöttöhaarukka: 34 g
 Lusikka, säädettävä: 40 g
 Annosmuki: 40 g

Materiaalit

Syöttölusikka ja -haarukka: Lämpömuovautuva polyesteri
 Lusikka, säädettävä: Valkoinen
 Polyamidi
 Annosmuki: polykarbonaatti

Hoito

Konepesun kestävä

Design

Ergonomidesign



“Jokaisen pitäisi pystyä elämään vapaata ja itsenäistä elämää ja tavoittelemaan unelmiaan fyysisistä olosuhteista riippumatta.”