

Käyttöohje

Octo LiftSheet -nostolakana on tarkoitettu avustettavien nostamiseen ja siirtämiseen vaaka-asennossa. Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan OctoStretch™-lisävarusteen kanssa (tuotenro 3156056).



TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue nostimen ja Liko OctoStretch -lisävarusteen käyttöohje ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Tätä välinettä saa käyttää vain koulutettu henkilökunta. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota.
	CE-merkintä
	Laillinen valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Lue käyttöohje ennen käyttöä.
	Tuotetunniste
	Sarjanumero
	Lääkinnällinen laite
	Kemiallinen pesu kielletty
	Silitys kielletty
	Rumpukuivaus kielletty
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).
	Lateksiton
	Valkaisu kielletty
	Määräaikaistarkastus
	Suunta ylöspäin; tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	Tuotteen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) tuotantopäivä (21) sarjanumero

 Lääkinnällinen luokan I laite

Turvaohjeet

Tuotemuutokset

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hill-Romin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Laitteen valmistuksen ja kehityksen hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO13485 mukaisesti. Hallintajärjestelmä on sertifioitu myös ympäristöstandardin ISO14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan asianmukaiselle viranomaiselle.

Hoito ja kunnossapito

Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Saumat
- Lenkit

⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesuohteet

Katso nostovarusteen tuotelappu ja mukana oleva liite "Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito".

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Tarkastus on tehtävä tätäkin useammin, jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän. Lisäohjeita saat Hill-Romin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on 5 vuotta. Käyttöiän arviointiperusteena on 10 käyttökertaa päivässä ja yksi pesukerta viikossa pesuohjeiden mukaisesti. Hill-Rom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.

Kierrätysohjeet


Koko LiftSheet-nostolakana on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hillrom opastaa käyttäjiä laitteiden turallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja paikallisia säännöksiä.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen ja pyydetävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Yleiskuvaus: Liko™ Octo LiftSheet™

Nimi	Koko	Tuotenro	Materiaali	Pituus (a X b)	Enimmäiskuormitus
Octo LiftSheet	M	3683105	Polyesteri	160 x 50 cm	200 kg
Octo LiftSheet	L	3683106	Polyesteri	170 x 90 cm	200 kg

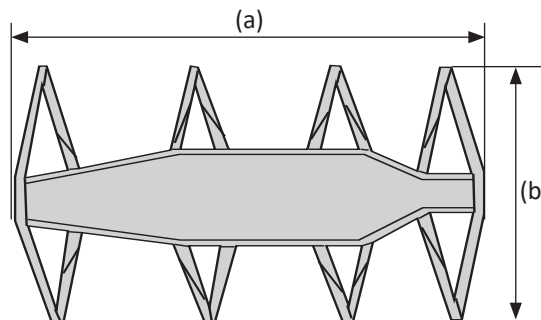

www.hillrom.com